



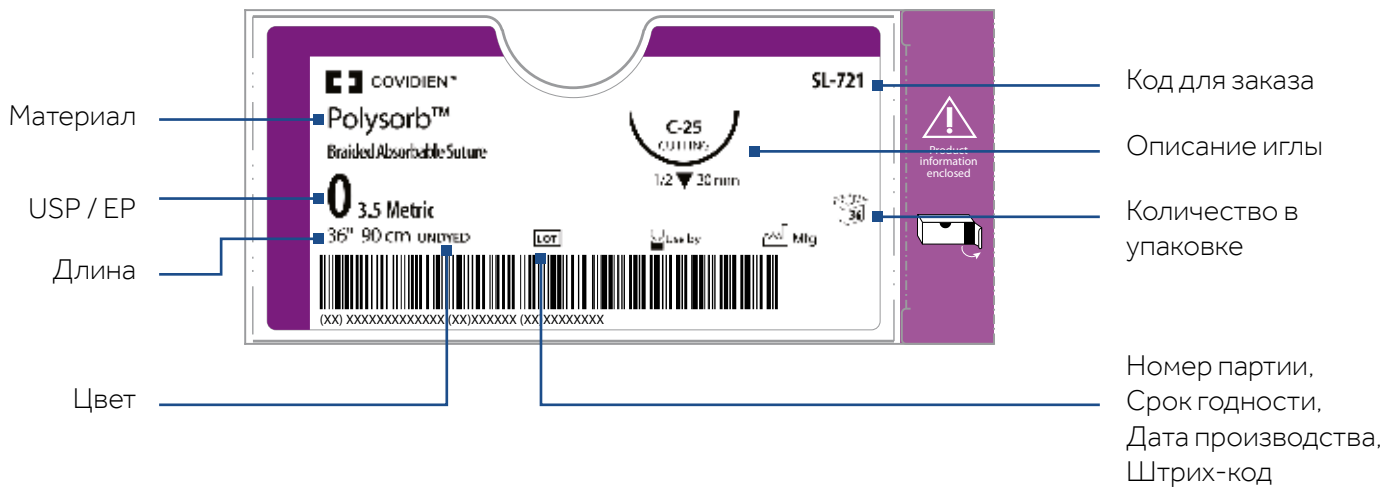
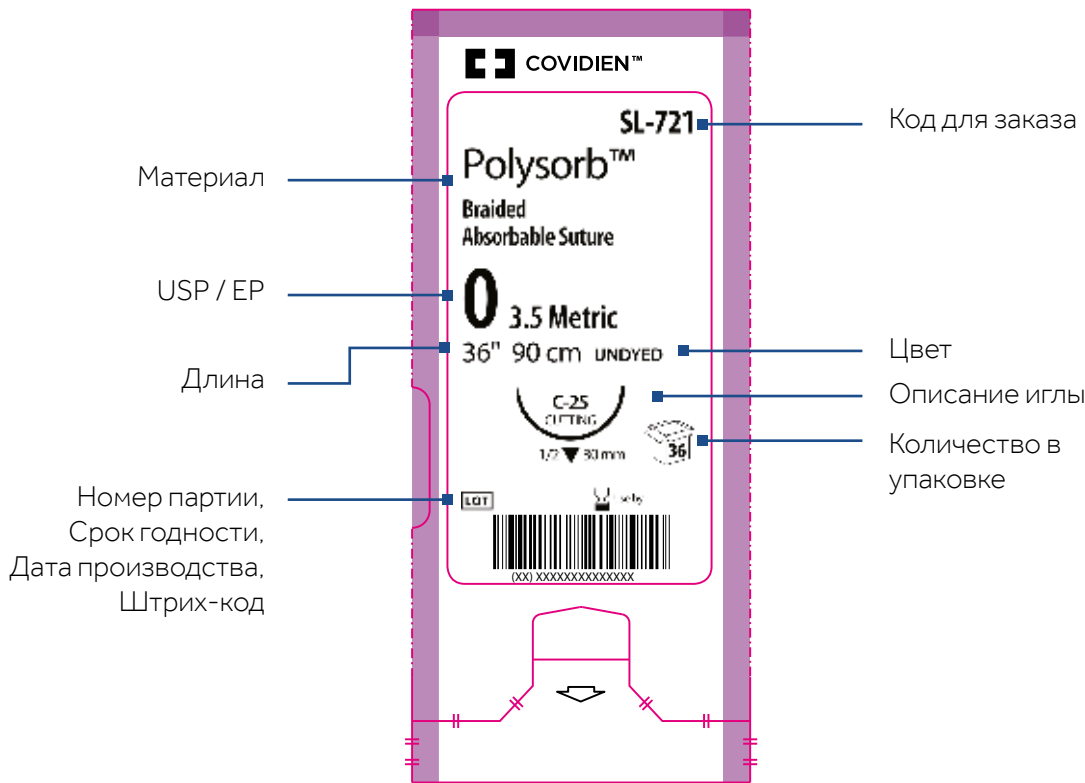
ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Каталог продукции 2017/2018

СОДЕРЖАНИЕ

	BIOSYN™	5
	MAXON™	13
	CAPROSYN™	21
	POLYSORB™	27
	VELOSORB™ FAST	43
	SURGIPRO™ и SURGIPRO™ II	49
	VASCUFIL™	61
	TI-CRON™ и SURGIDAC™	73
	MONOSOF™ /DERMALON™	83
	SURGILON™	91
	SOFSILK™	95
	STEEL™	101
	FLEXON™	105
	V-LOC™ 90	107
	V-LOC™ 180	111
	V-LOC™ PBT	115

МАРКИРОВКА И ЦВЕТ УПАКОВКИ



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Синтетический рассасывающийся шовный материал Biosyn™ изготавливается из синтетического полиэфира, состоящего из гликолида, диаксанола и триметилен карбоната Glycomer™ 631. Шовный материал Biosyn™ производится в бесцветном варианте или окрашенным в фиолетовый цвет.

ПОКАЗАНИЯ

Синтетический рассасывающийся шовный материал Biosyn™ предназначен для сопоставления тканей и/или для лигирования в общей, торакальной хирургии, урологии и гинекологии, офтальмохирургии. Не рекомендуется применение в сердечно-сосудистой и нейрохирургии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Синтетический рассасывающийся шовный материал Biosyn™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. Прогрессирующая потеря прочности и окончательное рассасывание шовного материала Biosyn™ происходит путем гидролиза. Шовный материал распадается на гликолиевую кислоту, диаксановую кислоту, пропандиол и углекислый газ, которые в последствии метаболизируются в организме.

СРОК ПОДДЕРЖКИ РАНЫ

Проведенные исследования в области подкожной имплантации шовного материала Biosyn™ определили, что примерно 75% прочности узла по USP и EP сохраняется в первые 2 недели и около 40% сохраняется по истечению 3 недель после имплантации шовного материала.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Окись этилена.

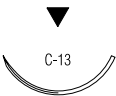
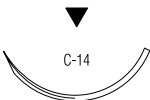
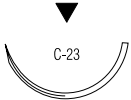
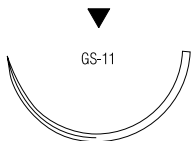
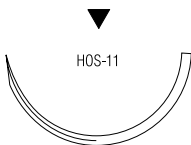
РАССАСЫВАНИЕ

Процесс рассасывания начинается как потеря прочности без потери массы и заканчивается между 90 и 110 днём.
Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

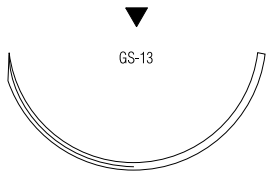
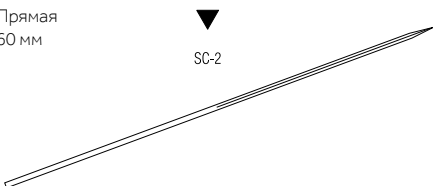
УПАКОВКА

Шовный материал BIOSYN™ производится в бесцветном варианте или окрашенным в фиолетовый цвет. Возможные варианты размеров от 1 (метрический размер 4) до 6-0 (метрический размер 0.7). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, в катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 и 36 шт.

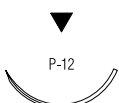
Без иглы / Non Needled						
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
Лигатуры	0	3.5	3x45	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	M-74
	1	4	3x45	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	M-75

Обратно-режущая / Reverse Cutting						
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 19 мм 	5-0	1	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SM-690
	4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SM-691
	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SM-822
3/8 круга 24 мм 	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SM-693
	2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SM-823
1/2 круга 24 мм 	4-0	1.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SM-633
1/2 круга 26 мм 	2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CM-879
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CM-816
	0	3.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CM-544
1/2 круга 37 мм Н 	1	4	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CM-528

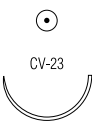
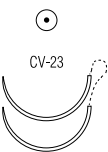
Обратно-режущая / Reverse Cutting

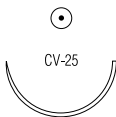
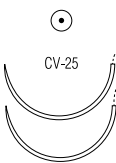
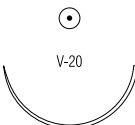
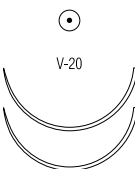
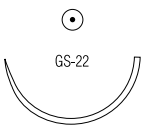
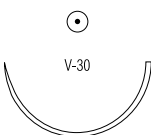
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 48 мм  GS-13	1	4	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CM-222
Прямая 60 мм  SC-2	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SM-643

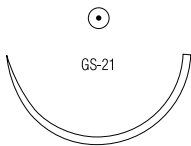
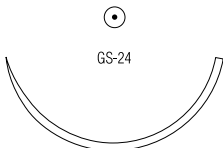
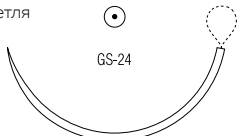
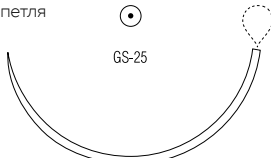
Косметическая обратно-режущая / Cosmetic Reverse Cutting

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 11 мм  P-10	6-0	0.7	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SM-3625
3/8 круга 13 мм  P-13	6-0	0.7	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SM-5688
	5-0	1	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SM-5687
	4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SM-5690
3/8 круга 19 мм  P-12	5-0	1	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SM-5624
	4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SM-5627
	4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SM-5637
	3-0	2	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SM-5628
	3-0	2	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SM-5638
3/8 круга 24 мм  P-14	4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	24	SURGALLOY™ SM-5679
	4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ SM-5678
	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SM-5679-G

Косметическая режущая / Cosmetic Conventional Cutting								
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
3/8 круга 16 мм		4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	DERMAX™	XM-845
3/8 круга 19 мм		5-0	1	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	DERMAX™	XM-822
		4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	DERMAX™	XM-823

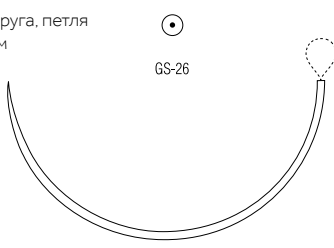
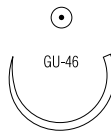
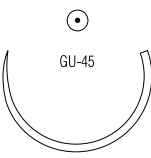
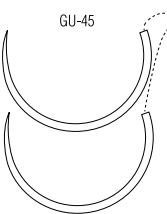
Колющая / Taper Point								
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
3/8 круга 13 мм		5-0	1	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™	CM-126
1/2 круга 12 мм		5-0	1	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™	SM-432
		4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™	SM-431
1/2 круга 13 мм		6-0	0.7	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™	UM-886
		6-0	0.7	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™	UM-986
		5-0	1	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™	GM-875
1/2 круга 17 мм		6-0	0.7	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™	UM-201
		5-0	1	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™	UM-213
		5-0	1	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™	UM-202
		4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™	UM-214
		4-0	1.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™	UM-203
		3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™	UM-215
		3-0	2	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™	UM-204
1/2 круга 17 мм		4-0	1.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™	UM-403
		3-0	2	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™	CM-208

Колющая / Taper Point								
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке			Код для заказа
1/2 круга 22 мм 	4-0	1.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™		GM-181
	3-0	2	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™		GM-324
	2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™		GM-183
1/2 круга 22 мм 	4-0	1.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™		GM-281
	4-0	1.5	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™		GM-291
	3-0	2	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™		GM-282
1/2 круга 26 мм 	4-0	1.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™		GM-121
	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™		GM-322
	3-0	2	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™		GM-122
	2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36			GM-323
	2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36			GM-123
	2-0	3	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36			GM-125
1/2 круга 26 мм 	4-0	1.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™		GM-421
	4-0	1.5	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™		GM-432
	3-0	2	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™		GM-332
1/2 круга 27 мм 	3-0	2	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36			CM-882
	2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36			CM-883
	0	3.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36			CM-831
	0	3.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36			CM-884
	1	4	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36			CM-832
1/2 круга 30 мм 	3-0	2	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36			GM-222
	2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36			GM-223
	2-0	3	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36			GM-326
	0	3.5	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36			GM-327

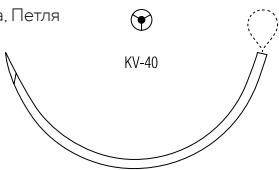
Колющая / Taper Point							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 37 мм 	GS-21	3-0	2	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CM-810
		2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CM-811
		2-0	3	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CM-953
		2-0	3	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CM-923
		0	3.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CM-844
		0	3.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CM-812
		0	3.5	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CM-954
		0	3.5	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CM-924
		1	4	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CM-845
		1	4	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CM-813
		1	4	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CM-925
1/2 круга 40 мм 	GS-24	0	3.5	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CM-914
		1	4	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CM-966
1/2 круга, петля 40 мм 	GS-24	1	4	150	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	НИТЬ 150 CM, ПЕТЛЯ 75 CM CM-767-L
1/2 круга 48 мм 	GS-25	0	3.5	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CM-904
		1	4	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CM-905
1/2 круга, петля 48 мм 	GS-25	0	3.5	150	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	НИТЬ 150 CM, ПЕТЛЯ 75 CM CM-790-L
		1	4	150	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	НИТЬ 150 CM, ПЕТЛЯ 75 CM CM-776-L

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOFT™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И ЕР ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

Колющая / Taper Point

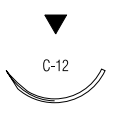
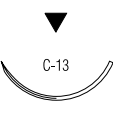
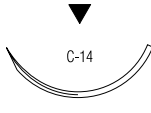
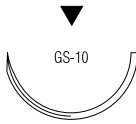
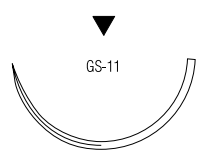
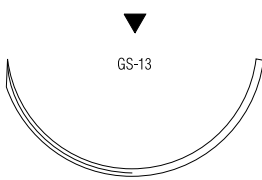
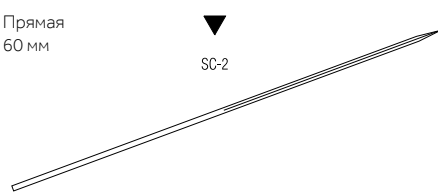
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга, петля 65 мм  GS-26	1	4	240	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	НИТЬ 240 CM, ПЕТЛЯ 120 CM CM-780-L
5/8 круга 27 мм  GU-46	3-0	2	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	UM-879
	2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	UM-978
	2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	UM-878
	0	3.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	UM-977
	0	3.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	UM-877
5/8 круга 37 мм  GU-45	2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	UM-345
	2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	UM-245
5/8 круга 37 мм  GU-45	3-0	2	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	UM-243

Колюще-режущая / Tappercutting

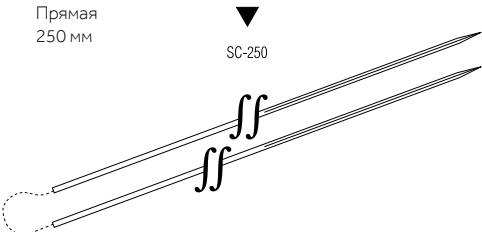
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга, Петля 48 мм  KV-40	1	4	150	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	НИТЬ 150 CM, ПЕТЛЯ 75 CM CM-740-L



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА	Синтетический рассасывающийся шовный материал Maxon™ и Maxon™ CV производится из полигликоната (кополимера гликолиевой кислоты и триметилен карбоната)
ПОКАЗАНИЯ	Синтетический рассасывающийся шовный материал Maxon™ и Maxon™ CV применяется для сопоставления тканей и/или для лигирования, включая использование в детской сердечно-сосудистой хирургии и в периферической сосудистой хирургии. Синтетический рассасывающийся шовный материал Maxon™ и Maxon™ CV не применяется во взрослой сердечно-сосудистой хирургии, офтальмохирургии, микрохирургии и на нервных тканях.
ПРИМЕНЕНИЕ	Синтетический рассасывающийся шовный материал Maxon™ и Maxon™ CV вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. Прогрессирующая потеря прочности и окончательное рассасывание шовного материала Maxon™ и Maxon™ CV происходит путем гидролиза.
СРОК ПОДДЕРЖКИ РАНЫ	Проведенные исследования в области подкожной имплантации шовного материала Maxon™ и Maxon™ CV определили, что примерно 80% прочности сохраняется после первой недели имплантации шовного материала. Приблизительно 75% прочности сохраняется в первые 2 недели, 65% прочности – в течение 3 недель, 50% прочности сохраняется по истечению 4 недель, 25% прочности остается на 6-ю неделю после имплантации шовного материала.
СТЕРИЛИЗАЦИЯ	Окись этилена.
РАССАСЫВАНИЕ	Процесс рассасывания заканчивается на 180 день. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
УПАКОВКА	Стерильный шовный материал MAXON™ и MAXON™ CV производится различной длины, диаметра и с разным количеством в индивидуальной упаковке с иглами и без игл. Шовный материал MAXON™ CV выпускается в размерах от 4-0 до 7-0. Шовный материал MAXON™ и MAXON™ CV выпускается окрашенным в зеленый D&C цвет № 6. Шовный материал MAXON™ возможен в неокрашенном виде.

Обратно-режущая / Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
3/8 круга 16 мм 	4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	8886611831	
3/8 круга 19 мм 	5-0	1	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	8886660821	
	4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	8886660831	
	4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	8886661231	
	4-0	1.5	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886663931	
	3-0	2	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	8886660841	
	3-0	2	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886663941	
3/8 круга 24 мм 	4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	8886661831	
	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	8886661841	
	3-0	2	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886664141	
	2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	8886661851	
	2-0	3	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886664151	
1/2 круга 26 мм 	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	8886674441	
	2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	8886674451	
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886675551	
	0	3.5	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886675561	
	1	4	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886675571	
1/2 круга 48 мм 	1	4	90	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886676971	
Прямая 60 мм 	4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	8886690831	
	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	8886690841	

Обратно-режущая / Reverse Cutting

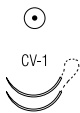
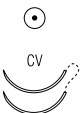
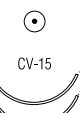
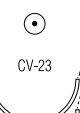
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
Прямая 250 мм 	2-0	3	75	ЗЕЛЁНЫЙ	12	8886639053

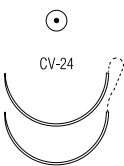
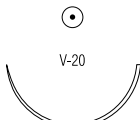
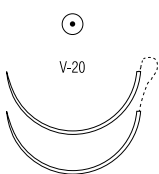
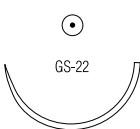
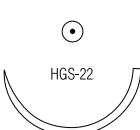
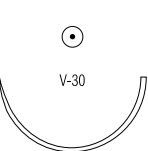
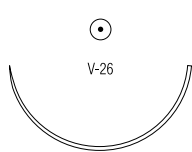
Косметическая обратно-режущая / Cosmetic Reverse Cutting

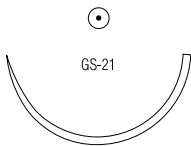
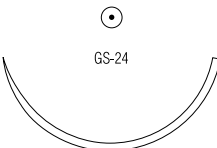
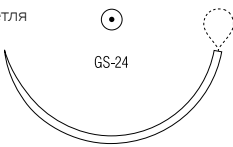
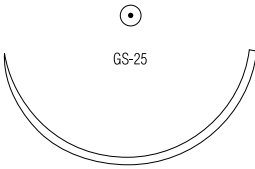
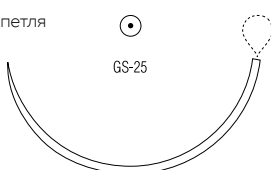
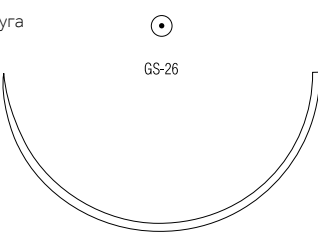
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 11 мм 	6-0	0.7	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ 8886653211
	5-0	1	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ 8886653221
3/8 круга 13 мм 	6-0	0.7	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ SMM-5516
	5-0	1	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ SMM-5526
	4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ SMM-5536
3/8 круга 16 мм 	4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ SMM-5431
1/2 круга 19 мм 	4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ SMM-5043
	3-0	2	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ SMM-5044

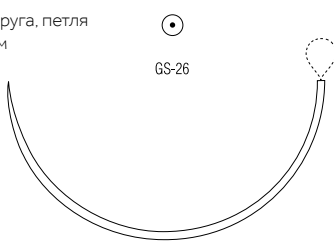
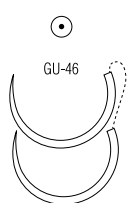
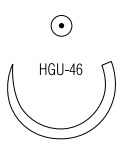
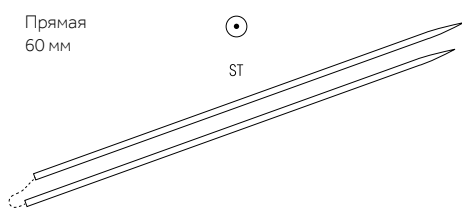
Шпатель/ Spatula

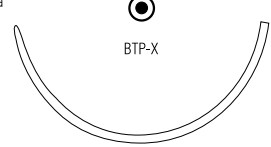
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 8 мм 	7-0	0.5	45	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886662801
Кривизна 130° Длина иглы 6.49 мм Радиус 3.56 мм						

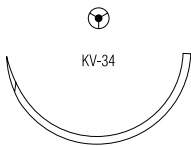
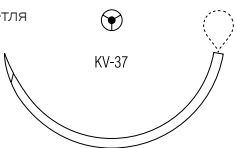
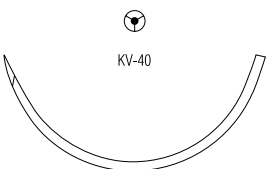
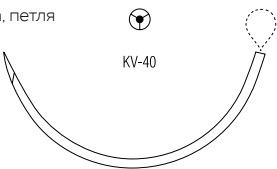
Колющая / Taper Point							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 9 мм		7-0	0.5	45	ЗЕЛЁНЫЙ	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™ 8886614501
		7-0	0.5	60	ЗЕЛЁНЫЙ	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™ 8886613901
		7-0	0.5	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™ 8886612701
		6-0	0.7	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™ 8886612711
3/8 круга 13 мм		6-0	0.7	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™ 8886614811
3/8 круга 13 мм		6-0	0.7	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™ 8886612411
		5-0	1	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™ 8886612421
3/8 круга 17 мм		4-0	1.5	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886605731
3/8 круга 17 мм		5-0	1	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™ 8886646221
		4-0	1.5	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™ 8886646231
1/2 круга 13 мм		6-0	0.7	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	SURGALLOY™ 8886621311
		5-0	1	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	SURGALLOY™ 8886621321
1/2 круга 17 мм		5-0	1	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	SURGALLOY™ 8886620721
		4-0	1.5	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	SURGALLOY™ 8886620731
		3-0	2	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	SURGALLOY™ 8886620741
1/2 круга 17 мм		5-0	1	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™ 8886614921
		4-0	1.5	90	ЗЕЛЁНЫЙ	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™ 8886613431

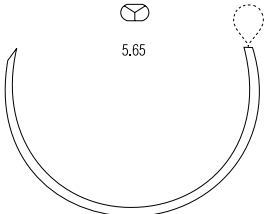
Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
1/2 круга 20 мм 	5-0	1	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886621721	
	4-0	1.5	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886621731	
	3-0	2	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886621741	
1/2 круга 20 мм 	4-0	1.5	90	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886622131	
	3-0	2	90	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886603641	
1/2 круга 26 мм 	4-0	1.5	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	SURGALLOY™	8886623331
	3-0	2	5x45	ЗЕЛЁНЫЙ	12	D-TACH™	8886622943
	3-0	2	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886623341	
	2-0	3	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	SURGALLOY™	8886623351
1/2 круга 26 мм 	4-0	1.5	90	ЗЕЛЁНЫЙ	36	SURGALLOY™	8886623531
	3-0	2	90	ЗЕЛЁНЫЙ	36	SURGALLOY™	8886623541
1/2 круга 27 мм 	2-0	3	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886624551	
	0	3.5	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886624561	
1/2 круга 27 мм Н 	0	3.5	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886624961	
1/2 круга 30 мм 	3-0	2	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886626141	
	2-0	3	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886626151	
	0	3.5	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886626161	
1/2 круга 37 мм 	3-0	2	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886625741	
	2-0	3	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886625751	
	0	3.5	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886625761	

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886626751	
	0	3.5	90	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886626961	
	1	4	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886626771	
1/2 круга 40 мм 	2-0	3	90	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886628751	
	0	3.5	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886628561	
	0	3.5	90	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886628761	
	1	4	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886628571	
	1	4	90	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886628771	
1/2 круга, петля 40 мм 	0	3.5	150	ЗЕЛЁНЫЙ	12	НИТЬ 150 CM, ПЕТЛЯ 75 CM	GMM-563-L
	1	4	150	ЗЕЛЁНЫЙ	12	НИТЬ 150 CM, ПЕТЛЯ 75 CM	GMM-573-L
1/2 круга 48 мм 	0	3.5	90	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886630761	
	1	4	90	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886630771	
1/2 круга, петля 48 мм 	0	3.5	150	ЗЕЛЁНЫЙ	12	НИТЬ 150 CM, ПЕТЛЯ 75 CM	GMM-634-L
	1	4	150	ЗЕЛЁНЫЙ	12	НИТЬ 150 CM, ПЕТЛЯ 75 CM	GMM-632-L
1/2 круга 65 мм 	1	4	150	ЗЕЛЁНЫЙ	24	8886631972	

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
1/2 круга, петля 65 мм  GS-26	0	3.5	150	ЗЕЛЁНЫЙ	12	НИТЬ 150 СМ, ПЕТЛЯ 75 СМ	GMM-341-L
	0	3.5	240	ЗЕЛЁНЫЙ	12	НИТЬ 240 СМ, ПЕТЛЯ 120 СМ	GMM-343-L
	1	4	240	ЗЕЛЁНЫЙ	12	НИТЬ 240 СМ, ПЕТЛЯ 120 СМ	GMM-344-L
5/8 круга 27 мм  GU-46	2-0	3	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886640451	
5/8 круга 27 мм Н  HGU-46	0	3.5	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886645661	
	1	4	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886641971	
Прямая 60 мм  ST	3-0	2	75	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886623741	

Тупоконечная колющая / Blunt Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
1/2 круга 48 мм  BTP-X	1	4	150	ЗЕЛЁНЫЙ	12	НИТЬ 150 СМ, ПЕТЛЯ 75 СМ	GMMT-90-L

Колюще-режущая / Tapercutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
1/2 круга 37 мм 	0	3.5	90	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886627761	
1/2 круга, петля 40мм 	1	4	150	ЗЕЛЁНЫЙ	12	НИТЬ 150 CM, ПЕТЛЯ 75 CM	GMM-873-L
1/2 круга 48мм 	1	4	90	ЗЕЛЁНЫЙ	36	8886629571	
1/2 круга, петля 48мм 	0	3.5	150	ЗЕЛЁНЫЙ	12	НИТЬ 150 CM, ПЕТЛЯ 75 CM	GMM-806-L
	1	4	150	ЗЕЛЁНЫЙ	12	НИТЬ 150 CM, ПЕТЛЯ 75 CM	GMM-807-L

Многоцелевая / Multipurpose							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
5/8 круга 65 мм 	0	3.5	150	ЗЕЛЁНЫЙ	12	НИТЬ 150 CM, ПЕТЛЯ 75 CM	GMM-496-L
	1	4	180	ЗЕЛЁНЫЙ	12	НИТЬ 180 CM, ПЕТЛЯ 90 CM	GMM-497-L

CAPROSYN™

МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ POLYGLYTONE™ 6211

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал Caprosyn™ изготавливается из синтетического полиэфира POLYGLYTONE™ 6211, который состоит из гликолида, капролактона, триметилен карбоната и лактида.

ПОКАЗАНИЯ

Синтетический рассасывающийся шовный материал Caprosyn™ предназначен для сопоставления тканей и/или для лигирования в общей, пластической и косметической хирургии, урологии и гинекологии. Применение в сердечно-сосудистой хирургии и на нейрохирургии, микрохирургии и офтальмологии не рекомендуется.

ПРИМЕНЕНИЕ

Синтетический рассасывающийся шовный материал Caprosyn™ вызывает минимальную острую воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. Прогрессирующая потеря прочности и окончательное рассасывание шовного материала Caprosyn™ происходит путем гидролиза.

СРОК ПОДДЕРЖКИ РАНЫ

Проведенные исследования в области подкожной имплантации шовного материала Caprosyn™ определили, что минимум 50 – 60% прочности узла по USP и EP сохраняется в первые 5 дней и около 20 – 30% сохраняется по истечении 10 дней после имплантации шовного материала. Полная потеря прочности происходит к 21 дню после имплантации.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Окись этилена.

РАССАСЫВАНИЕ

Процесс рассасывания начинается, как потеря прочности без потери массы и заканчивается к 56 дню.
Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

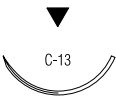
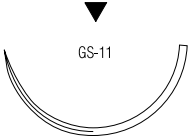
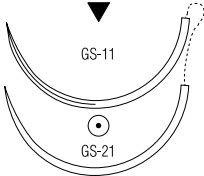
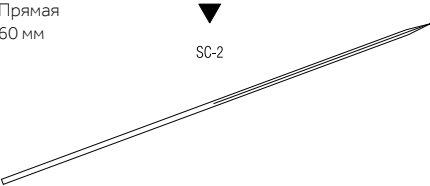
УПАКОВКА

Шовный материал CAPROSYN™ производится в бесцветном варианте или окрашенными в фиолетовый D&C цвет № 2. Возможные варианты размеров от USP 1 (метрический размер 4) до 6-0 (метрический размер 0.7). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 и 36 шт.

CAPROSYN™

МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ POLYGLYTONE™ 6211

Без иглы / Non Needled							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
Отрезки стандартной длины	0	3.5	150	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	C-214	

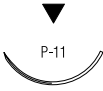
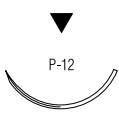
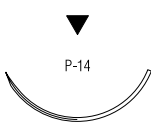
Обратно-режущая / Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
3/8 круга 19 мм 	4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SC-690-G	
	4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SC-691	
	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SC-692	
3/8 круга 24 мм 	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SC-693-G	
3/8 круга 26 мм 	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SC-587	
	2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SC-586	
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-543	
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	150	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-983	
Прямая 60 мм 	4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SC-644	
	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SC-643	

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOFT™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И ЕР ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

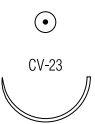
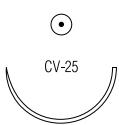
CAPROSYN™

МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ POLYGLYTONE™ 6211

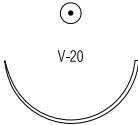
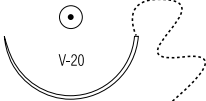
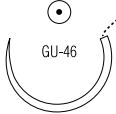
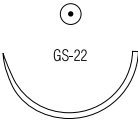
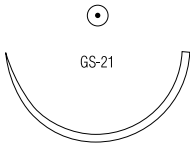
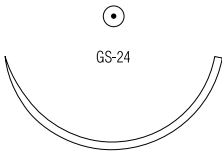
Косметическая обратно-режущая / Cosmetic Reverse Cutting

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 11 мм 	6-0	0.7	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SC-3625-G
	5-0	1	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SC-3626-G
3/8 круга 13 мм 	6-0	0.7	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SC-5688-G
	5-0	1	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SC-5689-G
	5-0	1	45	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	SURGALLOY™ SC-5587-G
	4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SC-5690-G
	4-0	1.5	45	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	SURGALLOY™ SC-5590-G
3/8 круга 16 мм 	4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SC-5686-G
3/8 круга 19 мм 	5-0	1	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SC-5616-G
	4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SC-5617-G
	4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SC-5637-G
	3-0	2	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SC-5618-G
	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SC-5638-G
3/8 круга 24 мм 	4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ SC-5679
	4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ SC-5779
	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ SC-5780-G

Колющая / Taper Point

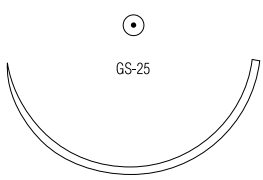
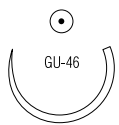
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 17 мм 	5-0	1	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ UC-202
	4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ UC-203
1/2 круга 22 мм 	4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ UC-403
	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ UC-404

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOF™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И EP ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

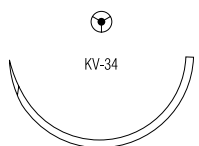
Колющая / Taper Point							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 22 мм		2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	UC-863
1/2 круга 26 мм		4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ GC-121
		4-0	1.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™ GC-321
		3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ GC-122
		3-0	2	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™ GC-322
		2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ GC-123
		2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™ GC-323
		0	3.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	GC-124
1/2 круга 26 мм 5/8 круга 27 мм		2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-558
		2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CC-658
1/2 круга 27 мм							
1/2 круга 27 мм		2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-883
		2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CC-830
		0	3.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-884
		1	4	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-885
1/2 круга 37 мм		3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-810
		2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-811
		2-0	3	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-923
		0	3.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-812
		0	3.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CC-844
		0	3.5	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-924
		1	4	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-813
		1	4	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CC-845
		1	4	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-925
1/2 круга 40 мм		2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-801
		2-0	3	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-915
		0	3.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-802
		0	3.5	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-913
		1	4	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-803
		1	4	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-914

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOFT™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И ЕР ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

Колющая / Taper Point

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 48 мм 	0	3.5	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-904
	1	4	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CC-905
5/8 круга 27 мм 	2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	UC-978

Колюще-режущая / Tapercutting

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	CC-1945-G

Косметическая режущая / Cosmetic Conventional Cutting

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 13 мм 	5-0	1	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	XC-834
3/8 круга 16 мм 	5-0	1	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	XC-844
	4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	XC-845
3/8 круга 19 мм 	4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	XC-823



POLYSORB™

ПЛЕТЁНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ LACTOMER™ 9-1

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Покрытый, плетёный синтетический рассасывающийся шовный материал Polysorb™ состоит из Lactomer™ 9-1 кополимера гликолид/лактида, который представляет собой синтетический полиэфир, состоящий из гликолида и лактида, полученного из гликолиевой и молочной кислоты. Шовный материал Polysorb™ при изготовлении покрывается составом из кополимера капролактона, гликолида и стеаройл лактилата кальция.

ПОКАЗАНИЯ

Шовный материал Polysorb™ предназначен для сшивания или для лигирования тканей в общей, торакальной хирургии, урологии и гинекологии, офтальмохирургии. Однако применение в сердечно-сосудистой хирургии и на нервных тканях ограничено.

ПРИМЕНЕНИЕ

Синтетический рассасывающийся шовный материал Polysorb™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. Прогрессирующая потеря прочности и окончательное рассасывание шовного материала Polysorb™ происходит путем гидролиза, когда Lactomer™9-1 распадается на гликолиевую и молочную кислоту, которые впоследствии метаболизируются в организме и выводятся почками.

СРОК ПОДДЕРЖКИ РАНЫ

Проведенные исследования в области подкожной имплантации шовного материала Polysorb™ определили, что его первоначальная прочность в узле оценивается как 140% стандарта USP и EP. Около 80% прочности сохраняется в первые 2 недели и более 30% сохраняется по истечению 3 недель после имплантации шовного материала.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Окись этилена.

РАССАСЫВАНИЕ

Процесс рассасывания начинается как потеря прочности без потери массы и заканчивается между 56 и 70 днями.
Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

УПАКОВКА

Шовный материал Polysorb™ производится в бесцветном варианте или окрашенном в фиолетовый цвет. Возможные варианты размеров от 2 (метрический размер 5) до 8-0 (метрический размер 0.4). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, как перманентно зафиксированных, так и отсоединяемых. Формируется в коробках по 12, 24 и 36 шт.

POLYSORB™

ПЛЕТЁНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ LASTOMER™ 9-1

Без иглы / Non Needled						
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
Лигатуры	4-0	1.5	12x45	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	L-11
	3-0	2	12x45	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	L-12
	3-0	2	6x75	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	L-38
	2-0	3	12x45	НЕОКРАШЕННЫЙ	24	L-3
	2-0	3	12x45	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	L-13
	2-0	3	3x45	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	L-73
	2-0	3	6x45	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	L-23
	2-0	3	12x60	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	L-33
	2-0	3	3x75	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	L-403
	2-0	3	6x75	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	L-39
	0	3.5	12x45	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	L-27
	0	3.5	6x45	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	L-14
	0	3.5	3x75	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	L-404
	0	3.5	6x75	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	L-40
	1	4	6x45	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	L-15
	1	4	12x60	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	L-36
	1	4	3x75	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	L-405
	1	4	6x75	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	L-41
	2	5	12x45	НЕОКРАШЕННЫЙ	24	L-26
	2	5	12x45	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	L-28
	2	5	3x45	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	L-76
	2	5	6x75	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	L-42
Отрезки стандартной длины	4-0	1.5	150	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	L-111
	3-0	2	150	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	L-112
	2-0	3	150	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	L-113
	0	3.5	150	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	L-114
	1	4	150	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	L-115
	2	5	150	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	L-116

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOFT™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И ЕР ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

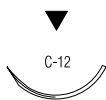
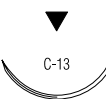
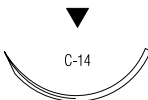
POLYSORB™

ПЛЕТЁНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ LACTOMER™ 9-1

Без иглы / Non Needed

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
Катушки	4-0	1.5	150	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	LL-101
	4-0	1.5	250	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	LL-221
	3-0	2	150	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	LL-112
	3-0	2	250	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	LL-222
	2-0	3	150	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	LL-113
	2-0	3	250	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	LL-223
	0	3.5	150	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	LL-114
	0	3.5	250	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	LL-224
	1	4	150	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	LL-115
	1	4	250	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	LL-225
	2	5	150	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	LL-116
	2	5	250	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	LL-226

Обратно-режущая / Reverse Cutting

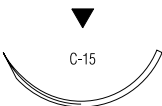
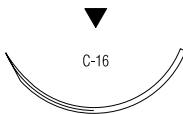
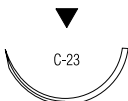
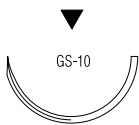
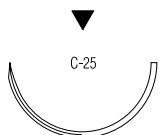
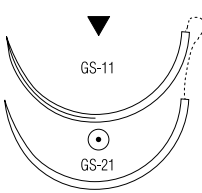
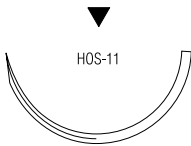
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 16 мм 	5-0	1	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SL-630
	4-0	1.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SL-607
	3-0	2	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SL-608
3/8 круга 19 мм 	5-0	1	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SL-690
	5-0	1	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SL-634
	4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SL-691
	4-0	1.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SL-635
	3-0	2	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SL-637
	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SL-822
	3-0	2	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SL-636
3/8 круга 24 мм 	4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SL-692
	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SL-693
	3-0	2	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SL-694
	2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SL-823
	2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-823

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOF™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И EP ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

POLYSORB™

ПЛЕТЁНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ LASTOMER™ 9-1

Обратно-режущая / Reverse Cutting

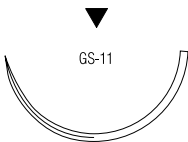
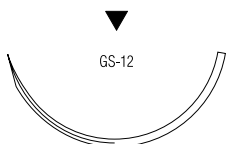
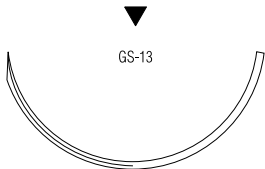
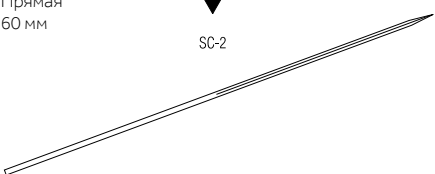
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 26 мм 	2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SL-586
	0	3.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SL-587
3/8 круга 30 мм 	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SL-696
	2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SL-611
	0	3.5	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SL-712
	1	4	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SL-609
1/2 круга 24 мм 	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SL-613
	3-0	2	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SL-632
	2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SL-612
1/2 круга 26 мм 	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CL-868
	2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-769
	0	3.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CL-870
	1	4	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CL-867
1/2 круга 30 мм 	2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SL-622
	0	3.5	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SL-721
	1	4	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SL-722
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	135	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-992
1/2 круга 37 мм Н 	1	4	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-528

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOFT™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И ЕР ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

POLYSORB™

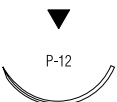
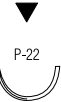
ПЛЕТЁНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ LACTOMER™ 9-1

Обратно-режущая / Reverse Cutting

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 37 мм GS-11 	3-0	2	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-815
	2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CL-543
	2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-816
	2-0	3	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-916
	0	3.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CL-544
	0	3.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-817
	0	3.5	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CL-534
	0	3.5	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-917
	1	4	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-818
	1	4	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-918
	2	5	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CL-533
	2	5	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-919
1/2 круга 40 мм GS-12 	2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-833
	0	3.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-804
	0	3.5	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-933
	1	4	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-805
	1	4	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-936
	2	5	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-937
1/2 круга 48 мм GS-13 	0	3.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-568
	0	3.5	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-927
	1	4	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-569
	1	4	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-928
	2	5	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-929
Прямая 60 мм SC-2 	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SL-643
	3-0	2	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SL-653
	2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SL-642

POLYSORB™

ПЛЕТЁНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ LASTOMER™ 9-1

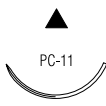
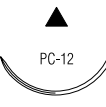
Косметическая обратно-режущая / Cosmetic Reverse Cutting								
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
3/8 круга 11 мм		6-0	0.7	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™	SL-1625
		5-0	1	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™	SL-1689
3/8 круга 13 мм		6-0	0.7	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™	SL-5688
		5-0	1	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™	SL-5687
		5-0	1	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™	SL-5687-G
		4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™	SL-5690
3/8 круга 16 мм		5-0	1	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™	SL-5626
		4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™	SL-5686
		3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™	SL-5621
3/8 круга 19 мм		5-0	1	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™	SL-5636
		4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™	SL-5627
		4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™	SL-5637
		3-0	2	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™	SL-5628
		3-0	2	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™	SL-5628-G
		3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™	SL-5638
3/8 круга 24 мм		4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™	SL-5641
		4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™	SL-5678
		3-0	2	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™	SL-5640
		3-0	2	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™	SL-5640-G
		3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™	SL-5679
		2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™	SL-5680
1/2 круга 13 мм		4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™	SL-1615
1/2 круга 16 мм		4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™	SL-5633

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOFT™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И EP ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

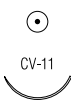
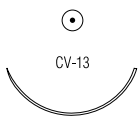
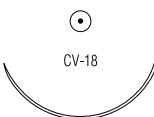
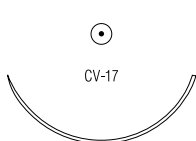
POLYSORB™

ПЛЕТЁНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ LACTOMER™ 9-1

Косметическая режущая / Cosmetic Conventional Cutting

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 16 мм 	4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SL-1657
3/8 круга 19 мм 	4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SL-1653

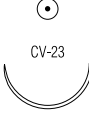
Колющая / Taper Point

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 13 мм 	6-0	0.7	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	GL-889
	5-0	1	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	GL-890
3/8 круга 17 мм 	4-0	1.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	GL-881
3/8 круга 22 мм 	3-0	2	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	GL-303
	2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	GL-302
3/8 круга 26 мм 	2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-457
3/8 круга 32 мм 	3-0	2	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	GL-522
	2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	GL-523
	0	3.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	GL-524

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOF™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И EP ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

POLYSORB™

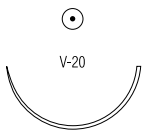
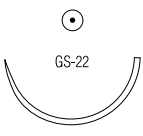
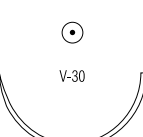
ПЛЕТЁНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ LASTOMER™ 9-1

Колющая / Taper Point								
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
1/2 круга 12 мм		6-0	0.7	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™	UL-101
		6-0	0.7	45	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™	UL-102
		5-0	1	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™	SL-432
1/2 круга 13 мм		5-0	1	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36		GL-885
		4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36		GL-884
1/2 круга 17 мм		6-0	0.7	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36		UL-201
		5-0	1	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36		UL-202
		3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36		UL-215
		3-0	2	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36		UL-204
		2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36		UL-205
1/2 круга 17 мм		4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™	UL-214
		4-0	1.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™	UL-203
1/2 круга 20 мм		4-0	1.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36		CL-460
		3-0	2	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36		CL-461
1/2 круга 22 мм		4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36		GL-191
		4-0	1.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36		GL-181
		3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36		GL-192
		3-0	2	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36		GL-182
		2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36		GL-183
1/2 круга 22 мм		3-0	2	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36		GL-282
1/2 круга 22 мм		3-0	2	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36		CL-892
		2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36		CL-893
		0	3.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36		CL-894

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOFT™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И ЕР ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

POLYSORB™

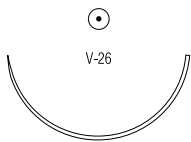
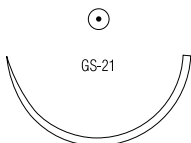
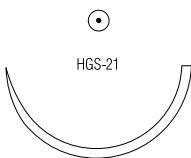
ПЛЕТЁНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ LACTOMER™ 9-1

Колющая / Taper Point						
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 26 мм 	5-0	1	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	GL-120
	4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	GL-321
	4-0	1.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™ GLS-121
	4-0	1.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	GL-121
	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	GL-322
	3-0	2	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™ GLS-122
	3-0	2	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	GL-122
	3-0	2	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	GL-226
	2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ GLS-323
	2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	GL-323
	2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™ GLS-123
	2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	GL-123
	2-0	3	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	GL-125
	0	3.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	GL-124
	3-0	2	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	GL-332
1/2 круга 27 мм 	3-0	2	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-882
	2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™ CL-883
	0	3.5	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-330
	1	4	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-885
	1	4	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL=331
	2	5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-232
1/2 круга 27 мм Н 	1	4	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-871
1/2 круга 30 мм 	3-0	2	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	GL-222
	2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	GL-223
	0	3.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	GL-224
	1	4	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	GL-225

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOF™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И EP ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

POLYSORB™

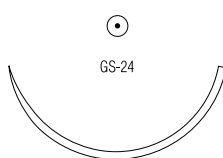
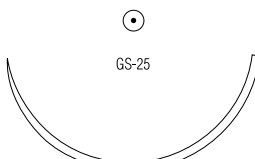
ПЛЕТЁНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ LASTOMER™ 9-1

Колющая / Taper Point						
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 37 мм  V-26	3-0	2	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	GL-126
	2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	GL-127
	0	3.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	GL-128
	1	4	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	GL-129
1/2 круга 37 мм  GS-21	4-0	1.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-809
	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CL-842
	3-0	2	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-810
	3-0	2	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-922
	2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-811
	2-0	3	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CL-953
	2-0	3	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-923
	0	3.5	5x45	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	D-TACH™ CL-10-MG
	0	3.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CL-844
	0	3.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-812
	0	3.5	5x75	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	D-TACH™ CL-5-M
	0	3.5	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CL-954
	0	3.5	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-924
	1	4	5x45	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	D-TACH™ CL-11-MG
	1	4	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-813
	1	4	5x75	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	D-TACH™ CL-6-M
	1	4	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CL-955
	1	4	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-925
	2	5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-814
	2	5	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-926
1/2 круга 37 мм H  HGS-21	0	3.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-931
	0	3.5	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-971
	1	4	5x45	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	D-TACH™ CL-201-M
	1	4	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-932
	1	4	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-239

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOFT™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И ЕР ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

POLYSORB™

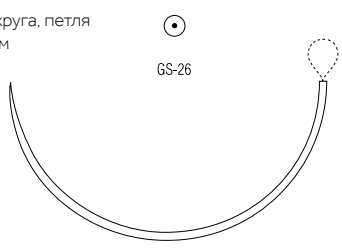
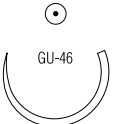
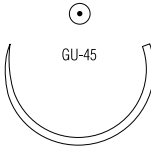
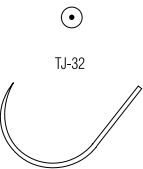
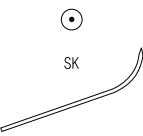
ПЛЕТЁНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ LACTOMER™ 9-1

Колющая / Taper Point						
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 40 мм 	2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-801
	2-0	3	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-913
	0	3.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-802
	0	3.5	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CL-964
	0	3.5	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-914
	1	4	5x45	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	D-TACH™ CL-21-MG
	1	4	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CL-855
	1	4	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-803
	1	4	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-915
	2	5	5x60	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	D-TACH™ CL-622-M
	2	5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-779
	2	5	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-911
1/2 круга 48 мм 	3-0	2	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-862
	2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-863
	2-0	3	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-903
	0	3.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-864
	0	3.5	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CL-974
	0	3.5	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-904
	1	4	5x45	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	D-TACH™ CL-31-MG
	1	4	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-865
	1	4	5x75	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	D-TACH™ CL-64-M
	1	4	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-905
	2	5	5x45	ФИОЛЕТОВЫЙ	6	D-TACH™ CL-633-M
	2	5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-866
	2	5	5x75	ФИОЛЕТОВЫЙ	6	D-TACH™ CL-665-M
	2	5	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-906
1/2 круга 65 мм 	2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	24	CL-63
	1	4	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-968
	1	4	150	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	CL-824
	2	5	150	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	CL-825

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOF™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И EP ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

POLYSORB™

ПЛЕТЁНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ LASTOMER™ 9-1

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
1/2 круга, петля 65 мм 	1	4	120	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	НИТЬ 120 СМ, ПЕТЛЯ 60 СМ	CL-824-L
	2	5	240	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	НИТЬ 240 СМ, ПЕТЛЯ 120 СМ	CL-835-L
5/8 круга 27 мм 	3-0	2	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36		UL-879
	2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36		UL-878
	0	3.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36		UL-877
	1	4	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36		UL-876
5/8 круга 37 мм 	2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36		UL-245
	0	3.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36		UL-246
J-ИГЛА 32 мм 	1	4	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	12		CL-673-G
ЛЫЖА 23 мм 	3-0	2	18	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	ЭНДОСКОПИЯ	EL-415
	3-0	2	120	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	ЭНДОСКОПИЯ	EL-450

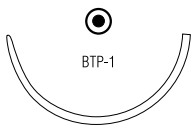
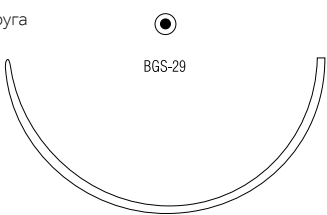
Микрохирургическая колющая / Microsurgery Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
3/8 КРУГА 6 мм  Кривизна 140° Длина иглы 4.92 мм Радиус 2.62 мм	8-0	0.4	13	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	SURGALLOY™	L-2800

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOFT™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И EP ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

POLYSORB™

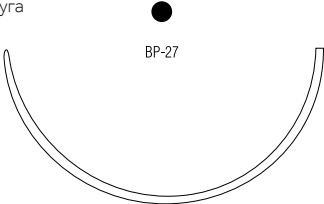
ПЛЕТЁНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ LACTOMER™ 9-1

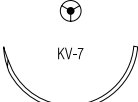
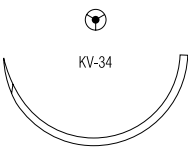
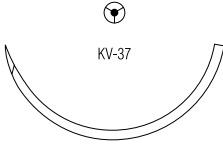
Тупоконечная колющая / Blunt Taper

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 26 мм 	3-0	2	5x45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	PROTECT-POINT™ - D-TACH™ GLT-69-MG
1/2 круга 37 мм 	3-0	2	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	PROTECT-POINT™ CLT-952
	2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	PROTECT-POINT™ CLT-259
	0	3.5	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	PROTECT-POINT™ CLT-954
1/2 круга 37 мм 	0	3.5	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	PROTECT-POINT™ CL-957
1/2 круга 40 мм 	0	3.5	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	PROTECT-POINT™ CL-950
	1	4	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	PROTECT-POINT™ CL-951
1/2 круга 48 мм 	0	3.5	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	PROTECT-POINT™ CL-948
	1	4	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	PROTECT-POINT™ CL-949
1/2 круга 65 мм 	2	5	2x90	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	PROTECT-POINT™ 2-CL-852

POLYSORB™

ПЛЕТЁНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ LASTOMER™ 9-1

Тупоконечная / Blunt Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
1/2 круга 64 мм 	1	4	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-271	
	2	5	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-270	

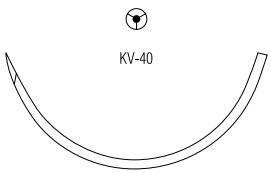
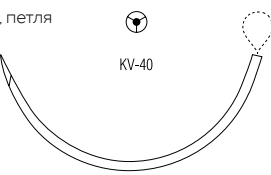
Колюще-режущая / Tapercutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
1/2 круга 22 мм 	1	4	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CL-513	
1/2 круга 26 мм 	3-0	2	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™	CL-510
	2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	SURGALLOY™	CL-511
1/2 круга 37 мм 	3-0	2	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-942	
	2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-837	
	2-0	3	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CL-946	
	2-0	3	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-943	
	0	3.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-838	
	0	3.5	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-944	
	1	4	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-839	
	1	4	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CL-516	
	1	4	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-945	
	2	5	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-517	
1/2 круга 40 мм 	2-0	3	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-603	
	0	3.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-602	

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOFT™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И ЕР ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

POLYSORB™

ПЛЕТЁНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ LACTOMER™ 9-1

Колюще-режущая / Tapercutting

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 48 мм 	0	3.5	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-739
	1	4	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-840
	2	5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-841
	2	5	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36	CL-941
1/2 круга, петля 48 мм 	1	4	150	ФИОЛЕТОВЫЙ	24	НИТЬ 150 CM, ПЕТЛЯ 75 CM CL-740-L

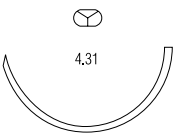
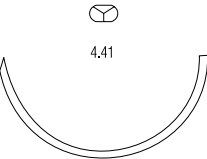
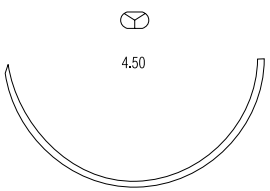
Шпатель / Spatula

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/4 круга 8 мм 	6-0	0.7	30	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	SURGALLOY™ L-1742-K
	6-0	0.7	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	24	L-2752-K
	5-0	1	30	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	L-1785-K
Кривизна 90° Длина иглы 7.18 мм Радиус 5.08 мм						
1/4 круга 10 мм 	5-0	1	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	L-1669-K
	5-0	1	45	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	L-1792-K
Кривизна 90° Длина иглы 8.44 мм Радиус 5.97 мм						

POLYSORB™

ПЛЕТЁНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ LASTOMER™ 9-1

Премиум шпатель / Premium Spatula								
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
3/8 круга 6 мм		8-0	0.4	30	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	SURGALLOY™	L-2748-K
Кривизна 135° Длина иглы 4.80 мм Радиус 2.60 мм Микрон 200								
1/2 круга 6 мм		7-0	0.5	45	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	SURGALLOY™	L-1787-K
Кривизна 160° Длина иглы 3.90 мм Радиус 1.90 мм Микрон 200								

Многоцелевая / Multipurpose								
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
1/2 круга 30 мм		0	3.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36		CL-030
1/2 круга 40 мм		0	3.5	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36		UL-046
		1	4	75	ФИОЛЕТОВЫЙ	36		CL-047
1/2 круга 50 мм		2	5	90	ФИОЛЕТОВЫЙ	36		CL-055

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOFT™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И EP ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

VELOSORB™ FAST

ПЛЕТЕННЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Рассасывающийся плетеный шовный материал Velosorb™ Fast изготовлен из композиции рассасывающихся полиэфиров: гликолида и лактида (полученных из гликолевой и молочной кислот). Шовный материал Velosorb™ Fast покрыт смесью сополимеров гликолида, лактида и стеарата кальция.

ПОКАЗАНИЯ

Шовный материал Velosorb™ Fast предназначен для соединения мягких тканей: кожи, слизистых оболочек конъюнктивы, когда срок поддержки достаточен в течение 7-10 дней. Он не может быть использован для лигирования сердечно-сосудистой и нервной хирургической ткани.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рассасывающийся шовный материал Velosorb™ Fast вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, которая обусловлена поэтапной инкапсуляцией материала соединительной и фиброзной тканью. Прогрессивная потеря прочности и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза, когда сополимер гликолида и лактида распадается на гликолевую и молочные кислоты, которые метаболизируются в организме.

СРОК ПОДДЕРЖКИ РАНЫ

Исследования показывают, что через 5 дней после имплантации остаточная прочность составляет не менее 45% от изначальной. Полная потеря прочности наступает на 14 день.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Гамма излучение.

РАССАСЫВАНИЕ

Рассасывание начинается как потеря прочности без потери массы. Полное рассасывание шовного материала Velosorb™ Fast завершается между 40 и 50 днем после имплантации.

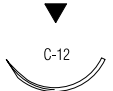
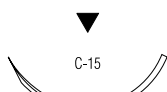
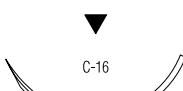
УПАКОВКА

Шовный материал Velosorb™ Fast выпускается размерами от 0 по USP (3,5 EP) до 5-0 по USP (1 EP), в неокрашенном виде с перманентно соединенными иглами.
Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите, все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.

VELOSORB™ FAST

ПЛЕТЕННЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ

Без иглы / Non Needled						
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
Лигатуры	0	3.5	6x45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CV-8980
	2-0	3	6x45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CV8-979
	2-0	3	5x75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CV-8978
	4-0	1.5	6x45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CV-8977
Отрезки стандартной длины	2-0	3	150	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	CV-9007G
	3-0	2	150	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	CV-9006G

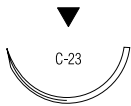
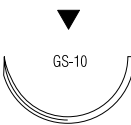
Обратно-режущая / Reverse Cutting						
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 16 мм 	4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SV-2294
3/8 круга 19 мм 	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SV-2298
	4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SV-2297
3/8 круга 24 мм 	2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SV-2253
	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SV-2252
3/8 круга 26 мм 	2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SV-9941-G
	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SV-9940-G
3/8 круга 30 мм 	2-0	3	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SV-2286
3/8 круга 39 мм 	2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SV-9961-G

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOFT™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И ЕР ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

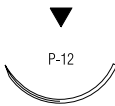
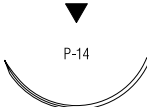
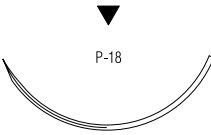
VELOSORB™ FAST

ПЛЕТЕННЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ

Обратно-режущая / Reverse Cutting

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 24 мм 	3-0	2	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SV-9927
	4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SV-9926
1/2 круга 26 мм 	2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	CV-9936G

Премиум обратно-режущая / Premium Reverse Cutting

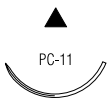
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 11 мм 	5-0	1	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SV-9915
	6-0	0.7	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SV-9913
3/8 круга 19 мм 	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SV-425
3/8 круга 24 мм 	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SV-935
3/8 круга 39 мм 	2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SV-9938-G
	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SV-9937-G
1/2 круга 16 мм 	5-0	1	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SV-9910-G

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOF™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И EP ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

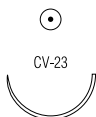
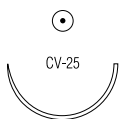
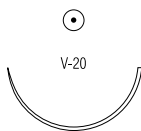
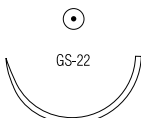
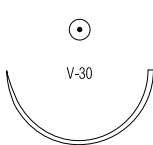
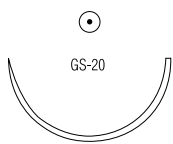
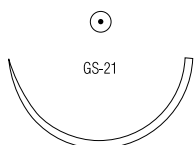
VELOSORB™ FAST

ПЛЕТЕННЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ

Режущая / Conventional Cutting

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 16 мм 	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SV-487-G
	4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SV-488-G

Колющая / Taper Point

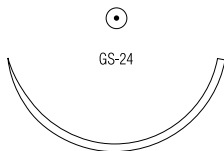
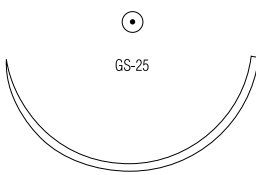
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 17 мм 	4-0	1.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CV-1214
	5-0	1	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CV-1213
1/2 круга 22 мм 	3-0	2	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	OPTIVIS™ CV-3110
1/2 круга 26 мм 	0	3.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CV-418
	2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	CV-417-G
1/2 круга 27 мм 	2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CV-55
1/2 круга 30 мм 	1	4	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CV-319
	0	3.5	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CV-318
1/2 круга 34 мм 	2-0	3	75	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	CV-9975-G
1/2 круга 37 мм 	1	4	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CV-947
	0	3.5	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CV-946
	2-0	3	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CV-945

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOFT™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И EP ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

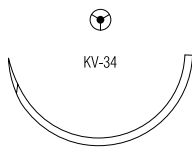
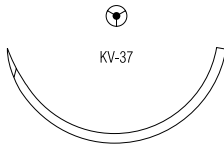
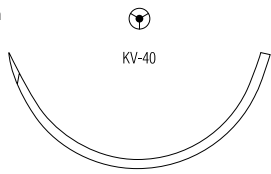
VELOSORB™ FAST

ПЛЕТЕННЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ

Колющая / Taper Point

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 40 мм 	1	4	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CV-9590
	0	3.5	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CV-9591
1/2 круга 48 мм 	1	4	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CV-605
	0	3.5	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CV-604

Колюще-режущая / Tapercutting

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 37 мм 	1	4	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CV-918
	0	3.5	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CV-919
	2-0	3	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CV-917
1/2 круга 40 мм 	1	4	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CV-2216
	0	3.5	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CV-2217
	2-0	3	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CV-2218
1/2 круга 48 мм 	1	4	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CV-7190
	0	3.5	90	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	CV-7191

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOF™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И EP ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.



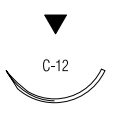
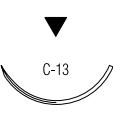
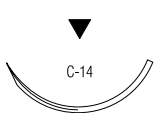
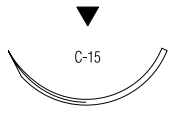
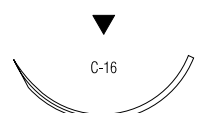
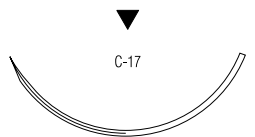
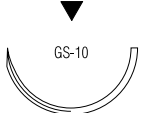
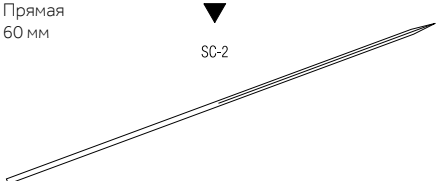
SURGIPRO™ II / SURGIPRO™

МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА	Инертный, нерассасывающийся окрашенный шовный материал Surgipro™ II / Surgipro™ изготовлен из изотактического кристаллизированного стереоизомера полипропилена и содержит полиэтилен.
ПОКАЗАНИЯ	Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ II / Surgipro™ предназначен для сопоставления мягких тканей и/или для лигирования, применяется в сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии и нейрохирургии, общей и торакальной хирургии, пластической хирургии.
ПРИМЕНЕНИЕ	Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ II / Surgipro™ вызывает минимальную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.
СРОК ПОДДЕРЖКИ РАНЫ	Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ II / Surgipro™ не рассасывается и не имеет значительного изменения прочности in vivo.
СТЕРИЛИЗАЦИЯ	Окись этилена.
УПАКОВКА	Полипропиленовый шовный материал SURGIPRO™ II производится как в неокрашенном виде, так и окрашенном фталоцианином меди в синий цвет, размерами от 8-0 (метрический размер 0.4) до 3-0 (метрический размер 2). Полипропиленовый шовный материал SURGIPRO™ также производится как в неокрашенном виде, так и окрашенным фталоцианином меди в синий цвет, размерами от 10-0 (метрический размер 0.2) и от 8-0 (метрический размер 0.4) до 2 (метрический размер 5). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 и 36 шт. Полипропиленовый шовный материал SURGIPRO™ II возможен с PTFE (политетрафторэтиленовые) прокладками, которые располагаются между нитью и тканью для лучшего поддерживающего эффекта. Полипропиленовый шовный материал SURGIPRO™ также возможен в следующих вариантах поставки: 1. С PTFE (политетрафторэтиленовыми) прокладками, которые располагаются между нитью и тканью для лучшего поддерживающего эффекта. 2. С бусинами и стопорами для фиксации кончика нити при внутрикожном шве или для использования как подтягивающие нити.

SURGIPRO™ II / SURGIPRO™

МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

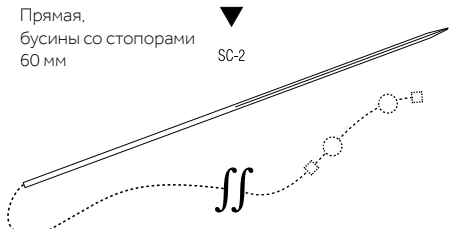
Обратно-режущая / Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
3/8 круга 16 мм 	6-0	0.7	45	СИНИЙ	36	SP-660	
	6-0	0.7	45	СИНИЙ	12	SP-660-G	
	5-0	1	45	СИНИЙ	12	SP-559-G	
	4-0	1.5	75	СИНИЙ	36	SP-631	
3/8 круга 19 мм 	5-0	1	45	СИНИЙ	36	SP-661	
	5-0	1	45	СИНИЙ	12	SP-661-G	
	4-0	1.5	45	СИНИЙ	36	SP-683	
	4-0	1.5	45	СИНИЙ	12	SP-683-G	
	3-0	2	45	СИНИЙ	36	SP-665	
	3-0	2	45	СИНИЙ	12	SP-665-G	
3/8 круга 24 мм 	4-0	1.5	45	СИНИЙ	36	SP-629	
	3-0	2	45	СИНИЙ	36	SP-684	
	3-0	2	45	СИНИЙ	12	SP-684-G	
3/8 круга 26 мм 	2-0	3	45	СИНИЙ	36	SP-868	
	2-0	3	75	СИНИЙ	36	SP-685	
3/8 круга 30 мм 	4-0	1.5	75	СИНИЙ	36	SP-670	
	3-0	2	75	СИНИЙ	36	SP-675	
3/8 круга 39 мм 	3-0	2	75	СИНИЙ	36	SP-649	
	2-0	3	75	СИНИЙ	36	SP-689	
	0	3.5	75	СИНИЙ	36	SP-690	
1/2 круга 26 мм 	2-0	3	75	СИНИЙ	36	CP-443	
Прямая 60 мм 	3-0	2	75	СИНИЙ	36	SP-622	
	2-0	3	75	СИНИЙ	36	SP-623	

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0: SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOFT™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И ЕР ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

SURGIPRO™ II / SURGIPRO™

МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Обратно-режущая / Reverse Cutting

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
Прямая, бусины со стопорами 60 мм 	3-0	2	75	СИНИЙ	24	2 БУСИНЫ СО СТОПОРАМИ SP-622-BC
	2-0	3	75	СИНИЙ	24	2 БУСИНЫ СО СТОПОРАМИ SP-623-BC

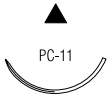
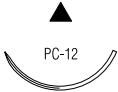
Косметическая обратно-режущая / Cosmetic Reverse Cutting

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 11 мм 	7-0	0.5	45	СИНИЙ	36	SURGALLOY™ SP-1696
	7-0	0.5	45	СИНИЙ	12	SURGALLOY™ SP-1696-G
	6-0	0.7	45	СИНИЙ	36	SURGALLOY™ SP-1697
	6-0	0.7	45	СИНИЙ	12	SURGALLOY™ SP-5697-G
	6-0	0.7	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ SP-1606
3/8 круга 13 мм 	6-0	0.7	45	СИНИЙ	36	SURGALLOY™ SP-5695
	6-0	0.7	45	СИНИЙ	12	SURGALLOY™ SP-5680-G
	5-0	1	45	СИНИЙ	36	SURGALLOY™ SP-5698
	4-0	1.5	45	СИНИЙ	36	SURGALLOY™ SP-5699
3/8 круга 16 мм 	5-0	1	45	СИНИЙ	36	SURGALLOY™ SP-5681
	5-0	1	45	СИНИЙ	12	SURGALLOY™ SP-5681-G
	4-0	1.5	45	СИНИЙ	12	SURGALLOY™ SP-5692-G
	3-0	2	45	СИНИЙ	12	SURGALLOY™ SP-1693-G
3/8 круга 19 мм 	5-0	1	45	СИНИЙ	36	SURGALLOY™ SP-5686
	4-0	1.5	45	СИНИЙ	36	SURGALLOY™ SP-5682
	4-0	1.5	45	СИНИЙ	12	SURGALLOY™ SP-5682-G
	3-0	2	45	СИНИЙ	36	SURGALLOY™ SP-5687
	3-0	2	45	СИНИЙ	12	SURGALLOY™ SP-5687-G
3/8 круга 24 мм 	3-0	2	45	СИНИЙ	36	SURGALLOY™ SP-5663

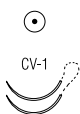
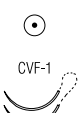
ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOF™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И EP ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

SURGIPRO™ II / SURGIPRO™

МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Косметическая режущая / Cosmetic Conventional Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
3/8 круга 16 мм 	5-0	1	45	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	SP-1635
	4-0	1.5	45	СИНИЙ	36		SP-1634
3/8 круга 19 мм 	4-0	1.5	45	СИНИЙ	36		SP-1644

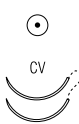
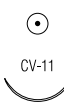
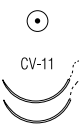
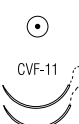
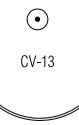
Премиум шпатель / Premium Spatula							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
1/2 круга 6 мм  Кривизна 158° Длина иглы 3.90 мм Радиус 2.00 мм Микрон 150	10	0.2	30	СИНИЙ	12	SURGALLOY™	P-2756-K

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
3/8 круга 9 мм 	7-0	0.5	60	СИНИЙ	36	SURGALLOY OPTIVIST™	VP-72-X
	7-0	0.5	60	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-702-X
	7-0	0.5	5x60	СИНИЙ	12	SURGALLOY OPTIVIST™	VP-72-MX
	7-0	0.5	5x60	СИНИЙ	12	SURGALLOY™	VP-702-MX
	7-0	0.5	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-713-X
	7-0	0.5	5x75	СИНИЙ	12	SURGALLOY™	VP-713-MX
	6-0	0.7	45	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-746-X
	6-0	0.7	60	СИНИЙ	36	SURGALLOY OPTIVIST™	VP-73-X
	6-0	0.7	60	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-703-X
	6-0	0.7	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-709-X
3/8 круга 9 мм 	7-0	0.5	60	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VPF-702-X
	7-0	0.5	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VPF-713-X
	6-0	0.7	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VPF-709-X

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOFT™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И ЕР ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

SURGIPRO™ II / SURGIPRO™

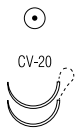
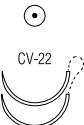
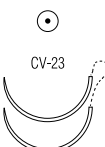
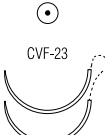
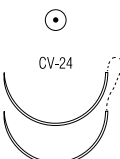
МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
3/8 круга 11 мм 	6-0	0.7	60	СИНИЙ	36	SURGALLOY OPTIVIST™	VP-74-X
	6-0	0.7	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-776-X
3/8 круга 13 мм 	6-0	0.7	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-889-X
	5-0	1	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-890-X
3/8 круга 13 мм 	7-0	0.5	60	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-727-X
	6-0	0.7	60	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-726-X
	6-0	0.7	5x60	СИНИЙ	12	SURGALLOY™	VP-726-MX
	6-0	0.7	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY OPTIVIST™	VP-76-X
	6-0	0.7	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-706-X
	5-0	1	60	СИНИЙ	36	SURGALLOY OPTIVIST™	VP-75-X
	5-0	1	60	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-725-X
	5-0	1	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-705-X
	5-0	1	5x75	СИНИЙ	12	SURGALLOY™	VP-705-MX
	5-0	1	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY OPTIVIST™	VP-70-X
	5-0	1	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-720-X
	4-0	1.5	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-813-X
3/8 круга 13 мм 	6-0	0.7	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VPF-706-X
3/8 круга 17 мм 	4-0	1.5	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-881-X
3/8 круга 17 мм 	5-0	1	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-580-X
	4-0	1.5	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-581-X
	4-0	1.5	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™ ПРОКЛАДКИ 3x7 мм ЖЁСТКИЕ	VP-582-X
	3-0	2	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-585-X
3/8 круга 22 мм 	4-0	1.5	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-841-X
	4-0	1.5	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-851-X
	3-0	2	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-532-X
	2-0	3	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-533

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOF™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И EP ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

SURGIPRO™ II / SURGIPRO™

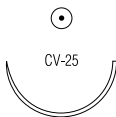
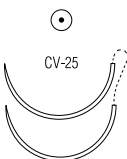
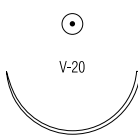
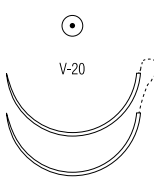
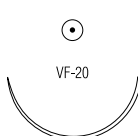
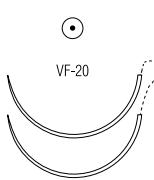
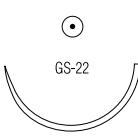
МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Колющая / Taper Point								
	Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
1/2 круга 10 мм		6-0	0.7	60	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-754-X
		5-0	1	60	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-755-X
1/2 круга 13 мм		6-0	0.7	60	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-711-X
		6-0	0.7	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-733-X
		5-0	1	45	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-715-X
		5-0	1	60	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-205-X
		5-0	1	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-710-X
1/2 круга 13 мм		5-0	1	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VPF-711-X
1/2 круга 17 мм		5-0	1	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-870-X
		4-0	1.5	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-871-X
		3-0	2	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-872-X
1/2 круга 17 мм		6-0	0.7	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-555-X
		5-0	1	60	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-566-X
		5-0	1	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY OPTIVIST™	VP-660-X
		5-0	1	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-556-X
		5-0	1	5x90	СИНИЙ	12	SURGALLOY™	VP-556-MX
		4-0	1.5	45	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-757-X
		4-0	1.5	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-557-X
		3-0	2	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-558-X
1/2 круга 17 мм		4-0	1.5	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VPF-557-X
1/2 круга 20 мм		4-0	1.5	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-331-X

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0: SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOFT™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И ЕР ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

SURGIPRO™ II / SURGIPRO™

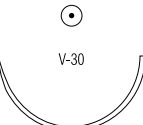
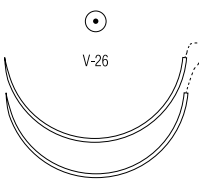
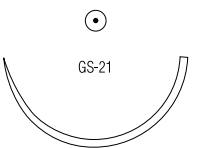
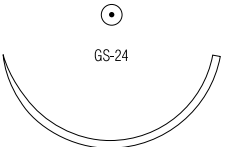
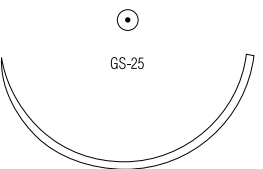
МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Колющая / Taper Point								
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке			Код для заказа
1/2 круга 22 мм 	4-0	1.5	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™		VP-771-X
1/2 круга 22 мм 	4-0	1.5	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™		VP-761-X
	3-0	2	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™		VP-760-X
	3-0	3	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™		VP-762-X
1/2 круга 26 мм 	4-0	1.5	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™		VP-831-X
	3-0	2	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™		VP-832-X
	2-0	3	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™		VP-833
	0	3.5	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™		VP-834
1/2 круга 26 мм 	5-0	1	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™		VP-510-X
	5-0	1	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™		VP-520-X
	4-0	1.5	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™		VP-511-X
	4-0	1.5	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™		VP-521-X
	4-0	1.5	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™ ПРОКЛАДКИ 3x7 мм ЖЁСТКИЕ		VP-421-X
	3-0	2	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™		VP-522-X
	3-0	2	120	СИНИЙ	36	SURGALLOY™		VP-542-X
	2-0	3	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™		VP-523
	2-0	3	120	СИНИЙ	36	SURGALLOY™		VP-543
1/2 круга 26 мм 	2-0	3	120	СИНИЙ	36	SURGALLOY™		VP-151
1/2 круга 26 мм 	3-0	2	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™		VPF-522-X
	2-0	3	120	СИНИЙ	36	SURGALLOY™		VPF-543
1/2 круга 27 мм 	2-0	3	75	СИНИЙ	36			CP-411
	0	3.5	75	СИНИЙ	36			CP-412

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOF™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И EP ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

SURGIPRO™ II / SURGIPRO™

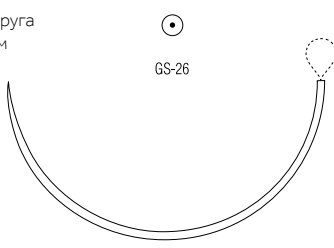
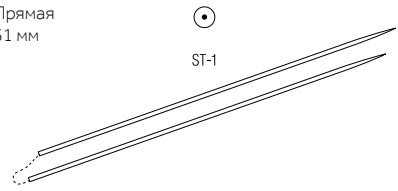
МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

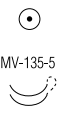
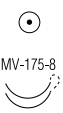
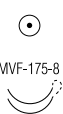
Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
1/2 круга 27 мм Н 	0	3.5	75	СИНИЙ	36	CP-414	
	1	4	90	СИНИЙ	36	CP-415	
1/2 круга 30 мм 	2-0	3	75	СИНИЙ	36	VP-945	
1/2 круга 37 мм 	3-0	2	90	СИНИЙ	36	VP-842-X	
	2-0	3	90	СИНИЙ	36	VP-843	
	2-0	3	120	СИНИЙ	36	VP-853	
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	75	СИНИЙ	36	CP-423	
	0	3.5	75	СИНИЙ	36	CP-424	
	1	4	75	СИНИЙ	36	CP-425	
1/2 круга 40 мм 	2-0	3	75	СИНИЙ	36	CP-433	
	0	3.5	75	СИНИЙ	36	CP-434	
	1	4	75	СИНИЙ	36	CP-435	
	1	4	100	СИНИЙ	36	CP-535	
1/2 круга 48 мм 	1	4	75	СИНИЙ	36	CP-455	
1/2 круга 65 мм 	1	4	150	СИНИЙ	24	CP-824	
	2	5	150	СИНИЙ	24	CP-825	

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0: SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOFT™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И ЕР ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

SURGIPRO™ II / SURGIPRO™

МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
1/2 круга 65 мм  GS-26	1	4	120	СИНИЙ	24	НИТЬ 120 CM, ПЕТЛЯ 60 CM	CP-824-L
	1	4	240	СИНИЙ	24	НИТЬ 240 CM, ПЕТЛЯ 120 CM	CP-834-L
Прямая 51 мм  ST-1	2-0	3	90	СИНИЙ	36		GP-282

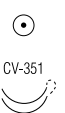
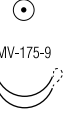
Микрохирургическая колющая / Microsurgery Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
3/8 круга 6 мм  MV-135-5 Кривизна 140° Длина иглы 4.92 мм Радиус 2.62 мм	8-0	0.4	45	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-900-X
	8-0	0.4	2x45	СИНИЙ	12	SURGALLOY™	VP-900-MX
	8-0	0.4	60	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-902-X
	8-0	0.4	2x60	СИНИЙ	12	SURGALLOY™	VP-902-MX
	8-0	0.4	75	СИНИЙ	12	SURGALLOY™	VP-973-X
	7-0	0.5	60	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-904-X
3/8 круга 8 мм  MV-175-8 Кривизна 140° Длина иглы 6.13 мм Радиус 3.19 мм	8-0	0.4	45	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-744-X
	8-0	0.4	2x45	СИНИЙ	12	SURGALLOY™	VP-744-MX
	8-0	0.4	60	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-745-X
	7-0	0.5	60	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-735-X
	7-0	0.5	2x60	СИНИЙ	12	SURGALLOY™	VP-737-MX
	7-0	0.5	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-747-X
3/8 круга 8 мм  MVF-175-8 Кривизна 140° Длина иглы 6.01 мм Радиус 3.20 мм	7-0	0.5	60	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VPF-735-X

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOF™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И EP ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

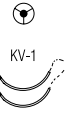
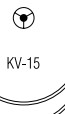
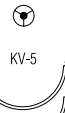
SURGIPRO™ II / SURGIPRO™

МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Микрохирургическая колющая / Microsurgery Taper Point

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
3/8 круга 8 мм  Кривизна 135° Длина иглы 6.28 мм Радиус 3.48 мм	8-0	0.4	60	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	VP-738-X
	8-0	0.4	2x60	СИНИЙ	12	CARDIOPOINT™	VP-738-MX
	7-0	0.5	60	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	VP-630-X
	6-0	0.7	60	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	VP-631-X
3/8 круга 10 мм  Кривизна 140° Длина иглы 7.69 мм Радиус 4.09 мм	7-0	0.5	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-875-X

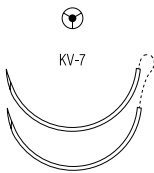
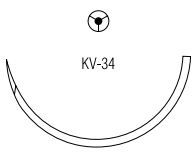
Колюще-режущая / Tapercutting

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
3/8 круга 9 мм  KV-1	6-0	0.7	60	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-712-X
3/8 круга 13 мм  KV-11	6-0	0.7	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-728-X
	5-0	1	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-708-X
3/8 круга 17 мм  KV-15	5-0	1	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-914-X
	4-0	1.5	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-925-X
	3-0	2	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-926-X
3/8 круга 26 мм  KV-26	3-0	2	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-956
1/2 круга 17 мм  KV-5	5-0	1	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-934-X
	4-0	1.5	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-935-X
	3-0	2	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-936-X

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOFT™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И ЕР ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

SURGIPRO™ II / SURGIPRO™

МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Колюще-режущая / Tapercutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
1/2 круга 26 мм 	4-0	1.5	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-975-X
	3-0	2	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-976-X
	2-0	3	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-977
	0	3.5	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	VP-978
1/2 круга 37 мм 	0	3.5	75	СИНИЙ	36		CP-844



VASCUFIL™

МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИБУТЕСТЕРА
С РАССАСЫВАЮЩИМСЯ ПОКРЫТИЕМ ИЗ POLYTRIBOLATE™

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Vascufil™ – покрытый нерассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал, состоящий из полибутестера, кополимера бутилен терефталата и политераметилена гликоля. Шовный материал имеет покрытие из POLYTRIBOLATE™ – рассасывающийся полимер из ε-капролактона-гликолида-полоксамера 188.

ПОКАЗАНИЯ

Монофиламентный шовный материал Vascufil™ применяется как нерассасывающийся шовный материал для сопоставления тканей и/или для лигирования в сердечно-сосудистой хирургии и офтальмохирургии. Применение данного шовного материала на нервных тканях и в микрохирургии не рекомендуется.

ПРИМЕНЕНИЕ

Монофиламентный шовный материал Vascufil™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.

СРОК ПОДДЕРЖКИ РАНЫ

Монофиламентный не рассасывающийся шовный материал Vascufil™ не теряет прочность in vivo. Выведение рассасывающегося покрытия полностью завершается в течение 30 дней.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

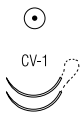
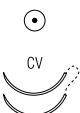
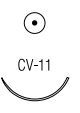
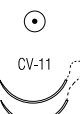
Гамма облучение.

УПАКОВКА

Стерильный шовный материал Vascufil™ производится различной длины, диаметра и с разным количеством в индивидуальной упаковке. Шовный материал VASCUFIL™ окрашен в синий цвет фталоцианином меди.

VASCUFIL™

МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИБУТЕСТЕРА
С РАССАСЫВАЮЩИМСЯ ПОКРЫТИЕМ ИЗ POLYTRIBOLATE™

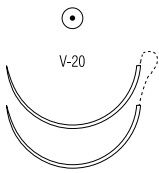
Колющая / Taper Point								
	Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
3/8 круга 9 мм		7-0	0.5	45	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886470301V
		7-0	0.5	60	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886470501V
		7-0	0.5	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886470401V
		6-0	0.7	45	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886470311V
		6-0	0.7	60	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886470511V
		6-0	0.7	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886470411V
3/8 круга 11 мм		6-0	0.7	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886475611V
3/8 круга 13 мм		5-0	1	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886472221V
3/8 круга 13 мм		6-0	0.7	60	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886470911V
		6-0	0.7	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886471011V
		5-0	1	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886471021V
		5-0	1	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886471121V
3/8 круга 17 мм		5-0	1	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886473921V
		4-0	1.5	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886473931V
3/8 круга 17 мм		4-0	1.5	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886471631V
1/2 круга 13 мм		6-0	0.7	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886474111V
		6-0	0.7	4x75	СИНИЙ	12	SURGALLOY™	8886474215V
		5-0	1	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886474121V
1/2 круга 17 мм		5-0	1	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886471921V

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOFT™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И ЕР ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

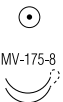
VASCUFIL™

МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИБУТЕСТЕРА
С РАССАСЫВАЮЩИМСЯ ПОКРЫТИЕМ ИЗ POLYTRIBOLATE™

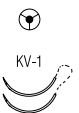
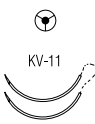
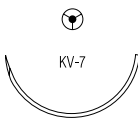
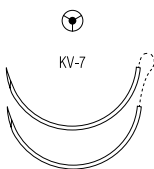
Колющая / Taper Point

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
1/2 круга 26 мм 	4-0	1.5	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886475031V
	3-0	2	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886475041V
	2-0	3	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886475051V

Микрохирургическая колющая / Microsurgery Taper Point

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
3/8 круга 8 мм  Кривизна 140° Длина иглы 6.13 мм Радиус 3.19 мм	7-0	0.5	60	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886479401V

Колюще-режущая / Tapercutting

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
3/8 круга 9 мм 	6-0	0.7	60	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886471411V
3/8 круга 13 мм 	6-0	0.7	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886473411V
	5-0	1	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886473421V
1/2 круга 26 мм 	2-0	3	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886473051V
1/2 круга 26 мм 	4-0	1.5	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886473131V
	3-0	2	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886473141V
	2-0	3	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886473151V

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOF™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И EP ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.



NOVAFIL™

МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИБУТЭСТЕРА

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Нерассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал Novafil™ состоит из полибутестера - кополимера бутилена терефталата и политетраметилена-гликолиевого эфира.

ПОКАЗАНИЯ

Монофиламентный не рассасывающийся шовный материал Novafil™ применяется для сопоставления тканей и/или для лигирования, включая использование в сердечно-сосудистой и офтальмохирургии. Применение в микрохирургии и на нервных тканях не рекомендуется.

ПРИМЕНЕНИЕ

Монофиламентный не рассасывающийся шовный материал Novafil™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. Шовный материал Novafil™ устойчив к воздействию тканевых ферментов.

СРОК ПОДДЕРЖКИ РАНЫ

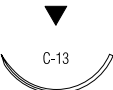
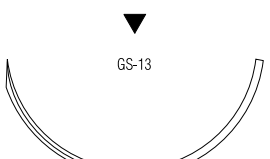
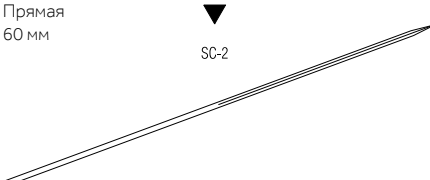
Монофиламентный шовный материал Novafil™ не рассасывается и не меняет прочности in vivo.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Гамма облучение.

УПАКОВКА

Полибутестеровый шовный материал NOVAFIL™ производится в бесцветном варианте или окрашенным в синий цвет фталоцианином меди; размером от 2 (метрический размер 5) до 10-0 (метрический размер 0.2). Стерильный шовный материал NOVAFIL™ поставляется различной длины, диаметра и с разным количеством отрезков в индивидуальной упаковке, в безыгольном исполнении или с различными видами игл, зафиксированными permanently или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 или 36 штук.

Обратно-режущая / Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
3/8 круга 12 мм 	6-0	0.7	45	СИНИЙ	12	8886441913	
	5-0	1	45	СИНИЙ	12	8886441923	
	4-0	1.5	45	СИНИЙ	12	8886441933	
3/8 круга 19 мм 	5-0	1	45	СИНИЙ	12	8886442023	
	4-0	1.5	45	СИНИЙ	12	8886442033	
	3-0	2	45	СИНИЙ	12	8886442043	
	3-0	2	75	СИНИЙ	36	8886455441	
3/8 круга 24 мм 	4-0	1.5	45	СИНИЙ	12	8886442233	
	3-0	2	45	СИНИЙ	12	8886442243	
	3-0	2	90	СИНИЙ	36	8886400241	
	2-0	3	45	СИНИЙ	12	8886442253	
	2-0	3	75	СИНИЙ	12	8886442153	
3/8 круга 30 мм 	3-0	2	75	СИНИЙ	36	8886442441	
	2-0	3	75	СИНИЙ	36	8886442451	
	0	3.5	75	СИНИЙ	36	8886442461	
3/8 круга 39 мм 	2-0	3	75	СИНИЙ	36	8886442651	
3/8 круга 48 мм 	1	4	75	СИНИЙ	36	8886443671	
Прямая 60 мм 	3-0	2	75	СИНИЙ	36	8886449041	
	2-0	3	75	СИНИЙ	36	8886449051	

Косметическая обратно-режущая / Cosmetic Reverse Cutting								
	Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
3/8 круга 11 мм		7-0	0.5	45	СИНИЙ	12	SURGALLOY™	8886441003
		6-0	0.7	45	СИНИЙ	12	SURGALLOY™	8886441013
		5-0	1	45	СИНИЙ	12	SURGALLOY™	8886441023
3/8 круга 13 мм		5-0	1	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886402721
		4-0	1.5	45	СИНИЙ	12	SURGALLOY™	SPB-1233-G
3/8 круга 13 мм		5-0	1	45	СИНИЙ	12		8886440023
3/8 круга 16 мм		4-0	1.5	45	СИНИЙ	12	SURGALLOY™	SPB-5143-G
3/8 круга 16 мм		5-0	1	45	СИНИЙ	12		8886440123
		4-0	1.5	45	СИНИЙ	12		8886440133
3/8 круга 19 мм		4-0	1.5	45	СИНИЙ	12	SURGALLOY™	SPB-5633-G
3/8 круга 19 мм		4-0	1.5	45	СИНИЙ	12		8886440233
		3-0	2	45	СИНИЙ	12		8886440243
3/8 круга 24 мм		3-0	2	45	СИНИЙ	12	SURGALLOY™	SPB-5843-G
		3-0	2	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886458243
		2-0	3	45	СИНИЙ	12	SURGALLOY™	8886441853
3/8 круга 24 мм		3-0	2	45	СИНИЙ	12		8886440343

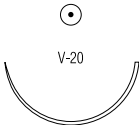
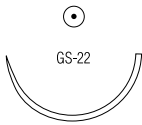
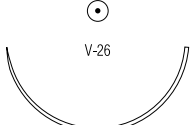
Косметическая обратно-режущая / Cosmetic Reverse Cutting

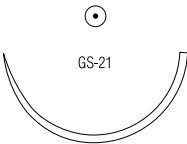
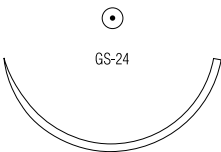
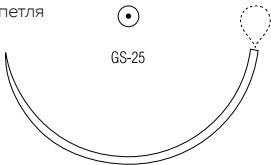
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
1/2 круга 16 мм 	4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™	SPB-5433-G

Косметическая режущая / Cosmetic Conventional Cutting

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
3/8 круга 16 мм 	6-0	0.7	45	СИНИЙ	12	DERMAX™	XNF-1966
	5-0	1	45	СИНИЙ	12	DERMAX™	XNF-1965
	4-0	1.5	45	СИНИЙ	12	DERMAX™	XNF-1964
3/8 круга 19 мм 	5-0	1	45	СИНИЙ	12	DERMAX™	XNF-1995
	4-0	1.5	45	СИНИЙ	12	DERMAX™	XNF-1994
	3-0	2	45	СИНИЙ	12	DERMAX™	XNF-1993

Колющая / Taper Point

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
1/2 круга 26 мм 	3-0	2	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886445241
	2-0	3	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886445251
	0	3.5	75	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886445261
1/2 круга 27 мм 	2-0	3	75	СИНИЙ	36		8886445951
1/2 круга 37 мм 	3-0	2	75	СИНИЙ	36		8886445041

Колющая / Taper Point							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 37 мм		0	3.5	75	СИНИЙ	36	8886445561
		1	4	75	СИНИЙ	36	8886445571
1/2 круга 40 мм		1	4	75	СИНИЙ	36	8886446371
1/2 круга, петля 48 мм		0	3.5	200	СИНИЙ	12	НИТЬ 200 СМ, ПЕТЛЯ 100 СМ 8886453863



TI-CRON™ / SURGIDAC™

ПЛЕТЕННЫЙ И МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ И НЕПОКРЫТЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Нерассасывающийся, стерильный шовный материал из полиэстера Ti-Cron™ / Surgidac™ изготавливается из полиэтилена терефталата. Шовный материал состоит из волокон полиэстера с высоким молекулярным весом, длинными линейными цепочками с ароматическими кольцами в качестве связующего звена.

Плетёный шовный материал Ti-Cron™ выпускается как непокрытым, так и пропитанным силиконом для увеличения скольжения поверхности, тем самым улучшая манипуляционные свойства, прохождение через ткани и опускание узла.

Монофиламентные нити Surgidac™ не покрыты, а плетёные доступны в непокрытом варианте, а также покрытом полибутиленом адипатом.

ПОКАЗАНИЯ

Шовный материал Ti-Cron™ / Surgidac™ из полиэстера предназначен для сопоставления тканей и/или для лигирования, применения в общей, торакальной, сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии, ортопедии и нейрохирургии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Шовный материал из полиэстера Ti-Cron™ / Surgidac™ вызывает минимальную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.

СРОК ПОДДЕРЖКИ РАНЫ

Нерассасывающийся шовный материал Ti-Cron™ / Surgidac™ не меняет прочности in vivo.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Шовный материал Ti-Cron™ / Surgidac™ размером 6-0 и менее или с прокладками стерилизуется окисью этилена. Размер 5-0 и более стерилизуется путем гамма облучения.

УПАКОВКА

Плетёный шовный материал Ti-Cron™ возможен как в неокрашенном (белом) виде, так и окрашенном в синий D&C цвет No. 6, покрытый или не покрытый, размерами от 5 (метрический размер 7) до 7-0 (метрический размер 0.5). Шовный материал Surgidac™ выпускается неокрашенным (белый) или окрашенным в зеленый D&C цвет No. 6. Нити выпускаются плетеными покрытыми и непокрытыми в размерах от 0 (3,5 метрик) до 6-0 (0,7 метрик). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках различной длины и катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 и 36 шт.

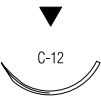
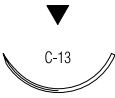
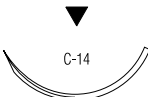
Шовный материал из полиэстера Ti-Cron™ выпускается со специальными PTFE (политетрафлуорэтиленовые) прокладками между нитью и тканью для лучшего поддерживающего эффекта.

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

TI-CRON™ / SURGIDAC™

ПЛЕТЕННЫЙ И МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ И НЕПОКРЫТЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

Без иглы / Non Needled						
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
Лигатуры	5-0	1	12x45	СИНИЙ	36	8886300821
	4-0	1.5	12x75	СИНИЙ	24	8886300332
	3-0	2	12x75	СИНИЙ	24	8886300342
	2-0	3	12x45	СИНИЙ	36	8886300851
	2-0	3	12x75	СИНИЙ	24	8886300352
	0	3.5	6x75	СИНИЙ	24	8886300262
	1	4	6x45	СИНИЙ	24	8886300172
Катушки	3-0	2	250	СИНИЙ	24	8886338042
	2-0	3	250	СИНИЙ	24	8886338052
	0	3.5	250	СИНИЙ	24	8886338062
	1	4	250	СИНИЙ	24	8886338072
	2	5	250	СИНИЙ	24	8886338082
	4	6	150	СИНИЙ	24	8886338109
	5	7	150	СИНИЙ	24	8886338189

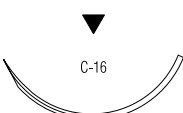
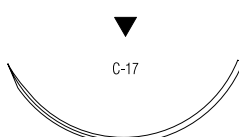
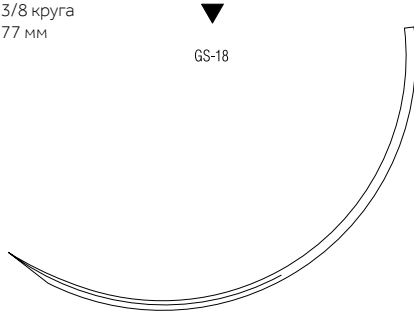
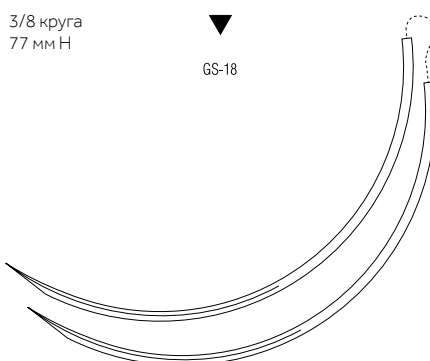
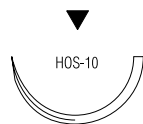
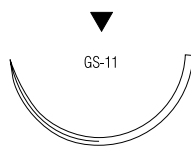
Обратно-режущая / Reverse Cutting						
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 16 мм 	4-0	1.5	75	СИНИЙ	36	8886304631
3/8 круга 19 мм 	4-0	1.5	45	СИНИЙ	36	8886304731
	3-0	2	45	СИНИЙ	36	8886304741
	3-0	2	75	СИНИЙ	36	8886305541
	2-0	3	75	СИНИЙ	36	8886304851
3/8 круга 24 мм 	3-0	2	75	СИНИЙ	36	8886305041
	2-0	3	75	СИНИЙ	36	8886305051
	0	3.5	75	СИНИЙ	36	8886305061
	0	3.5	90	СИНИЙ	36	8886306561
3/8 круга 26 мм 	2-0	3	75	СИНИЙ	36	8886307051

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0: SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOFT™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И ЕР ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

TI-CRON™ / SURGIDAC™

ПЛЕТЕННЫЙ И МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ И НЕПОКРЫТЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

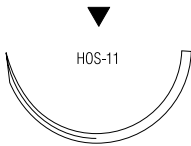
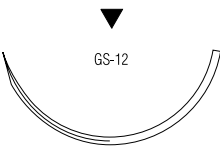
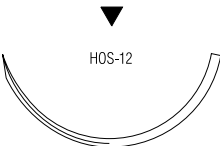
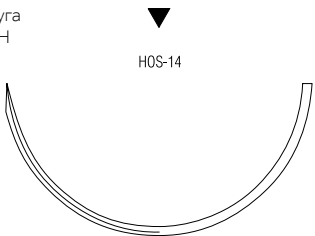
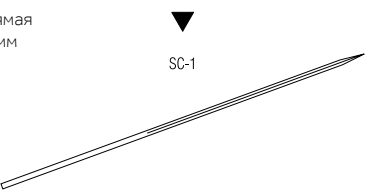
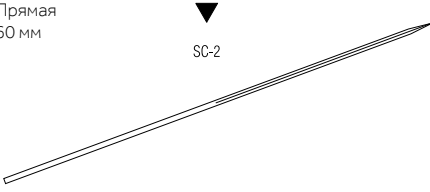
Обратно-режущая / Reverse Cutting

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 30 мм 	2-0	3	75	СИНИЙ	36	8886302351
	0	3.5	75	СИНИЙ	36	8886302361
	0	3.5	90	СИНИЙ	36	8886301261
	1	4	75	СИНИЙ	36	8886302371
3/8 круга 35 мм 	2-0	3	75	СИНИЙ	36	8886305451
	0	3.5	75	СИНИЙ	36	8886305461
	1	4	75	СИНИЙ	36	8886305471
	2	5	75	СИНИЙ	36	8886305481
3/8 круга 77 мм 	5	7	45	СИНИЙ	12	8886305689
3/8 круга 77 мм Н 	2	5	75	СИНИЙ	24	8886312882
1/2 круга 26 мм Н 	0	3.5	75	СИНИЙ	36	8886339561
	1	4	75	СИНИЙ	36	8886339571
	2	5	75	СИНИЙ	36	8886339581
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	75	СИНИЙ	36	8886330951
	1	4	75	СИНИЙ	36	8886330971
	4	6	75	СИНИЙ	36	8886315409

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOF™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И EP ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

TI-CRON™ / SURGIDAC™

ПЛЕТЕННЫЙ И МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ И НЕПОКРЫТЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

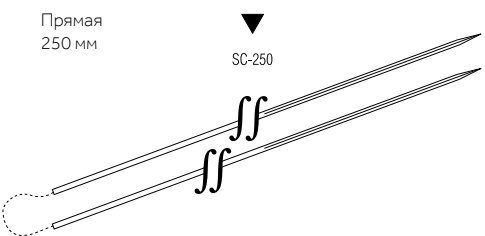
Обратно-режущая / Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
1/2 круга 37 мм Н 	1	4	75	СИНИЙ	36	8886302871	
1/2 круга 40 мм 	2	5	75	СИНИЙ	36	8886315581	
1/2 круга 40 мм Н 	1	4	75	СИНИЙ	36	8886302671	
	2	5	75	СИНИЙ	36	8886302681	
1/2 круга 57 мм Н 	5	7	75	СИНИЙ	36	8886302779	
Прямая 57 мм 	2-0	3	75	СИНИЙ	36	8886316351	
	1	4	75	СИНИЙ	36	8886316371	
Прямая 60 мм 	3-0	2	75	СИНИЙ	36	8886306241	
	2-0	3	75	СИНИЙ	36	8886306251	

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOFT™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И EP ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

TI-CRON™ / SURGIDAC™

ПЛЕТЕННЫЙ И МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ И НЕПОКРЫТЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

Обратно-режущая / Reverse Cutting

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
Прямая 250 мм 	2-0	3	75	Синий	12	8886294753

Косметическая обратно-режущая / Cosmetic Reverse Cutting

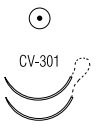
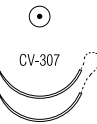
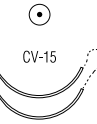
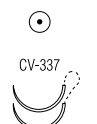
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 13 мм 	5-0	1	45	Белый	12	SURGALLOY™ SCD-2864-G
	4-0	1.5	45	Белый	12	SURGALLOY™ 8886286234
1/2 круга 16 мм 	2-0	3	45	Синий	12	SURGALLOY™ 8886305953

Шпатель / Spatula

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/4 круга 8 мм 	6-0	0.7	45	Белый	12	CD-3113-K
	5-0	1	45	Белый	12	CD-3123-K
Кривизна 90° Длина иглы 7.18 мм Радиус 5.08 мм						

TI-CRON™ / SURGIDAC™

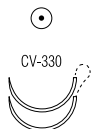
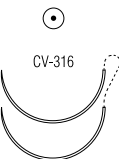
ПЛЕТЕННЫЙ И МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ И НЕПОКРЫТЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
3/8 круга 13 мм 	6-0	0.7	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886328011
	5-0	1	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886328021
	5-0	1	75	БЕЛЫЙ	36	CARDIOPOINT™	8886280121
	4-0	1.5	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886328031
	4-0	1.5	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™ ПРОКЛАДКИ 3X3 мм ЖЁСТКИЕ	8886331431
	3-0	2	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886328041
3/8 круга 16 мм 	4-0	1.5	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886322931
	3-0	2	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886322941
3/8 круга 17 мм 	2-0	3	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886264051
3/8 круга 18 мм 	5-0	1	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886277521
	4-0	1.5	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886277531
	3-0	2	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886277541
3/8 круга 22 мм 	3-0	2	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886262741
	2-0	3	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886262751
3/8 круга 26 мм 	2-0	3	10x90	СИНИЙ / БЕЛЫЙ	6		8886323056
1/2 круга 10 мм 	5-0	1	90	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886313921
	5-0	1	90	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™ ПРОКЛАДКИ 3X3 мм ЖЁСТКИЕ	8886329721

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0: SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOFT™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И ЕР ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

TI-CRON™ / SURGIDAC™

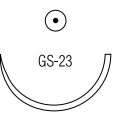
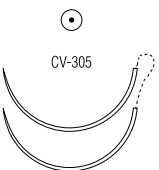
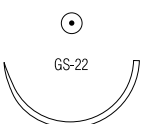
ПЛЕТЕННЫЙ И МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ И НЕПОКРЫТЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
1/2 круга 13 мм 	5-0	1	60	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886322621
	4-0	1.5	60	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886322631
	4-0	1.5	90	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886324931
	3-0	2	45	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™ ПРОКЛАДКИ 3X3 мм ЖЁСТКИЕ	8886329541
1/2 круга 16 мм 	5-0	1	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886318621
	4-0	1.5	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886318631
	3-0	2	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886318641
	2-0	3	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886318651
1/2 круга 16 мм 	5-0	1	90	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886327121
	4-0	1.5	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886308731
	4-0	1.5	90	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886327131
	3-0	2	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886308741
	3-0	2	10x75	СИНИЙ	6	CARDIOPOINT™	8886308446
	3-0	2	90	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886327141
	2-0	3	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886308751
	2-0	3	8x75	СИНИЙ / БЕЛЫЙ	6	CARDIOPOINT™	8886308356
	2-0	3	8x75	СИНИЙ / БЕЛЫЙ	6	CARDIOPOINT™ ПРОКЛАДКИ 3X3 мм ЖЁСТКИЕ	8886308656
	2-0	3	8x75	СИНИЙ / БЕЛЫЙ	6	CARDIOPOINT™ ПРОКЛАДКИ 3X6 мм ЖЁСТКИЕ ОВАЛ	VCD20331FE
	2-0	3	8x75	СИНИЙ / БЕЛЫЙ	6	CARDIOPOINT™ ПРОКЛАДКИ 3X7 мм ЖЁСТКИЕ	8886309156
	2-0	3	10x90	СИНИЙ / БЕЛЫЙ	6	CARDIOPOINT™ ПРОКЛАДКИ 3X7 мм ЖЁСТКИЕ	8886326956
1/2 круга 20 мм 	4-0	1.5	90	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886336931
	3-0	2	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886322741
	3-0	2	90	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886336941
	2-0	3	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886322751
	2-0	3	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™ ПРОКЛАДКИ 3X6 мм ЖЁСТКИЕ ОВАЛ	VCD20316FE
	2-0	3	8x75	СИНИЙ / БЕЛЫЙ	6	CARDIOPOINT™ ПРОКЛАДКИ 3X6 мм ЖЁСТКИЕ ОВАЛ	VCD20316MFE
	2-0	3	8x75	СИНИЙ / БЕЛЫЙ	6	CARDIOPOINT™ ПРОКЛАДКИ 3X6 мм МЯГКИЕ ОВАЛ	VCD20316MSE
	2-0	3	10x75	СИНИЙ / БЕЛЫЙ	6	CARDIOPOINT™	8886338556
	2-0	3	10x75	СИНИЙ / БЕЛЫЙ	6	CARDIOPOINT™ ПРОКЛАДКИ 3X3 мм ЖЁСТКИЕ	8886327756
	2-0	3	10x75	СИНИЙ / БЕЛЫЙ	6	CARDIOPOINT™ ПРОКЛАДКИ 3X7 мм ЖЁСТКИЕ	8886332356
	2-0	3	90	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886336951
	2-0	3	90	БЕЛЫЙ	36	CARDIOPOINT™	8886283951

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOF™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И EP ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

TI-CRON™ / SURGIDAC™

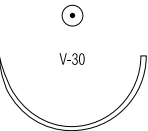
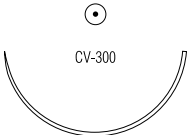
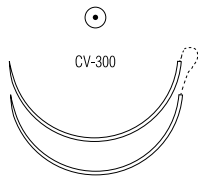
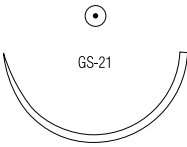
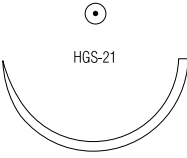
ПЛЕТЕННЫЙ И МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ И НЕПОКРЫТЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

Колющая / Taper Point							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 20 мм		3-0	2	5x45	СИНИЙ	24	D-TACH™ 8886326742
1/2 круга 22 мм		0	3.5	5x45	СИНИЙ	24	D-TACH™ 8886325762
1/2 круга 25 мм		4-0	1.5	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™ 8886318531
		3-0	2	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™ 8886318541
		2-0	3	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™ 8886318551
		0	3.5	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™ 8886318561
		1	4	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™ 8886318571
1/2 круга 25 мм		4-0	1.5	90	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™ 8886325631
		3-0	2	90	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™ 8886325641
		2-0	3	8x75	СИНИЙ / БЕЛЫЙ	6	CARDIOPOINT™ ПРОКЛАДКИ 3X6 мм ЖЕСТКИЕ ОВАЛ VCD20305MFE
		2-0	3	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™ ПРОКЛАДКИ 3X6 мм ЖЕСТКИЕ ОВАЛ VCD20305FE
		2-0	3	10x75	СИНИЙ / БЕЛЫЙ	6	CARDIOPOINT™ 8886335656
		2-0	3	10x75	СИНИЙ / БЕЛЫЙ	6	CARDIOPOINT™ ПРОКЛАДКИ 3X7 мм ЖЕСТКИЕ 8886332456
		2-0	3	8x90	СИНИЙ / БЕЛЫЙ	6	CARDIOPOINT™ ПРОКЛАДКИ 3X6 мм ЖЕСТКИЕ ОВАЛ VCD2036305FE
		2-0	3	90	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™ 8886325651
		2-0	3	90	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™ ПРОКЛАДКИ 3X7 мм ЖЕСТКИЕ 8886333651
		2-0	3	90	БЕЛЫЙ	36	CARDIOPOINT™ 8886291451
		2-0	3	10x90	СИНИЙ / БЕЛЫЙ	6	CARDIOPOINT™ 8886298156
		2-0	3	6x90	СИНИЙ/БЕЛЫЙ	6	CARDIOPOINT™ ПРОКЛАДКИ 3X7 мм ЖЕСТКИЕ 8886330656
		0	3.5	90	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™ 8886325661
1/2 круга 27 мм		2-0	3	75	Синий	36	8886309351
		0	3.5	75	Синий	36	8886309361

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0: SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOFT™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И ЕР ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

TI-CRON™ / SURGIDAC™

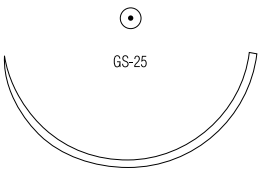
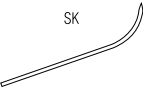
ПЛЕТЕННЫЙ И МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ И НЕПОКРЫТЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
1/2 круга 27 мм Н 	2	5	5x45	СИНИЙ	24	8886337282	
1/2 круга 30 мм 	3-0	2	75	СИНИЙ	36	8886320541	
	2-0	3	75	СИНИЙ	36	8886320551	
	0	3.5	75	СИНИЙ	36	8886320561	
1/2 круга 35 мм 	2-0	3	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886308251
	0	3.5	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886308261
1/2 круга 35 мм 	2-0	3	90	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886339351
	0	3.5	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886327461
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	75	СИНИЙ	36	8886309051	
	0	3.5	75	СИНИЙ	36	8886309061	
	1	4	75	СИНИЙ	36	8886309071	
1/2 круга 37 мм Н 	1	4	75	СИНИЙ	36	8886311371	
	2	5	75	СИНИЙ	36	8886311381	
	5	7	75	СИНИЙ	36	8886311179	
1/2 круга 40 мм Н 	2	5	75	Синий	36	8886337681	

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOF™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И EP ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

TI-CRON™ / SURGIDAC™

ПЛЕТЕННЫЙ И МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ И НЕПОКРЫТЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

Колющая / Taper Point							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 48 мм 		0	3.5	75	СИНИЙ	36	8886309761
		1	4	75	СИНИЙ	36	8886309771
J-игла 32 мм 		1	4	75	СИНИЙ	36	8886310371
Лыжа 23 мм 		2-0	3	120	СИНИЙ	36	8886301751
		0	3.5	120	СИНИЙ	36	8886301761

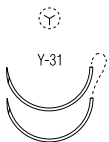
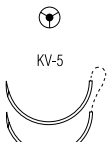
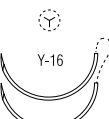
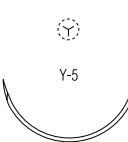
Колюще-режущая / Tapercutting							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 18 мм 		4-0	1.5	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™ 8886310731
3/8 круга 18 мм 		3-0	2	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™ 8886318241
		2-0	3	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™ 8886318251
		2-0	3	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™ ПРОКЛАДКИ 3X7 мм ЖЕСТКИЕ 8886323351
		2-0	3	10x75	СИНИЙ / БЕЛЫЙ	6	CARDIOPOINT™ ПРОКЛАДКИ 3X7 мм ЖЕСТКИЕ 8886336556
		2-0	3	90	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™ 8886263151
		2-0	3	10x90	СИНИЙ / БЕЛЫЙ	6	CARDIOPOINT™ 8886305256
		2-0	3	10x90	СИНИЙ / БЕЛЫЙ	6	CARDIOPOINT™ ПРОКЛАДКИ 3X7 мм ЖЕСТКИЕ 8886265856

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0: SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOFT™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И ЕР ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

TI-CRON™ / SURGIDAC™

ПЛЕТЕННЫЙ И МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ И НЕПОКРЫТЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

Колюще-режущая / Tapercutting

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
1/2 круга 16 мм 	4-0	1.5	90	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886316031
	3-0	2	75	БЕЛЫЙ	36	CARDIOPOINT™	8886288041
	3-0	2	90	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886316041
	2-0	3	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886312551
	2-0	3	75	БЕЛЫЙ	36	CARDIOPOINT™	8886288051
	2-0	3	10x75	СИНИЙ / БЕЛЫЙ	6	CARDIOPOINT™	8886287756
	2-0	3	10x75	СИНИЙ / БЕЛЫЙ	6	CARDIOPOINT™ ПРОКЛАДКИ 3X7 мм ЖЕСТКИЕ	8886322156
	2-0	3	8x75	СИНИЙ / БЕЛЫЙ	6	CARDIOPOINT™ ПРОКЛАДКИ 3X7 мм ЖЕСТКИЕ	8886321856
	2-0	3	8x75	СИНИЙ / БЕЛЫЙ	6	CARDIOPOINT™ ПРОКЛАДКИ 3X7 мм ЖЕСТКИЕ	8886321956
	2-0	3	8x75	СИНИЙ / БЕЛЫЙ	6	CARDIOPOINT™ ПРОКЛАДКИ 3X6 мм ЖЕСТКИЕ ОВАЛ	VCD2031MFE
	2-0	3	8x75	СИНИЙ / БЕЛЫЙ	6	CARDIOPOINT™ ПРОКЛАДКИ 3X6 мм ЖЕСТКИЕ ОВАЛ	VCD2031MSE
	2-0	3	90	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886316051
	2-0	3	90	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™ ПРОКЛАДКИ 3X7 мм ЖЕСТКИЕ	8886320451
	2-0	3	90	БЕЛЫЙ	36	36 CARDIOPOINT™ ПРОКЛАДКИ 3X7 мм ЖЕСТКИЕ	8886280851
1/2 круга 17 мм 	4-0	1.5	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886315931
	3-0	2	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886315941
	2-0	3	10x75	СИНИЙ / БЕЛЫЙ	6	SURGALLOY™	8886287956
	2-0	3	8x75	СИНИЙ / БЕЛЫЙ	6	SURGALLOY™ ПРОКЛАДКИ 3X7 мм ЖЕСТКИЕ	8886323556
	2-0	3	90	СИНИЙ	36	SURGALLOY™	8886315951
1/2 круга 20 мм 	2-0	3	90	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886315751
1/2 круга 26 мм 	3-0	2	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886308841
	2-0	3	75	СИНИЙ	36	CARDIOPOINT™	8886308851

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOF™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И EP ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

TI-CRON™ / SURGIDAC™

ПЛЕТЕНЫЙ И МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ И НЕПОКРЫТЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

Прокладки / Pledgets			
Описание		Кол-во в упаковке	Код для заказа
Прокладки из PTFE прямоугольные		10x36	ПРОКЛАДКИ 3X3 мм ЖЁСТКИЕ 8886867501
		10x36	ПРОКЛАДКИ 3X7 мм ЖЁСТКИЕ 8886867701
		10x36	ПРОКЛАДКИ 3X7 мм МЯГКИЕ 8886868201
		5x36	ПРОКЛАДКИ 9.5X4.8 мм ЖЁСТКИЕ 8886867901
		5x36	ПРОКЛАДКИ 9.5X4.8 мм МЯГКИЕ 8886867801

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOFT™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И ЕР ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

MONOSOFT™ / DERMALON™

МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИАМИДА

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Монофиламентный шовный материал Monosoft™ / Dermalon™ из полиамида является инертным, нерассасывающимся шовным материалом. По химической структуре представляет собой длинную химическую цепь алифатических полимеров Нейлон 6 и Нейлон 6.6.

ПОКАЗАНИЯ

Монофиламентный нейлоновый не рассасывающийся шовный материал Monosoft™ / Dermalon™ применяется для сопоставления тканей и/или для лигирования, используется в общей, пластической, сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии и нейрохирургии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Монофиламентный нейлоновый не рассасывающийся шовный материал Monosoft™ / Dermalon™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.

СРОК ПОДДЕРЖКИ РАНЫ

Как и любой другой нейлоновый не рассасывающийся шовный материал со временем подвергается частичному гидролизу in vivo, что может привести к незначительной потере прочности.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Окись этилена или гамма облучение.

УПАКОВКА

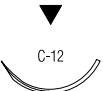
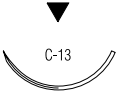
Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал Monosoft™ производится как неокрашенным, так и в черном цвете размерами от 2 (метрический размер 5) до 11-0 (метрический размер 0.1). Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал Dermalon™ производится окрашенным в синий D&C цвет No. 2 в размерах от 1 (метрический размер 4) до 6-0 (метрический размер 0.7).

Стерильный шовный материал Monosoft™ / Dermalon™ поставляется в отрезках различной длины и катушках, в безыгольном исполнении и с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми.

Формируется в коробках по 12, 24 или 36 штук.

MONOSOF™ / DERMALON™

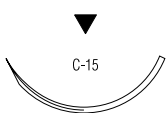
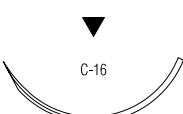
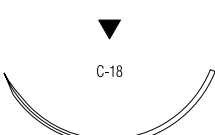
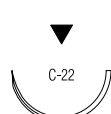
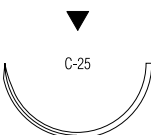
МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИАМИДА

Обратно-режущая / Reverse Cutting							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 12 мм 		6-0	0.7	45	ЧЁРНЫЙ	36	SN-667
		6-0	0.7	45	СИНИЙ	36	8886174111
		5-0	1	45	ЧЁРНЫЙ	36	SN-871
		5-0	1	45	СИНИЙ	36	8886174121
3/8 круга 16 мм 		6-0	0.7	45	ЧЁРНЫЙ	36	SN-660
		5-0	1	45	ЧЁРНЫЙ	36	SN-659
		4-0	1.5	75	ЧЁРНЫЙ	36	SN-762
		3-0	2	75	ЧЁРНЫЙ	36	SN-763
3/8 круга 19 мм 		5-0	1	45	ЧЁРНЫЙ	36	SN-661
		5-0	1	45	ЧЁРНЫЙ	12	SN-661-G
		5-0	1	45	СИНИЙ	36	8886175621
		4-0	1.5	45	ЧЁРНЫЙ	36	SN-662
		4-0	1.5	45	СИНИЙ	36	8886175631
		4-0	1.5	75	СИНИЙ	36	8886175731
		4-0	1.5	90	ЧЁРНЫЙ	36	SN-644
		3-0	2	45	ЧЁРНЫЙ	36	SN-653
		3-0	2	45	СИНИЙ	36	8886175641
		3-0	2	75	ЧЁРНЫЙ	36	SN-641
		3-0	2	75	СИНИЙ	36	8886175741
		3-0	2	90	ЧЁРНЫЙ	36	SN-665
		2-0	3	45	СИНИЙ	36	8886175651
		2-0	3	90	ЧЁРНЫЙ	36	SN-666
		4-0	1.5	45	ЧЁРНЫЙ	36	SN-658
3/8 круга 24 мм 		4-0	1.5	90	ЧЁРНЫЙ	36	SN-649
		3-0	2	45	ЧЁРНЫЙ	36	SN-663
		3-0	2	45	ЧЁРНЫЙ	12	SN-663-G
		3-0	2	45	ЧЁРНЫЙ	36	8886174441
		3-0	2	75	СИНИЙ	36	8886179941
		3-0	2	90	СИНИЙ	36	SN-648
		2-0	2	45	ЧЁРНЫЙ	36	SN-758
		2-0	3	75	СИНИЙ	36	8886179951
		2-0	3	90	ЧЁРНЫЙ	36	SN-747

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOF™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И ЕР ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

MONOSOF™ / DERMALON™

МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИАМИДА

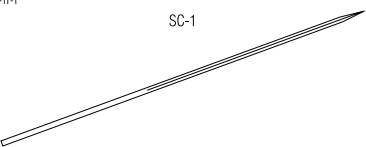
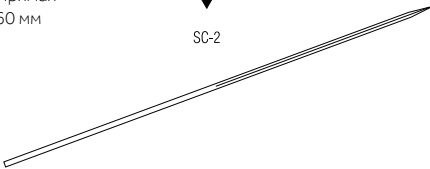
Обратно-режущая / Reverse Cutting						
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 26 мм 	2-0	3	45	ЧЁРНЫЙ	36	SN-764
	2-0	3	45	СИНИЙ	36	8886174451
	2-0	3	75	ЧЁРНЫЙ	36	SN-664
	2-0	3	75	ЧЁРНЫЙ	12	SN-664-G
3/8 круга 30 мм 	3-0	2	75	ЧЁРНЫЙ	36	SN-671
	3-0	2	75	СИНИЙ	36	8886175041
	3-0	2	90	ЧЁРНЫЙ	36	SN-771
	2-0	3	75	ЧЁРНЫЙ	36	SN-688
	2-0	3	90	ЧЁРНЫЙ	36	SN-788
	0	3.5	75	ЧЁРНЫЙ	36	SN-689
	1	4	90	ЧЁРНЫЙ	36	SN-790
3/8 круга 35 мм 	2-0	3	90	ЧЁРНЫЙ	36	SN-694
3/8 круга 39 мм 	3-0	2	75	ЧЁРНЫЙ	36	SN-673
	3-0	2	75	СИНИЙ	36	8886172741
	2-0	3	75	ЧЁРНЫЙ	36	SN-674
	2-0	3	75	СИНИЙ	36	8886172751
	0	3.5	90	ЧЁРНЫЙ	36	SN-775
1/2 круга 18 мм 	4-0	1.5	75	ЧЁРНЫЙ	36	SN-630
1/2 круга 30 мм 	3-0	2	75	ЧЁРНЫЙ	36	SN-681
	2-0	3	90	ЧЁРНЫЙ	36	SN-782
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	75	ЧЁРНЫЙ	36	CN-819
	1	4	90	ЧЁРНЫЙ	36	CN-822

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOF™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И EP ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

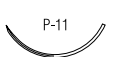
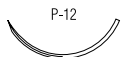
MONOSOF™ / DERMALON™

МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИАМИДА

Обратно-режущая / Reverse Cutting

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
Прямая 51 мм ▼ SC-1 	4-0	1.5	90	ЧЁРНЫЙ	36	SN-615
	3-0	2	90	ЧЁРНЫЙ	36	SN-616
Прямая 60 мм ▼ SC-2 	2-0	3	75	ЧЁРНЫЙ	36	SN-628
	2-0	3	100	ЧЁРНЫЙ	36	SN-728

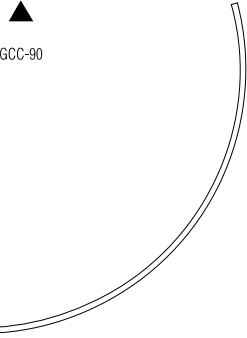
Косметическая обратно-режущая / Cosmetic Reverse Cutting

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 11 мм ▼ P-10 	6-0	0.7	45	ЧЁРНЫЙ	36	SURGALLOY™ SN-5697
	6-0	0.7	45	ЧЁРНЫЙ	12	SURGALLOY™ SN-3697
3/8 круга 13 мм ▼ P-13 	6-0	0.7	45	ЧЁРНЫЙ	36	SURGALLOY™ SN-5696
	5-0	1	45	ЧЁРНЫЙ	36	SURGALLOY™ SN-5698
	4-0	1.5	45	ЧЁРНЫЙ	36	SURGALLOY™ SN-5699
	4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	36	SURGALLOY™ SN-5691
3/8 круга 16 мм ▼ P-11 	5-0	1	45	ЧЁРНЫЙ	36	SURGALLOY™ SN-5668
	4-0	1.5	45	ЧЁРНЫЙ	36	SURGALLOY™ SN-5694
3/8 круга 19 мм ▼ P-12 	5-0	1	45	ЧЁРНЫЙ	36	SURGALLOY™ SN-5666
	4-0	1.5	45	ЧЁРНЫЙ	36	SURGALLOY™ SN-5667
	3-0	2	45	ЧЁРНЫЙ	36	SURGALLOY™ SN-5669
3/8 круга 24 мм ▼ P-14 	3-0	2	45	ЧЁРНЫЙ	36	SURGALLOY™ SN-5663

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOF™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И EP ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

MONOSOF™ / DERMALON™

МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИАМИДА

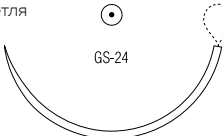
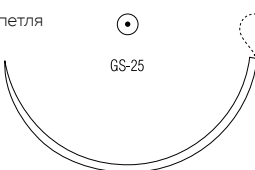
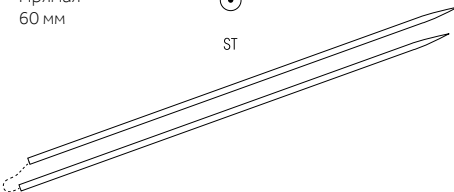
Режущая / Conventional Cutting							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 19 мм		4-0	1.5	45	ЧЁРНЫЙ	36	SN-568
		4-0	1.5	45	СИНИЙ	36	8886174231
		3-0	2	45	СИНИЙ	36	8886174241
3/8 круга 90 мм		2-0	3	100	ЧЁРНЫЙ	36	CN-791
		1	4	100	ЧЁРНЫЙ	36	CN-793

Премиум шпатель / Premium Spatula							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/4 круга 6 мм		8-0	0.4	30	ЧЁРНЫЙ	12	SURGALLOY™ N-2714-K
Кривизна 100° Длина иглы 5.90 мм Радиус 3.94 мм Микрон 200							
3/8 круга 6 мм		10-0	0.2	30	ЧЁРНЫЙ	12	SURGALLOY™ N-2770-K
Кривизна 135° Длина иглы 4.80 мм Радиус 2.60 мм Микрон 150							
1/2 круга 6 мм		9-0	0.3	30	ЧЁРНЫЙ	12	SURGALLOY™ N-2760-K
Кривизна 158° Длина иглы 3.90 мм Радиус 2.00 мм Микрон 150							

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOF™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И EP ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

MONOSOF™ / DERMALON™

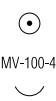
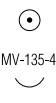
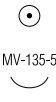
МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИАМИДА

Премиум шпатель / Premium Spatula							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
1/2 круга 7 мм  SE-175-8  Кривизна 175° Длина иглы 4.60 мм Радиус 2.30 мм Микрон 200	8-0	0.4	30	ЧЁРНЫЙ	12	SURGALLOY™	N-2716-K
Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
1/2 круга 40 мм  GS-24	0	3.5	100	ЧЁРНЫЙ	36		CN-723
1/2 круга, петля 40 мм  GS-24	0	3.5	150	ЧЁРНЫЙ	24	НИТЬ 150 CM, ПЕТЛЯ 75 CM	CN-825-L
1/2 круга, петля 48 мм  GS-25	1	4	150	ЧЁРНЫЙ	24	НИТЬ 150 CM, ПЕТЛЯ 75 CM	CN-830-L
Прямая 60 мм  ST	2-0	3	90	ЧЁРНЫЙ	36		GN-283

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOF™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И EP ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

MONOSOF™ / DERMALON™

МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИАМИДА

Микрохирургическая колющая / Microsurgery Taper Point								
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
3/8 круга 4 мм Кривизна 140° Длина иглы 3.08 мм Радиус 1.64 мм	 MV-50-3	11-0	0.1	13	ЧЁРНЫЙ	12	SURGALLOY™	N-2500
3/8 круга 4 мм Кривизна 140° Длина иглы 3.08 мм Радиус 1.64 мм	 MV-70-3	11-0	0.1	13	ЧЁРНЫЙ	12	SURGALLOY™	N-2510
		10-0	0.2	13	ЧЁРНЫЙ	12	SURGALLOY™	N-2512
3/8 круга 4 мм Кривизна 140° Длина иглы 3.08 мм Радиус 1.64 мм	 MV-135-3	9-0	0.3	8	ЧЁРНЫЙ	12	SURGALLOY™	N-1603-G
3/8 круга 5 мм Кривизна 140° Длина иглы 3.85 мм Радиус 2.05 мм	 MV-100-4	10-0	0.2	13	ЧЁРНЫЙ	12	SURGALLOY™	N-2530
		9-0	0.3	13	ЧЁРНЫЙ	12	SURGALLOY™	N-2532
3/8 круга 5 мм Кривизна 140° Длина иглы 3.85 мм Радиус 2.05 мм	 MV-135-4	9-0	0.3	13	ЧЁРНЫЙ	12	SURGALLOY™	N-2546
		8-0	0.4	13	ЧЁРНЫЙ	12	SURGALLOY™	N-2543
3/8 круга 6 мм Кривизна 140° Длина иглы 4.92 мм Радиус 2.62 мм	 MV-135-5	8-0	0.4	13	ЧЁРНЫЙ	12	SURGALLOY™	N-2547

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOF™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И ЕР ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.



SURGILON™

ПЛЕТЁНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИАМИДА

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Плетёный шовный материал из полиамида Surgilon™ — инертен и не рассасывается. По химической структуре представляет собой длинную химическую цепь полимеров Нейлон 6 и Нейлон 6.6. Плетеные нити равномерно покрыты силиконом для улучшения манипуляционных характеристик и уменьшения капиллярности.

ПОКАЗАНИЯ

Плетёный нейлоновый не рассасывающийся шовный материал Surgilon™ применяется для сопоставления тканей и/или для лигирования, используется в общей, торакальной, пластической, косметической, сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии и нейрохирургии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Плетёный нейлоновый не рассасывающийся шовный материал Surgilon™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.

СРОК ПОДДЕРЖКИ РАНЫ

Как и любой другой нейлоновый не рассасывающийся шовный материал со временем подвергается частичному гидролизу in vivo, что может привести к незначительной потере прочности.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Плетёный шовный материал из полиамида Surgilon™ стерилизуется оксидом этилена в размерах от 6-0 (метрический размер 0,7) и менее, гамма облучением в размерах от 2 (метрический размер 5) до 5-0 (метрический размер 1).

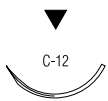
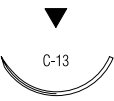
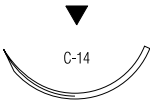
УПАКОВКА

Плетёный нейлоновый шовный материал Surgilon™ производится как неокрашенным (белым), так и в черном цвете размерами от 2 (метрический размер 5) до 7-0 (метрический размер 0.5). Стерильный шовный материал Surgilon™ поставляется различной длины, диаметра и с разным количеством в индивидуальной упаковке, в безыгольном исполнении или с иглами, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 или 36 штук. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

SURGILON™

ПЛЕТЁНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИАМИДА.

Без иглы / Non Needled						
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
Лигатуры	4-0	1.5	12x45	ЧЁРНЫЙ	36	8886191831
	4-0	1.5	7x75	ЧЁРНЫЙ	36	8886191931
	3-0	2	12x45	ЧЁРНЫЙ	36	8886191841
	3-0	2	7x75	ЧЁРНЫЙ	36	8886191941
	2-0	3	12x45	ЧЁРНЫЙ	36	8886191851
	2-0	3	12x45	БЕЛЫЙ	36	8886189951
	2-0	3	7x75	ЧЁРНЫЙ	36	8886191951
	0	3.5	6x45	ЧЁРНЫЙ	36	8886191761
	0	3.5	6x45	БЕЛЫЙ	36	8886190261
	0	3.5	7x75	ЧЁРНЫЙ	36	8886191961
	1	4	6x45	ЧЁРНЫЙ	36	8886191771
	1	4	7x75	ЧЁРНЫЙ	36	8886191971
	2	5	6x45	ЧЁРНЫЙ	24	8886191782
Катушки	3-0	2	360	ЧЁРНЫЙ	24	8886190642
	2-0	3	360	ЧЁРНЫЙ	24	8886190652
	0	3.5	250	ЧЁРНЫЙ	24	8886192062
	1	4	250	ЧЁРНЫЙ	24	8886192072
	2	5	300	ЧЁРНЫЙ	12	8886191483
	3	6	238	ЧЁРНЫЙ	12	8886192093

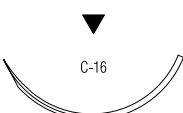
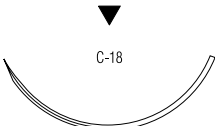
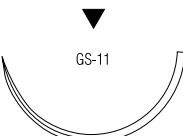
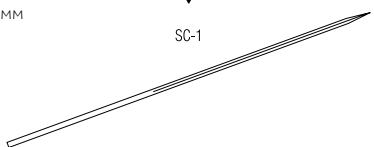
Обратно-режущая / Reverse Cutting						
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 16 мм 	3-0	2	75	ЧЁРНЫЙ	36	8886191641
3/8 круга 19 мм 	4-0	1.5	75	ЧЁРНЫЙ	36	8886193331
	3-0	2	75	ЧЁРНЫЙ	36	8886198241
	2-0	3	75	ЧЁРНЫЙ	36	8886198251
3/8 круга 24 мм 	3-0	2	75	ЧЁРНЫЙ	36	8886193541
	2-0	3	45	ЧЁРНЫЙ	12	8886193453
	2-0	3	75	ЧЁРНЫЙ	36	8886193551

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOFT™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И ЕР ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

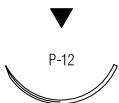
SURGILON™

ПЛЕТЁНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИАМИДА

Обратно-режущая / Reverse Cutting

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 30 мм 	2-0	3	75	ЧЁРНЫЙ	36	8886188351
	0	3.5	75	ЧЁРНЫЙ	36	8886188361
	1	4	75	ЧЁРНЫЙ	36	8886188371
3/8 круга 35 мм 	1	4	75	ЧЁРНЫЙ	36	8886192271
1/2 круга 26 мм 	2-0	3	75	ЧЁРНЫЙ	36	8886193251
1/2 круга 37 мм 	1	4	75	ЧЁРНЫЙ	36	8886191571
Прямая 51 мм 	2-0	3	75	ЧЁРНЫЙ	36	8886198551

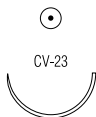
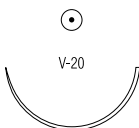
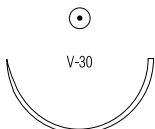
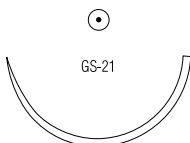
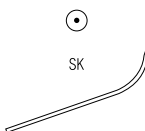
Косметическая обратно-режущая / Cosmetic Reverse Cutting

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 13 мм 	5-0	1	45	ЧЁРНЫЙ	12	SURGALLOY™ SBS-1928-G
3/8 круга 19 мм 	4-0	1.5	45	БЕЛЫЙ	12	SURGALLOY™ SBS-1884-G
	3-0	2	45	БЕЛЫЙ	12	SURGALLOY™ SBS-1883-G

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOF™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И EP ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

SURGILON™

ПЛЕТЁНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОЛИАМИДА

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
1/2 круга 17 мм 	4-0	1.5	75	ЧЁРНЫЙ	36	8886199531	
	3-0	2	75	ЧЁРНЫЙ	36	8886199541	
1/2 круга 26 мм 	3-0	2	75	ЧЁРНЫЙ	36	8886195141	
	2-0	3	75	ЧЁРНЫЙ	36	8886195151	
	0	3.5	75	ЧЁРНЫЙ	36	8886195161	
1/2 круга 30 мм 	3-0	2	75	ЧЁРНЫЙ	36	8886196441	
	2-0	3	75	ЧЁРНЫЙ	36	8886196451	
	0	3.5	75	ЧЁРНЫЙ	36	8886196461	
1/2 круга 37 мм 	1	4	75	ЧЁРНЫЙ	36	8886197171	
Лыжа 23 мм 	2-0	3	250	ЧЁРНЫЙ	36	8886201151	

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOFT™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И EP ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

SOFSILK™

ПЛЕТЁНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ПОКРЫТЫЙ ШЁЛК

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Шовный материал Sof silk™ представляет собой нерассасывающийся, стерильный, немутагенный хирургический шовный материал, состоящий из натуральных белковых шёлковых волокон - фиброин. Этот белок получают от одомашненных гусениц тутового шелкопряда Bombyx mori семейства Bombycidae. Для получения хирургического шовного материала SOFSILK™ шёлковые волокна обрабатываются для удаления серициновой смазки, отбеливаются, сплетаются. Плетёные нити равномерно покрываются силиконом или особой восковой рецептурой для снижения капиллярности и увеличения смачиваемости, обеспечивающей оптимальные манипуляционные свойства, плавное прохождение через ткани и опускание узла.

ПОКАЗАНИЯ

Шовный материал Sof silk™ предназначен для сопоставления тканей и/или для лигирования, применения в общей, торакальной, сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии, ортопедии и нейрохирургии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Шовный материал Sof silk™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.

СРОК ПОДДЕРЖКИ РАНЫ

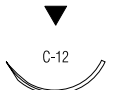
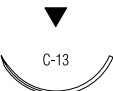
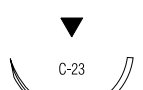
Шовный материал Sof silk™ является нерассасывающимся. Деградация протеиновых волокон шелка in vivo может приводить к частичной потере прочности шовного материала со временем.

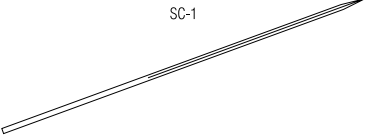
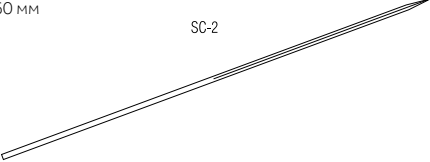
СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Гамма облучение.

УПАКОВКА:

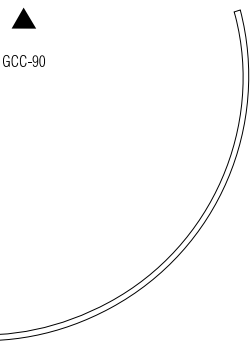
Шовный материал Sof silk™ выпускается белым или окрашенным в черный цвет и покрыт или силиконом, или специальной восковой рецептурой, размерами от 2 (метрический размер 5) до 8-0 (метрический размер 0.4). Стерильный шовный материал Sof silk™ поставляется с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12,24 или 36 шт.

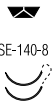
Обратно-режущая / Reverse Cutting								
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
3/8 круга 12 мм		5-0	1	45	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	S-1173
3/8 круга 16 мм		6-0	0.7	45	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ СИЛИКОНОМ	SS-681
		5-0	1	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-673
		4-0	1.5	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-645
		3-0	2	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-745
3/8 круга 19 мм		5-0	1	45	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-682
		5-0	1	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-652
		4-0	1.5	45	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-683
		3-0	2	45	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-694
		3-0	2	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-654
		0	3.5	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-656
3/8 круга 24 мм		4-0	1.5	45	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-629
		3-0	2	45	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-684
		2-0	3	45	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-695
		2-0	3	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-785
3/8 круга 26 мм		2-0	3	45	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-685
3/8 круга 30 мм		3-0	2	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-675
		2-0	3	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-679
		0	3.5	45	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-678
		0	3.5	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-680
		1	4	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-689
3/8 круга 39 мм		2-0	3	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-648
		0	3.5	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-647
		1	4	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-646
		2	5	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-651
1/2 круга 24 мм		3-0	2	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-632
		2-0	3	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	SS-633

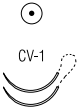
Обратно-режущая / Reverse Cutting							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
Прямая 51 мм		2-0	3	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ SS-523
Прямая 60 мм		2-0	3	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ SS-623
		2-0	3	100	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ SS-723
		0	3.5	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ SS-624

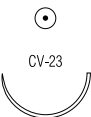
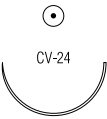
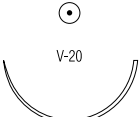
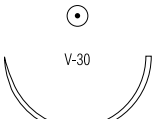
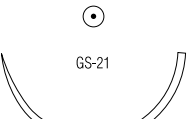
Косметическая обратно-режущая / Cosmetic Reverse Cutting							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 11 мм		6-0	0.7	45	ЧЁРНЫЙ	36	SURGALLOY™ ПОКРЫТИЕ СИЛИКОНОМ SS-5639
3/8 круга 13 мм		5-0	1	45	ЧЁРНЫЙ	36	SURGALLOY™ ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ SS-5640

Премиум обратно-режущая / Premium Point Reverse Cutting							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 13 мм		4-0	1.5	45	ЧЁРНЫЙ	12	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ S-1789-K
Кривизна 130° Длина иглы 10.37 мм Радиус 5.72 мм							

Режущая / Conventional Cutting							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 90 мм		2-0	3	100	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ CS-791
		0	3.5	100	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ CS-792
		1	4	100	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ CS-793

Премиум шпатель / Premium Spatula							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 6 мм		8-0	0.4	45	ЧЁРНЫЙ	12	SURGALLOY™ ПОКРЫТИЕ СИЛИКОНОМ S-1734-K
Кривизна 135° Длина иглы 4.80 мм Радиус 2.60 мм Микрон 200							

Колющая / Taper Point							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 9 мм		7-0	0.5	45	ЧЁРНЫЙ	36	SURGALLOY™ ПОКРЫТИЕ СИЛИКОНОМ VS-809
3/8 круга 13 мм		6-0	0.7	75	ЧЁРНЫЙ	36	SURGALLOY™ ПОКРЫТИЕ СИЛИКОНОМ VS-889
		5-0	1	75	ЧЁРНЫЙ	36	SURGALLOY™ ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ VS-890
3/8 круга 17 мм		4-0	1.5	75	ЧЁРНЫЙ	36	SURGALLOY™ ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ VS-881
		3-0	2	75	ЧЁРНЫЙ	36	SURGALLOY™ ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ VS-882

Колющая / Taper Point								
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке			Код для заказа
1/2 круга 17 мм 	4-0	1.5	75	ЧЁРНЫЙ	36	SURGALLOY™	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	VS-871
	3-0	2	75	ЧЁРНЫЙ	36	SURGALLOY™	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	VS-872
1/2 круга 20 мм 	4-0	1.5	75	ЧЁРНЫЙ	36	SURGALLOY™	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	GS-451
	3-0	2	75	ЧЁРНЫЙ	36	SURGALLOY™	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	GS-452
1/2 круга 26 мм 	3-0	2	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ		GS-832
	2-0	3	5x45	ЧЁРНЫЙ	24	D-TACH™	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ	GS-62-M
	2-0	3	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ		GS-833
	0	3.5	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ		GS-834
1/2 круга 30 мм 	3-0	2	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ		GS-822
	2-0	3	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ		GS-823
	0	3.5	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ		GS-824
1/2 круга 37 мм 	0	3.5	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ		VS-844
	1	4	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ		VS-845
	2	5	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ		VS-846
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ		CS-423
	0	3.5	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ		CS-424
1/2 круга 40 мм 	2	5	75	ЧЁРНЫЙ	36	ПОКРЫТИЕ ВОСКОМ		CS-575

STEEL

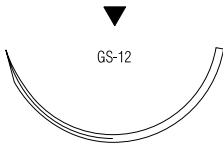
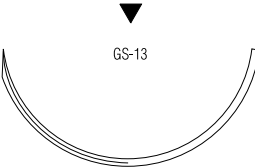
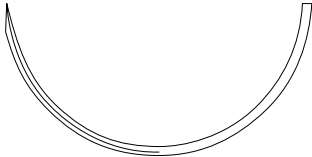
МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 316L

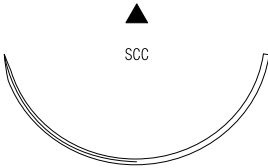
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА	Шовный материал из нержавеющей стали 316L и соответствуют всем стандартам USP и EP, предъявляемым к нерассасывающимся шовным материалам.
ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА	Шовный материал из стали наиболее инертный среди всех шовных материалов и обеспечивает максимальную прочность.
ПОКАЗАНИЯ	Синтетический стальной шовный материал предназначен для закрытия грудины и также для некоторых ортопедических процедур (например, при восстановлении сухожилия).
ДЕЙСТВИЕ	Стальной шовный материал вызывает минимальную реакцию тканей и не рассасывается в организме.
ПРОЧНОСТЬ	Постоянная.
СТЕРИЛИЗАЦИЯ	Окись этилена или гамма облучение.
УПАКОВКА	Возможные варианты размеров стального шовного материала от 6-0 (метрический размер 0.7) до 7 (метрический размер 9). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, без игл или с иглами, закрепленными перманентно или ROTO GRIP™, поворачивающимися на 360°. Формируется в коробках по 12 и 36 шт. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

STEEL

МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 316L

Без иглы / Non Needled						
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
Лигатуры	0	3.5	12x45		12	8886240763
	2	5	6x45		12	8886240883

Обратно-режущая / Reverse Cutting						
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 40 мм 	2	5	5x45		12	8886241383
1/2 круга 48 мм 	2	5	2x45		12	ROTO-GRIP™ 8886242083
	4	6	2x45		12	ROTO-GRIP™ 8886242009
1/2 круга 55 мм H 	5	7	4x45		12	ROTO-GRIP™ 8886241089
	5	7	75		12	ROTO-GRIP™ 8886241289
	5	7	2x75		12	ROTO-GRIP™ 8886242489

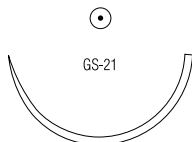
Режущая / Conventional Cutting						
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 48 мм 	5	7	4x45		12	8886222489
	6	8	2x45		12	8886222269
	6	8	4x45		12	8886222469
	6	8	6x45		12	8886222669
	7	9	4x45		12	8886222449

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOFT™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И ЕР ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

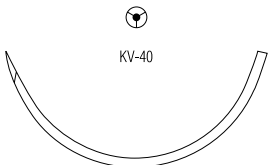
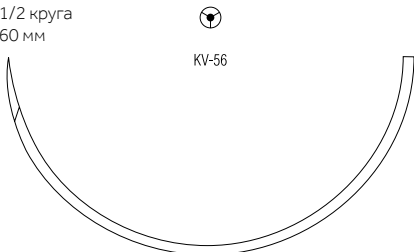
STEEL

МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 316L

Колющая / Taper Point

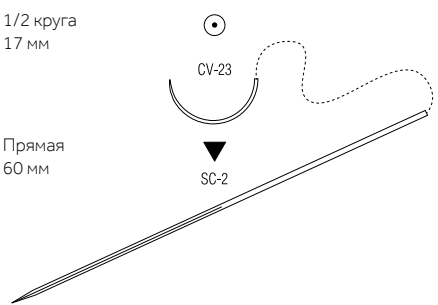
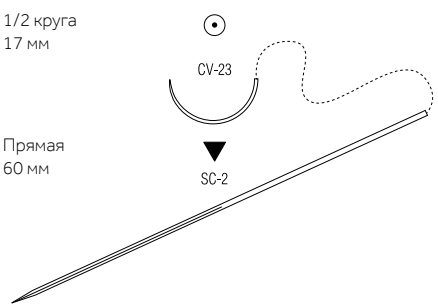
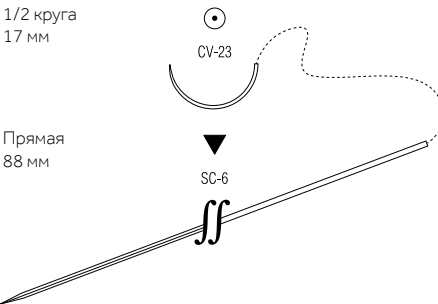
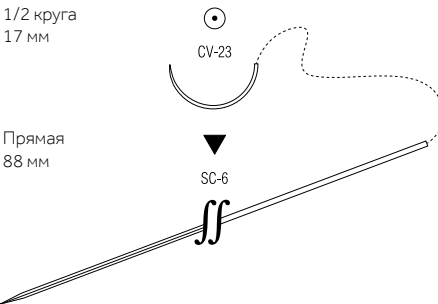
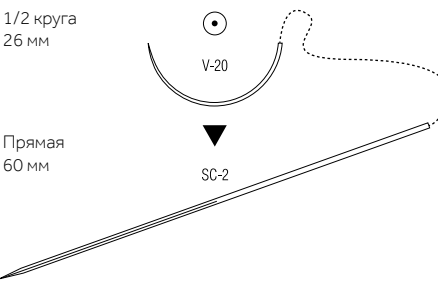
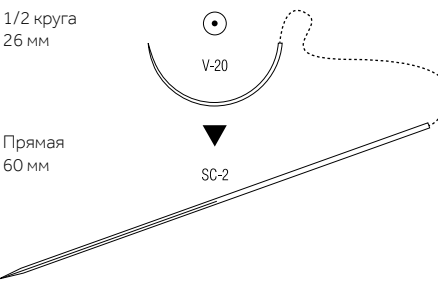
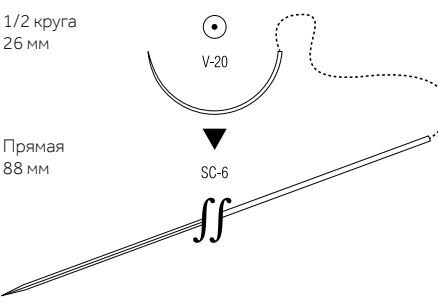
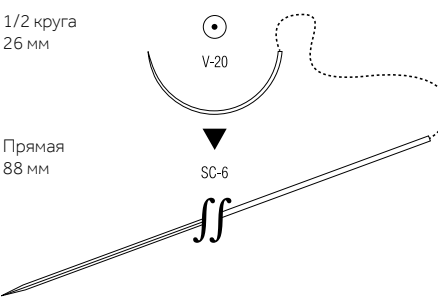
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	5x45		12	8886234553

Колюще-режущая / Tapercutting

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 48 мм 	5	7	4x45		12	8886241489
	5	7	4x45		12	8886239389
	6	8	2x45		12	8886239269
	6	8	4x45		12	8886239369
	7	9	2x45		12	8886239249
1/2 круга 60 мм 	5	7	5x75		12	8886239689



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА	Проводник для временного водителя сердечного ритма - материал Flexon™ представляет собой кручёную проволоку из нержавеющей стали с покрытием из оранжевого или белого PTFE (политетрафторэтилен) или прозрачного FEP.
ПОКАЗАНИЯ	Материал Flexon™ предназначен для использования в качестве временного проводника в предсердии и желудочковой зоне до и после операций на сердце.
ПРИМЕНЕНИЕ	Шовный материал Flexon™ вызывает минимальную реакцию тканей и не рассасывается.
СРОК ПОДДЕРЖКИ РАНЫ	Постоянная.
СТЕРИЛИЗАЦИЯ	Окись этилена.
УПАКОВКА	Проводник временного водителя ритма Flexon™ поставляется покрытым оранжевым или белым PTFE или прозрачным FEP в размерах от 4-0 (метрический размер 1,5) до 0 (метрический размер 3,5). Временный проводник сердечного ритма FLEXON™ поставляется стерильным с различными видами игл, включая так называемые «отламывающиеся» иглы BREAKAWAY™. Формируется в коробках по 12 и 36 шт. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Колющая / Taper Point							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 17 мм CV-23 Прямая 60 мм SC-2 		3-0	2	60		12	Покрытие FEP 8886259243
1/2 круга 17 мм CV-23 Прямая 88 мм SC-6 		3-0	2	60		12	BREAK-AWAY™ Покрытие FEP 8886258643
1/2 круга 26 мм V-20 Прямая 60 мм SC-2 		0	3.5	60		12	Покрытие FEP 8886259763
1/2 круга 26 мм V-20 Прямая 88 мм SC-6 		2-0	3	60	ОРАНЖЕВЫЙ	12	BREAK-AWAY™ ПОКРЫТИЕ PTFE 8886261753
		2-0	3	60	БЕЛЫЙ	12	BREAK-AWAY™ ПОКРЫТИЕ PTFE 8886261553
		2-0	3	2x60	ОРАНЖЕВЫЙ/БЕЛЫЙ	12	BREAK-AWAY™ ПОКРЫТИЕ PTFE 8886262353

V-LOC™ 90

РАССАСЫВАЮЩЕЕСЯ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УШИВАНИЯ РАН

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

V-LOC™ 90 – рассасывающееся устройство для закрытия ран, представляющее собой рассасывающуюся нить с насечками, соединенную с хирургической иглой с одной стороны, и имеющую петлю с другой. Насечки и петля созданы для возможности соединять ткани без необходимости завязывания узлов.

V-LOC™ 90 изготовлен из синтетического полиэфира: композиции гликолида, диаксанона и триметилен карбоната. V-loc 90 выпускается как неокрашенным, так и фиолетовым. Рассасывающееся устройство для закрытия ран стерильно упаковано, инертно, не содержит антигенных структур.

ПОКАЗАНИЯ

V-LOC™ 90 предназначен для сопоставления мягких тканей, когда возможно применение рассасывающихся шовных материалов. Безопасность и эффективность V-LOC™ 90 не установлена при ушивании фасциальных дефектов (брюшная стенка, грудная клетка, фасциальные дефекты конечностей), межкишечных и сосудистых анастомозах, в нейрохирургии, офтальмологии и микрохирургии.

ПРИМЕНЕНИЕ

V-LOC™ 90 вызывает лишь минимальную воспалительную реакцию тканей, которая связана с постепенным формированием вокруг нити фиброзной соединительной ткани. Постепенная потеря прочности и полная абсорбция V-LOC™ 90 происходит путем гидролиза: рассасывающееся устройство для закрытия ран разрушается до гликолевой и диаксаноновой кислот, пропандиола и углекислого газа, которые метаболизируются в организме.

СРОК ПОДДЕРЖКИ РАНЫ

Не менее 90% начальной прочности сохраняется в течение первой недели, не 75% в течение второй недели после имплантации.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Окись этилена.

РАССАСЫВАНИЕ

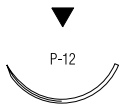
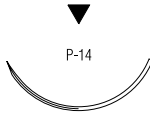
Абсорбция начинается с потери прочности без существенной потери массы. Исследования на животных показывают, что полное рассасывание заканчивается между 90 и 110 днями.

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

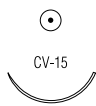
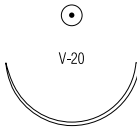
V-LOC™ 90

РАССАСЫВАЮЩЕЕСЯ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УШИВАНИЯ РАН

Косметическая обратно-режущая / Cosmetic Reverse Cutting

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 19 мм 	3-0	2	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ VLOCM0024
	3-0	2	58	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ VLOCM0034
	3-0	2	15	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ VLOCM0004
	3-0	2	30	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ VLOCM0014
	4-0	1.5	30	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ VLOCM0013
	4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ VLOCM0023
	4-0	1.5	15	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ VLOCM0003
	4-0	1.5	58	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ VLOCM0033
3/8 круга 24 мм 	2-0	3	58	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	VLOCM0135
	3-0	2	30	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ VLOCM0114
	3-0	2	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ VLOCM0124
	3-0	2	58	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™ VLOCM0134

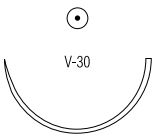
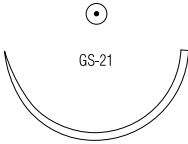
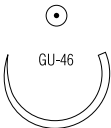
Колющая / Taper Point

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 17 мм 	3-0	2	15	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	SURGALLOY™ VLOCM1204
1/2 круга 17 мм 	3-0	2	15	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	SURGALLOY™ VLOCM0804
1/2 круга 26 мм 	2-0	3	45	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	VLOCM0625
	3-0	2	30	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	SURGALLOY™ VLOCM0614
	3-0	2	15	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	SURGALLOY™ VLOCM0604
	3-0	2	23	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	SURGALLOY™ VLOCM0644
1/2 круга 27 мм 	2-0	3	15	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	VLOCM2105
	2-0	3	23	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	VLOCM2145

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOFT™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И EP ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

V-LOC™ 90

РАССАСЫВАЮЩЕЕСЯ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УШИВАНИЯ РАН

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа	
1/2 круга 30 мм 	2-0	3	23	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	VLOCM1545	
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	15	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	VLOCM0305	
	2-0	3	23	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	VLOCM0345	
5/8 круга 27 мм 	3-0	2	15	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	VLOCM1704	
	3-0	2	23	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	VLOCM1744	

V-LOC™ 180

РАССАСЫВАЮЩЕЕСЯ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УШИВАНИЯ РАН

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

V-LOC™ 180 – рассасывающееся устройство для закрытия ран, представляющее собой рассасывающуюся нить с насечками, соединенную с хирургической иглой с одной стороны, и имеющую петлю с другой. Насечки и петля созданы для возможности соединять ткани без необходимости завязывания узлов. V-LOC™ 180 изготовлен из сополимера гликолевой кислоты и триметилен карбоната. V-LOC™ 180 выпускается как неокрашенным, так и зеленым. Рассасывающееся устройство для закрытия ран стерильно упаковано, инертно, не содержит антигенных структур.

ПОКАЗАНИЯ

V-LOC™ 180 предназначен для сопоставления мягких тканей, когда возможно применение рассасывающихся шовных материалов. Безопасность и эффективность V-LOC™ 180 не установлена при ушивании фасциальных дефектов (брюшная стенка, грудная клетка, фасциальные дефекты конечностей), межкишечных и сосудистых анастомозах, в нейрохирургии, офтальмологии и микрохирургии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Исследования на животных показали, что V-LOC™ 180 вызывает лишь минимальную реакцию тканей, которая связана с имплантацией инородного тела в зависимости от окружающих тканей. Тканевая реакция исчезает по мере рассасывания V-LOC™ 180. Эксперименты на животных убедительно доказали отсутствие антигенной активности, системной токсичности, канцерогенности, мутагенности, тератогенности и негативных эффектов на репродуктивные функции организма.

СРОК ПОДДЕРЖКИ РАНЫ

Исследования демонстрируют следующую потерю прочности в узле в процентах по USP и EP, в зависимости от диаметра нити. Примерно 80% прочности сохраняются в первую неделю, 75% в течение второй недели и 65% через три недели после имплантации.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Окись этилена.

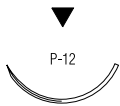
РАССАСЫВАНИЕ

Абсорбция начинается с потери прочности без существенной потери массы. Исследования на животных показывают, что полное рассасывание заканчивается через 6 месяцев. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

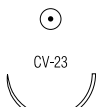
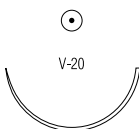
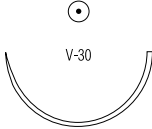
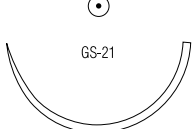
V-LOC™ 180

РАССАСЫВАЮЩЕЕСЯ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УШИВАНИЯ РАН

Косметическая обратно-режущая / Cosmetic Reverse Cutting

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
3/8 круга 19 мм 	3-0	2	30	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	VLOCL0014
	3-0	2	60	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	VLOCL0034
	3-0	2	15	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	VLOCL0004
	3-0	2	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	VLOCL0024
3/8 круга 24 мм 	3-0	2	30	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	VLOCL0114
	3-0	2	60	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	VLOCL0134
	3-0	2	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	VLOCL0124

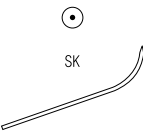
Колющая / Taper Point

Описание	Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 17 мм 	3-0	2	23	ЗЕЛЕНый	12	SURGALLOY™ VLOCL0844
	3-0	2	15	ЗЕЛЕНый	12	VLOCL0804
1/2 круга 26 мм 	3-0	3	30	ЗЕЛЕНый	12	VLOCL0615
	3-0	2	23	ЗЕЛЕНый	12	SURGALLOY™ VLOCL0644
	3-0	2	30	ЗЕЛЕНый	12	SURGALLOY™ VLOCL0614
	3-0	2	15	ЗЕЛЕНый	12	SURGALLOY™ VLOCL0604
1/2 круга 30 мм 	3-0	2	23	ЗЕЛЕНый	12	VLOCL1544
1/2 круга 37 мм 	0	3.5	45	ЗЕЛЕНый	12	VLOCL0326
	0	3.5	60	ЗЕЛЕНый	12	VLOCL0336
	0	3.5	30	ЗЕЛЕНый	12	VLOCL0316
	2-0	3	45	ЗЕЛЕНый	12	VLOCL0325
	2-0	3	30	ЗЕЛЕНый	12	VLOCL0315
1/2 круга 48 мм 	0	3.5	45	ЗЕЛЕНый	12	VLOCL0426
	0	3.5	60	ЗЕЛЕНый	12	VLOCL0436

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOFT™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И EP ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

V-LOC™ 180

РАССАСЫВАЮЩЕЕСЯ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УШИВАНИЯ РАН

Колющая / Taper Point							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
Лыжа 23 мм		3-0	2	23	ЗЕЛЕНый	12	VLOCL2744

V-LOC™ PBT

НЕРАССАСЫВАЮЩЕЕСЯ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УШИВАНИЯ РАН

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

V-Loc™ PBT – нерассасывающееся устройство для закрытия ран, представляющее собой нерассасывающуюся нить с насечками, соединенную с хирургической иглой с одной стороны, и имеющую петлю с другой. Насечки и петля созданы для возможности соединять ткани без необходимости завязывания узлов. V-Loc™ PBT изготовлен из полибутэстера – кополимера бутилена терефталата и политетраметилена-гликолевого эфира. V-Loc™ PBT выпускается окрашенным в синий цвет. Устройство стерильно упаковано, инертно, не содержит антигенных структур.

ПОКАЗАНИЯ

V-Loc™ PBT предназначен для сопоставления мягких тканей, когда необходима их перманентная поддержка. Безопасность и эффективность V-Loc™ PBT не установлена при ушивании фасциальных дефектов (брюшная стенка, грудная клетка, фасциальные дефекты конечностей), межкишечных и сосудистых анастомозах, в нейрохирургии, офтальмологии и микрохирургии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Исследования на животных показали, что V-Loc™ PBT вызывает лишь минимальную реакцию тканей, которая связана с имплантацией инородного тела в зависимости от окружающих тканей. Эксперименты на животных убедительно доказали отсутствие антигенной активности, системной токсичности, канцерогенности, мутагенности, тератогенности и негативных эффектов на репродуктивные функции организма.

СРОК ПОДДЕРЖКИ РАНЫ

Постоянная поддержка.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

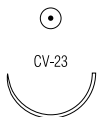
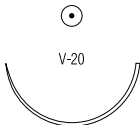
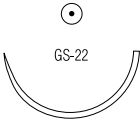
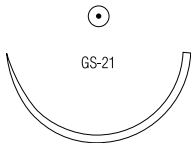
Гамма излучение.

РАССАСЫВАНИЕ

Не рассасывается.
Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

V-LOC™ PBT

НЕРАССАСЫВАЮЩЕЕСЯ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УШИВАНИЯ РАН

Колющая / Taper Point							
Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 17 мм		3-0	2	30	СИНИЙ	12	SURGALLOY™ VLOCN0814
1/2 круга 26 мм		2-0	3	30	СИНИЙ	12	VLOCN0615
		3-0	2	23	СИНИЙ	12	VLOCN0644
1/2 круга 27 мм		0	3.5	45	СИНИЙ	12	VLOCN1126
1/2 круга 37 мм		1	4	45	СИНИЙ	12	VLOCN0327
		0	3.5	45	СИНИЙ	12	VLOCN0326
		2-0	3	45	СИНИЙ	12	VLOCN0325

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOFT™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И ЕР ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.
2-CL-852	 Polysorb™	39	8886195161	 Surgilon™	94	8886287956	 TiCron™ / Surgidac™	81
8886172741	 Monosof™ / Dermalon™	85	8886196441	 Surgilon™	94	8886288041	 TiCron™ / Surgidac™	81
8886172751	 Monosof™ / Dermalon™	85	8886196451	 Surgilon™	94	8886288051	 TiCron™ / Surgidac™	81
8886174111	 Monosof™ / Dermalon™	84	8886196461	 Surgilon™	94	8886291451	 TiCron™ / Surgidac™	78
8886174121	 Monosof™ / Dermalon™	84	8886197171	 Surgilon™	94	8886294753	 TiCron™ / Surgidac™	75
8886174231	 Monosof™ / Dermalon™	87	8886198241	 Surgilon™	92	8886298156	 TiCron™ / Surgidac™	78
8886174241	 Monosof™ / Dermalon™	87	8886198251	 Surgilon™	92	8886300172	 TiCron™ / Surgidac™	72
8886174441	 Monosof™ / Dermalon™	84	8886198551	 Surgilon™	93	8886300262	 TiCron™ / Surgidac™	72
8886174451	 Monosof™ / Dermalon™	85	8886199531	 Surgilon™	94	8886300332	 TiCron™ / Surgidac™	72
8886175041	 Monosof™ / Dermalon™	85	8886199541	 Surgilon™	94	8886300342	 TiCron™ / Surgidac™	72
8886175621	 Monosof™ / Dermalon™	84	8886201151	 Surgilon™	94	8886300352	 TiCron™ / Surgidac™	72
8886175631	 Monosof™ / Dermalon™	84	8886222269	 STEEL	102	8886300821	 TiCron™ / Surgidac™	72
8886175641	 Monosof™ / Dermalon™	84	8886222449	 STEEL	102	8886300851	 TiCron™ / Surgidac™	72
8886175651	 Monosof™ / Dermalon™	84	8886222469	 STEEL	102	8886301261	 TiCron™ / Surgidac™	73
8886175731	 Monosof™ / Dermalon™	84	8886222489	 STEEL	102	8886301751	 TiCron™ / Surgidac™	80
8886175741	 Monosof™ / Dermalon™	84	8886222669	 STEEL	102	8886301761	 TiCron™ / Surgidac™	80
8886179941	 Monosof™ / Dermalon™	84	8886234553	 STEEL	103	8886302351	 TiCron™ / Surgidac™	73
8886179951	 Monosof™ / Dermalon™	84	8886239249	 STEEL	103	8886302361	 TiCron™ / Surgidac™	73
8886188351	 Surgilon™	93	8886239269	 STEEL	103	8886302371	 TiCron™ / Surgidac™	73
8886188361	 Surgilon™	93	8886239369	 STEEL	103	8886302671	 TiCron™ / Surgidac™	74
8886188371	 Surgilon™	93	8886239389	 STEEL	103	8886302681	 TiCron™ / Surgidac™	74
8886189951	 Surgilon™	92	8886239689	 STEEL	103	8886302779	 TiCron™ / Surgidac™	74
8886190261	 Surgilon™	92	8886240763	 STEEL	102	8886302871	 TiCron™ / Surgidac™	74
8886190642	 Surgilon™	92	8886240883	 STEEL	102	8886304631	 TiCron™ / Surgidac™	72
8886190652	 Surgilon™	92	8886241089	 STEEL	102	8886304731	 TiCron™ / Surgidac™	72
8886191483	 Surgilon™	92	8886241289	 STEEL	102	8886304741	 TiCron™ / Surgidac™	72
8886191571	 Surgilon™	93	8886241383	 STEEL	102	8886304851	 TiCron™ / Surgidac™	72
8886191641	 Surgilon™	92	8886241489	 STEEL	103	8886305041	 TiCron™ / Surgidac™	72
8886191761	 Surgilon™	92	8886242009	 STEEL	102	8886305051	 TiCron™ / Surgidac™	72
8886191771	 Surgilon™	92	8886242083	 STEEL	102	8886305061	 TiCron™ / Surgidac™	72
8886191782	 Surgilon™	92	8886242489	 STEEL	102	8886305256	 TiCron™ / Surgidac™	80
8886191831	 Surgilon™	92	8886258643	 Flexon™	106	8886305451	 TiCron™ / Surgidac™	73
8886191841	 Surgilon™	92	8886259243	 Flexon™	106	8886305461	 TiCron™ / Surgidac™	73
8886191851	 Surgilon™	92	8886259763	 Flexon™	106	8886305471	 TiCron™ / Surgidac™	73
8886191931	 Surgilon™	92	8886261553	 Flexon™	106	8886305481	 TiCron™ / Surgidac™	73
8886191941	 Surgilon™	92	8886261753	 Flexon™	106	8886305541	 TiCron™ / Surgidac™	72
8886191951	 Surgilon™	92	8886262353	 Flexon™	106	8886305689	 TiCron™ / Surgidac™	73
8886191961	 Surgilon™	92	8886262741	 TiCron™ / Surgidac™	76	8886305953	 TiCron™ / Surgidac™	75
8886191971	 Surgilon™	92	8886262751	 TiCron™ / Surgidac™	76	8886306241	 TiCron™ / Surgidac™	74
8886192062	 Surgilon™	92	8886263151	 TiCron™ / Surgidac™	80	8886306251	 TiCron™ / Surgidac™	74
8886192072	 Surgilon™	92	8886264051	 TiCron™ / Surgidac™	76	8886306561	 TiCron™ / Surgidac™	72
8886192093	 Surgilon™	92	8886265856	 TiCron™ / Surgidac™	80	8886307051	 TiCron™ / Surgidac™	72
8886192271	 Surgilon™	93	8886277521	 TiCron™ / Surgidac™	76	8886308251	 TiCron™ / Surgidac™	79
8886193251	 Surgilon™	93	8886277531	 TiCron™ / Surgidac™	76	8886308261	 TiCron™ / Surgidac™	79
8886193331	 Surgilon™	92	8886277541	 TiCron™ / Surgidac™	76	8886308356	 TiCron™ / Surgidac™	77
8886193453	 Surgilon™	92	8886280121	 TiCron™ / Surgidac™	76	8886308446	 TiCron™ / Surgidac™	77
8886193541	 Surgilon™	92	8886280851	 TiCron™ / Surgidac™	81	8886308656	 TiCron™ / Surgidac™	77
8886193551	 Surgilon™	92	8886283951	 TiCron™ / Surgidac™	77	8886308731	 TiCron™ / Surgidac™	77
8886195141	 Surgilon™	94	8886286234	 TiCron™ / Surgidac™	75	8886308741	 TiCron™ / Surgidac™	77
8886195151	 Surgilon™	94	8886287756	 TiCron™ / Surgidac™	81	8886308751	 TiCron™ / Surgidac™	77

ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.
8886308841	Ti-Cron™ / Surgidac™	81	8886322751	Ti-Cron™ / Surgidac™	77	8886339581	Ti-Cron™ / Surgidac™	73
8886308851	Ti-Cron™ / Surgidac™	81	8886322931	Ti-Cron™ / Surgidac™	76	8886400241	Novafil™	66
8886309051	Ti-Cron™ / Surgidac™	79	8886322941	Ti-Cron™ / Surgidac™	76	8886402721	Novafil™	67
8886309061	Ti-Cron™ / Surgidac™	79	8886323056	Ti-Cron™ / Surgidac™	76	8886440023	Novafil™	67
8886309071	Ti-Cron™ / Surgidac™	79	8886323351	Ti-Cron™ / Surgidac™	80	8886440123	Novafil™	67
8886309156	Ti-Cron™ / Surgidac™	77	8886323556	Ti-Cron™ / Surgidac™	81	8886440133	Novafil™	67
8886309351	Ti-Cron™ / Surgidac™	78	8886324931	Ti-Cron™ / Surgidac™	77	8886440233	Novafil™	67
8886309361	Ti-Cron™ / Surgidac™	78	8886325631	Ti-Cron™ / Surgidac™	78	8886440243	Novafil™	67
8886309761	Ti-Cron™ / Surgidac™	80	8886325641	Ti-Cron™ / Surgidac™	78	8886440343	Novafil™	67
8886309771	Ti-Cron™ / Surgidac™	80	8886325651	Ti-Cron™ / Surgidac™	78	8886441003	Novafil™	67
8886310371	Ti-Cron™ / Surgidac™	80	8886325661	Ti-Cron™ / Surgidac™	78	8886441013	Novafil™	67
8886310731	Ti-Cron™ / Surgidac™	80	8886325762	Ti-Cron™ / Surgidac™	78	8886441023	Novafil™	67
8886311179	Ti-Cron™ / Surgidac™	79	8886326742	Ti-Cron™ / Surgidac™	78	8886441853	Novafil™	67
8886311371	Ti-Cron™ / Surgidac™	79	8886326956	Ti-Cron™ / Surgidac™	77	8886441913	Novafil™	66
8886311381	Ti-Cron™ / Surgidac™	79	8886327121	Ti-Cron™ / Surgidac™	77	8886441923	Novafil™	66
8886312551	Ti-Cron™ / Surgidac™	81	8886327131	Ti-Cron™ / Surgidac™	77	8886441933	Novafil™	66
8886312882	Ti-Cron™ / Surgidac™	73	8886327141	Ti-Cron™ / Surgidac™	77	8886442023	Novafil™	66
8886313921	Ti-Cron™ / Surgidac™	76	8886327461	Ti-Cron™ / Surgidac™	79	8886442033	Novafil™	66
8886315409	Ti-Cron™ / Surgidac™	73	8886327756	Ti-Cron™ / Surgidac™	77	8886442043	Novafil™	66
8886315581	Ti-Cron™ / Surgidac™	74	8886328011	Ti-Cron™ / Surgidac™	76	8886442153	Novafil™	66
8886315751	Ti-Cron™ / Surgidac™	81	8886328021	Ti-Cron™ / Surgidac™	76	8886442233	Novafil™	66
8886315931	Ti-Cron™ / Surgidac™	81	8886328031	Ti-Cron™ / Surgidac™	76	8886442243	Novafil™	66
8886315941	Ti-Cron™ / Surgidac™	81	8886328041	Ti-Cron™ / Surgidac™	76	8886442253	Novafil™	66
8886315951	Ti-Cron™ / Surgidac™	81	8886329541	Ti-Cron™ / Surgidac™	77	8886442441	Novafil™	66
8886316031	Ti-Cron™ / Surgidac™	81	8886329721	Ti-Cron™ / Surgidac™	76	8886442451	Novafil™	66
8886316041	Ti-Cron™ / Surgidac™	81	8886330656	Ti-Cron™ / Surgidac™	78	8886442461	Novafil™	66
8886316051	Ti-Cron™ / Surgidac™	81	8886330951	Ti-Cron™ / Surgidac™	73	8886442651	Novafil™	66
8886316351	Ti-Cron™ / Surgidac™	74	8886330971	Ti-Cron™ / Surgidac™	73	8886443671	Novafil™	66
8886316371	Ti-Cron™ / Surgidac™	74	8886331431	Ti-Cron™ / Surgidac™	76	8886445041	Novafil™	68
8886318241	Ti-Cron™ / Surgidac™	80	8886332356	Ti-Cron™ / Surgidac™	77	8886445241	Novafil™	68
8886318251	Ti-Cron™ / Surgidac™	80	8886332456	Ti-Cron™ / Surgidac™	78	8886445251	Novafil™	68
8886318531	Ti-Cron™ / Surgidac™	78	8886333651	Ti-Cron™ / Surgidac™	78	8886445261	Novafil™	68
8886318541	Ti-Cron™ / Surgidac™	78	8886335656	Ti-Cron™ / Surgidac™	78	8886445561	Novafil™	69
8886318551	Ti-Cron™ / Surgidac™	78	8886336556	Ti-Cron™ / Surgidac™	80	8886445571	Novafil™	69
8886318561	Ti-Cron™ / Surgidac™	78	8886336931	Ti-Cron™ / Surgidac™	77	8886445951	Novafil™	68
8886318571	Ti-Cron™ / Surgidac™	78	8886336941	Ti-Cron™ / Surgidac™	77	8886446371	Novafil™	69
8886318621	Ti-Cron™ / Surgidac™	77	8886336951	Ti-Cron™ / Surgidac™	77	8886449041	Novafil™	66
8886318631	Ti-Cron™ / Surgidac™	77	8886337282	Ti-Cron™ / Surgidac™	79	8886449051	Novafil™	66
8886318641	Ti-Cron™ / Surgidac™	77	8886337681	Ti-Cron™ / Surgidac™	79	8886453863	Novafil™	69
8886318651	Ti-Cron™ / Surgidac™	77	8886338042	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	8886455441	Novafil™	66
8886320451	Ti-Cron™ / Surgidac™	81	8886338052	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	8886458243	Novafil™	67
8886320541	Ti-Cron™ / Surgidac™	79	8886338062	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	8886470301V	Vascufil™	62
8886320551	Ti-Cron™ / Surgidac™	79	8886338072	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	8886470311V	Vascufil™	62
8886320561	Ti-Cron™ / Surgidac™	79	8886338082	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	8886470401V	Vascufil™	62
8886321856	Ti-Cron™ / Surgidac™	81	8886338109	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	8886470411V	Vascufil™	62
8886321956	Ti-Cron™ / Surgidac™	81	8886338189	Ti-Cron™ / Surgidac™	72	8886470501V	Vascufil™	62
8886322156	Ti-Cron™ / Surgidac™	81	8886338556	Ti-Cron™ / Surgidac™	77	8886470511V	Vascufil™	62
8886322621	Ti-Cron™ / Surgidac™	77	8886339351	Ti-Cron™ / Surgidac™	79	8886470911V	Vascufil™	62
8886322631	Ti-Cron™ / Surgidac™	77	8886339561	Ti-Cron™ / Surgidac™	73	8886471011V	Vascufil™	62
8886322741	Ti-Cron™ / Surgidac™	77	8886339571	Ti-Cron™ / Surgidac™	73	8886471021V	Vascufil™	62

ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.
8886471121V	Vascufil™	62	8886624561	Maxon™	17	8886867701	Ti-Cron™ / Surgidac™	82
8886471411V	Vascufil™	63	8886624961	Maxon™	17	8886867801	Ti-Cron™ / Surgidac™	82
8886471631V	Vascufil™	62	8886625741	Maxon™	17	8886867901	Ti-Cron™ / Surgidac™	82
8886471921V	Vascufil™	62	8886625751	Maxon™	17	8886868201	Ti-Cron™ / Surgidac™	82
8886472221V	Vascufil™	62	8886625761	Maxon™	17	C-214	Caprosyn™	22
8886473051V	Vascufil™	63	8886626141	Maxon™	17	CC-1945-G	Caprosyn™	25
8886473131V	Vascufil™	63	8886626151	Maxon™	17	CC-543	Caprosyn™	22
8886473141V	Vascufil™	63	8886626161	Maxon™	17	CC-558	Caprosyn™	24
8886473151V	Vascufil™	63	8886626751	Maxon™	18	CC-658	Caprosyn™	24
8886473411V	Vascufil™	63	8886626771	Maxon™	18	CC-801	Caprosyn™	24
8886473421V	Vascufil™	63	8886626961	Maxon™	18	CC-802	Caprosyn™	24
8886473921V	Vascufil™	62	8886627761	Maxon™	20	CC-803	Caprosyn™	24
8886473931V	Vascufil™	62	8886628561	Maxon™	18	CC-810	Caprosyn™	24
8886474111V	Vascufil™	62	8886628571	Maxon™	18	CC-811	Caprosyn™	24
8886474121V	Vascufil™	62	8886628751	Maxon™	18	CC-812	Caprosyn™	24
8886474215V	Vascufil™	62	8886628761	Maxon™	18	CC-813	Caprosyn™	24
8886475031V	Vascufil™	63	8886628771	Maxon™	18	CC-830	Caprosyn™	24
8886475041V	Vascufil™	63	8886629571	Maxon™	20	CC-844	Caprosyn™	24
8886475051V	Vascufil™	63	8886630761	Maxon™	18	CC-845	Caprosyn™	24
8886475611V	Vascufil™	62	8886630771	Maxon™	18	CC-883	Caprosyn™	24
8886479401V	Vascufil™	63	8886631972	Maxon™	18	CC-884	Caprosyn™	24
8886603641	Maxon™	17	8886639053	Maxon™	15	CC-885	Caprosyn™	24
8886605731	Maxon™	16	8886640451	Maxon™	19	CC-904	Caprosyn™	25
8886611831	Maxon™	14	8886641971	Maxon™	19	CC-905	Caprosyn™	25
8886612411	Maxon™	16	8886645661	Maxon™	19	CC-913	Caprosyn™	24
8886612421	Maxon™	16	8886646221	Maxon™	16	CC-914	Caprosyn™	24
8886612701	Maxon™	16	8886646231	Maxon™	16	CC-915	Caprosyn™	24
8886612711	Maxon™	16	8886653211	Maxon™	15	CC-923	Caprosyn™	24
8886613431	Maxon™	16	8886653221	Maxon™	15	CC-924	Caprosyn™	24
8886613901	Maxon™	16	8886660821	Maxon™	14	CC-925	Caprosyn™	24
8886614501	Maxon™	16	8886660831	Maxon™	14	CC-983	Caprosyn™	22
8886614811	Maxon™	16	8886660841	Maxon™	14	CD-3113-K	Ti-Cron™ / Surgidac™	75
8886614921	Maxon™	16	8886661231	Maxon™	14	CD-3123-K	Ti-Cron™ / Surgidac™	75
8886620721	Maxon™	16	8886661831	Maxon™	14	CL=331	Polysorb™	35
8886620731	Maxon™	16	8886661841	Maxon™	14	CL-030	Polysorb™	42
8886620741	Maxon™	16	8886661851	Maxon™	14	CL-047	Polysorb™	42
8886621311	Maxon™	16	8886662801	Maxon™	15	CL-055	Polysorb™	42
8886621321	Maxon™	16	8886663931	Maxon™	14	CL-10-MG	Polysorb™	36
8886621721	Maxon™	17	8886663941	Maxon™	14	CL-11-MG	Polysorb™	36
8886621731	Maxon™	17	8886664141	Maxon™	14	CL-201-M	Polysorb™	36
8886621741	Maxon™	17	8886664151	Maxon™	14	CL-21-MG	Polysorb™	37
8886622131	Maxon™	17	8886674441	Maxon™	14	CL-232	Polysorb™	35
8886622943	Maxon™	17	8886674451	Maxon™	14	CL-239	Polysorb™	36
8886623331	Maxon™	17	8886675551	Maxon™	14	CL-270	Polysorb™	40
8886623341	Maxon™	17	8886675561	Maxon™	14	CL-271	Polysorb™	40
8886623351	Maxon™	17	8886675571	Maxon™	14	CL-31-MG	Polysorb™	37
8886623531	Maxon™	17	8886676971	Maxon™	14	CL-330	Polysorb™	35
8886623541	Maxon™	17	8886690831	Maxon™	14	CL-457	Polysorb™	33
8886623741	Maxon™	19	8886690841	Maxon™	14	CL-460	Polysorb™	34
8886624551	Maxon™	17	8886867501	Ti-Cron™ / Surgidac™	82	CL-461	Polysorb™	34

ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.
CL-510	 Polysorb™	40	CL-840	 Polysorb™	41	CL-946	 Polysorb™	40
CL-511	 Polysorb™	40	CL-841	 Polysorb™	41	CL-948	 Polysorb™	39
CL-513	 Polysorb™	40	CL-842	 Polysorb™	36	CL-949	 Polysorb™	39
CL-516	 Polysorb™	40	CL-844	 Polysorb™	36	CL-950	 Polysorb™	39
CL-517	 Polysorb™	40	CL-855	 Polysorb™	37	CL-951	 Polysorb™	39
CL-528	 Polysorb™	30	CL-862	 Polysorb™	37	CL-953	 Polysorb™	36
CL-533	 Polysorb™	31	CL-863	 Polysorb™	37	CL-954	 Polysorb™	36
CL-534	 Polysorb™	31	CL-864	 Polysorb™	37	CL-955	 Polysorb™	36
CL-543	 Polysorb™	31	CL-865	 Polysorb™	37	CL-957	 Polysorb™	39
CL-544	 Polysorb™	31	CL-866	 Polysorb™	37	CL-964	 Polysorb™	37
CL-568	 Polysorb™	31	CL-867	 Polysorb™	30	CL-968	 Polysorb™	37
CL-569	 Polysorb™	31	CL-868	 Polysorb™	30	CL-971	 Polysorb™	36
CL-5-M	 Polysorb™	36	CL-870	 Polysorb™	30	CL-974	 Polysorb™	37
CL-602	 Polysorb™	40	CL-871	 Polysorb™	35	CL-992	 Polysorb™	30
CL-603	 Polysorb™	40	CL-882	 Polysorb™	35	CLT-259	 Polysorb™	39
CL-622-M	 Polysorb™	37	CL-883	 Polysorb™	35	CLT-952	 Polysorb™	39
CL-63	 Polysorb™	37	CL-885	 Polysorb™	35	CLT-954	 Polysorb™	39
CL-633-M	 Polysorb™	37	CL-892	 Polysorb™	34	CM-126	 Biosyn™	8
CL-64-M	 Polysorb™	37	CL-893	 Polysorb™	34	CM-208	 Biosyn™	8
CL-665-M	 Polysorb™	37	CL-894	 Polysorb™	34	CM-222	 Biosyn™	7
CL-673-G	 Polysorb™	38	CL-903	 Polysorb™	37	CM-528	 Biosyn™	6
CL-6-M	 Polysorb™	36	CL-904	 Polysorb™	37	CM-544	 Biosyn™	6
CL-739	 Polysorb™	41	CL-905	 Polysorb™	37	CM-740-L	 Biosyn™	11
CL-740-L	 Polysorb™	41	CL-906	 Polysorb™	37	CM-767-L	 Biosyn™	10
CL-769	 Polysorb™	30	CL-911	 Polysorb™	37	CM-776-L	 Biosyn™	10
CL-779	 Polysorb™	37	CL-913	 Polysorb™	37	CM-780-L	 Biosyn™	11
CL-801	 Polysorb™	37	CL-914	 Polysorb™	37	CM-790-L	 Biosyn™	10
CL-802	 Polysorb™	37	CL-915	 Polysorb™	37	CM-810	 Biosyn™	10
CL-803	 Polysorb™	37	CL-916	 Polysorb™	31	CM-811	 Biosyn™	10
CL-804	 Polysorb™	31	CL-917	 Polysorb™	31	CM-812	 Biosyn™	10
CL-805	 Polysorb™	31	CL-918	 Polysorb™	31	CM-813	 Biosyn™	10
CL-809	 Polysorb™	36	CL-919	 Polysorb™	31	CM-816	 Biosyn™	6
CL-810	 Polysorb™	36	CL-922	 Polysorb™	36	CM-831	 Biosyn™	9
CL-811	 Polysorb™	36	CL-923	 Polysorb™	36	CM-832	 Biosyn™	9
CL-812	 Polysorb™	36	CL-924	 Polysorb™	36	CM-844	 Biosyn™	10
CL-813	 Polysorb™	36	CL-925	 Polysorb™	36	CM-845	 Biosyn™	10
CL-814	 Polysorb™	36	CL-926	 Polysorb™	36	CM-879	 Biosyn™	6
CL-815	 Polysorb™	31	CL-927	 Polysorb™	31	CM-882	 Biosyn™	9
CL-816	 Polysorb™	31	CL-928	 Polysorb™	31	CM-883	 Biosyn™	9
CL-817	 Polysorb™	31	CL-929	 Polysorb™	31	CM-884	 Biosyn™	9
CL-818	 Polysorb™	31	CL-931	 Polysorb™	36	CM-904	 Biosyn™	10
CL-823	 Polysorb™	29	CL-932	 Polysorb™	36	CM-905	 Biosyn™	10
CL-824	 Polysorb™	37	CL-933	 Polysorb™	31	CM-914	 Biosyn™	10
CL-824-L	 Polysorb™	38	CL-936	 Polysorb™	31	CM-923	 Biosyn™	10
CL-825	 Polysorb™	37	CL-937	 Polysorb™	31	CM-924	 Biosyn™	10
CL-833	 Polysorb™	31	CL-941	 Polysorb™	41	CM-925	 Biosyn™	10
CL-835-L	 Polysorb™	38	CL-942	 Polysorb™	40	CM-953	 Biosyn™	10
CL-837	 Polysorb™	40	CL-943	 Polysorb™	40	CM-954	 Biosyn™	10
CL-838	 Polysorb™	40	CL-944	 Polysorb™	40	CM-966	 Biosyn™	10
CL-839	 Polysorb™	40	CL-945	 Polysorb™	40	CN-723	 Monoso™ / Dermalon™	88

ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.
CN-791	Monoso TM / Dermalon TM	87	CV-9007G	Velosorb TM	44	GL-881	Polysorb TM	33
CN-793	Monoso TM / Dermalon TM	87	CV-917	Velosorb TM	47	GL-884	Polysorb TM	34
CN-819	Monoso TM / Dermalon TM	85	CV-918	Velosorb TM	47	GL-885	Polysorb TM	34
CN-822	Monoso TM / Dermalon TM	85	CV-919	Velosorb TM	47	GL-889	Polysorb TM	33
CN-825-L	Monoso TM / Dermalon TM	88	CV-945	Velosorb TM	46	GL-890	Polysorb TM	33
CN-830-L	Monoso TM / Dermalon TM	88	CV-946	Velosorb TM	46	GLS-121	Polysorb TM	35
CP-411	Surgipro TM II / Surgipro TM	55	CV-947	Velosorb TM	46	GLS-122	Polysorb TM	35
CP-412	Surgipro TM II / Surgipro TM	55	CV-9590	Velosorb TM	47	GLS-123	Polysorb TM	35
CP-414	Surgipro TM II / Surgipro TM	56	CV-9591	Velosorb TM	47	GLS-323	Polysorb TM	35
CP-415	Surgipro TM II / Surgipro TM	56	CV-9936G	Velosorb TM	45	GLT-69-MG	Polysorb TM	39
CP-423	Surgipro TM II / Surgipro TM	56	CV-9975-G	Velosorb TM	46	GM-121	Biosyn TM	9
CP-424	Surgipro TM II / Surgipro TM	56	EL-415	Polysorb TM	38	GM-122	Biosyn TM	9
CP-425	Surgipro TM II / Surgipro TM	56	EL-450	Polysorb TM	38	GM-123	Biosyn TM	9
CP-433	Surgipro TM II / Surgipro TM	56	GC-121	Caprosyn TM	24	GM-125	Biosyn TM	9
CP-434	Surgipro TM II / Surgipro TM	56	GC-122	Caprosyn TM	24	GM-181	Biosyn TM	9
CP-435	Surgipro TM II / Surgipro TM	56	GC-123	Caprosyn TM	24	GM-183	Biosyn TM	9
CP-443	Surgipro TM II / Surgipro TM	50	GC-124	Caprosyn TM	24	GM-222	Biosyn TM	9
CP-455	Surgipro TM II / Surgipro TM	56	GC-321	Caprosyn TM	24	GM-223	Biosyn TM	9
CP-535	Surgipro TM II / Surgipro TM	56	GC-322	Caprosyn TM	24	GM-281	Biosyn TM	9
CP-824	Surgipro TM II / Surgipro TM	56	GC-323	Caprosyn TM	24	GM-282	Biosyn TM	9
CP-824-L	Surgipro TM II / Surgipro TM	57	GL-120	Polysorb TM	35	GM-291	Biosyn TM	9
CP-825	Surgipro TM II / Surgipro TM	56	GL-121	Polysorb TM	35	GM-322	Biosyn TM	9
CP-834-L	Surgipro TM II / Surgipro TM	57	GL-122	Polysorb TM	35	GM-323	Biosyn TM	9
CP-844	Surgipro TM II / Surgipro TM	59	GL-123	Polysorb TM	35	GM-324	Biosyn TM	9
CS-423	Sofsilk TM	99	GL-124	Polysorb TM	35	GM-326	Biosyn TM	9
CS-424	Sofsilk TM	99	GL-125	Polysorb TM	35	GM-327	Biosyn TM	9
CS-575	Sofsilk TM	99	GL-126	Polysorb TM	36	GM-332	Biosyn TM	9
CS-791	Sofsilk TM	98	GL-127	Polysorb TM	36	GM-421	Biosyn TM	9
CS-792	Sofsilk TM	98	GL-128	Polysorb TM	36	GM-432	Biosyn TM	9
CS-793	Sofsilk TM	98	GL-129	Polysorb TM	36	GM-875	Biosyn TM	8
CV-1213	Velosorb TM	46	GL-181	Polysorb TM	34	GMM-341-L	Maxon TM	19
CV-1214	Velosorb TM	46	GL-182	Polysorb TM	34	GMM-343-L	Maxon TM	19
CV-2216	Velosorb TM	47	GL-183	Polysorb TM	34	GMM-344-L	Maxon TM	19
CV-2217	Velosorb TM	47	GL-191	Polysorb TM	34	GMM-496-L	Maxon TM	20
CV-2218	Velosorb TM	47	GL-192	Polysorb TM	34	GMM-497-L	Maxon TM	20
CV-3110	Velosorb TM	46	GL-222	Polysorb TM	35	GMM-563-L	Maxon TM	18
CV-318	Velosorb TM	46	GL-223	Polysorb TM	35	GMM-573-L	Maxon TM	18
CV-319	Velosorb TM	46	GL-224	Polysorb TM	35	GMM-632-L	Maxon TM	18
CV-417-G	Velosorb TM	46	GL-225	Polysorb TM	35	GMM-634-L	Maxon TM	18
CV-418	Velosorb TM	46	GL-226	Polysorb TM	35	GMM-806-L	Maxon TM	20
CV-55	Velosorb TM	46	GL-282	Polysorb TM	34	GMM-807-L	Maxon TM	20
CV-604	Velosorb TM	47	GL-302	Polysorb TM	33	GMM-873-L	Maxon TM	20
CV-605	Velosorb TM	47	GL-303	Polysorb TM	33	GMMT-90-L	Maxon TM	19
CV-7190	Velosorb TM	47	GL-321	Polysorb TM	35	GN-283	Monoso TM / Dermalon TM	88
CV-7191	Velosorb TM	47	GL-322	Polysorb TM	35	GP-282	Surgipro TM II / Surgipro TM	57
CV-8977	Velosorb TM	44	GL-323	Polysorb TM	35	GS-451	Sofsilk TM	99
CV-8978	Velosorb TM	44	GL-332	Polysorb TM	35	GS-452	Sofsilk TM	99
CV8-979	Velosorb TM	44	GL-522	Polysorb TM	33	GS-62-M	Sofsilk TM	99
CV-8980	Velosorb TM	44	GL-523	Polysorb TM	33	GS-822	Sofsilk TM	99
CV-9006G	Velosorb TM	44	GL-524	Polysorb TM	33	GS-823	Sofsilk TM	99

ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.
GS-824	 Sofsilik™	99	LL-225	 Polysorb™	29	SL-1625	 Polysorb™	32
GS-832	 Sofsilik™	99	LL-226	 Polysorb™	29	SL-1653	 Polysorb™	33
GS-833	 Sofsilik™	99	M-74	 Biosyn™	6	SL-1657	 Polysorb™	33
GS-834	 Sofsilik™	99	M-75	 Biosyn™	6	SL-1689	 Polysorb™	32
L-11	 Polysorb™	28	N-1603-G	 Monosof™ / Dermalon™	89	SL-432	 Polysorb™	34
L-111	 Polysorb™	28	N-2500	 Monosof™ / Dermalon™	89	SL-5621	 Polysorb™	32
L-112	 Polysorb™	28	N-2510	 Monosof™ / Dermalon™	89	SL-5626	 Polysorb™	32
L-113	 Polysorb™	28	N-2512	 Monosof™ / Dermalon™	89	SL-5627	 Polysorb™	32
L-114	 Polysorb™	28	N-2530	 Monosof™ / Dermalon™	89	SL-5628	 Polysorb™	32
L-115	 Polysorb™	28	N-2532	 Monosof™ / Dermalon™	89	SL-5628-G	 Polysorb™	32
L-116	 Polysorb™	28	N-2543	 Monosof™ / Dermalon™	89	SL-5633	 Polysorb™	32
L-12	 Polysorb™	28	N-2546	 Monosof™ / Dermalon™	89	SL-5636	 Polysorb™	32
L-13	 Polysorb™	28	N-2547	 Monosof™ / Dermalon™	89	SL-5637	 Polysorb™	32
L-14	 Polysorb™	28	N-2714-K	 Monosof™ / Dermalon™	87	SL-5638	 Polysorb™	32
L-15	 Polysorb™	28	N-2716-K	 Monosof™ / Dermalon™	88	SL-5640	 Polysorb™	32
L-1669-K	 Polysorb™	41	N-2760-K	 Monosof™ / Dermalon™	87	SL-5640-G	 Polysorb™	32
L-1742-K	 Polysorb™	41	N-2770-K	 Monosof™ / Dermalon™	87	SL-5641	 Polysorb™	32
L-1785-K	 Polysorb™	41	P-2756-K	 Surgipro™ II / Surgipro™	52	SL-5678	 Polysorb™	32
L-1787-K	 Polysorb™	42	S-1173	 Sofsilik™	96	SL-5679	 Polysorb™	32
L-1792-K	 Polysorb™	41	S-1734-K	 Sofsilik™	98	SL-5680	 Polysorb™	32
L-23	 Polysorb™	28	S-1789-K	 Sofsilik™	97	SL-5686	 Polysorb™	32
L-26	 Polysorb™	28	SBS-1883-G	 Surgilon™	93	SL-5687	 Polysorb™	32
L-27	 Polysorb™	28	SBS-1884-G	 Surgilon™	93	SL-5687-G	 Polysorb™	32
L-2748-K	 Polysorb™	42	SBS-1928-G	 Surgilon™	93	SL-5688	 Polysorb™	32
L-2752-K	 Polysorb™	41	SC-3625-G	 Caprosyn™	23	SL-5690	 Polysorb™	32
L-28	 Polysorb™	28	SC-3626-G	 Caprosyn™	23	SL-586	 Polysorb™	30
L-2800	 Polysorb™	38	SC-5587-G	 Caprosyn™	23	SL-587	 Polysorb™	30
L-3	 Polysorb™	28	SC-5590-G	 Caprosyn™	23	SL-607	 Polysorb™	29
L-33	 Polysorb™	28	SC-5616-G	 Caprosyn™	23	SL-608	 Polysorb™	29
L-36	 Polysorb™	28	SC-5617-G	 Caprosyn™	23	SL-609	 Polysorb™	30
L-38	 Polysorb™	28	SC-5618-G	 Caprosyn™	23	SL-611	 Polysorb™	30
L-39	 Polysorb™	28	SC-5637-G	 Caprosyn™	23	SL-612	 Polysorb™	30
L-40	 Polysorb™	28	SC-5638-G	 Caprosyn™	23	SL-613	 Polysorb™	30
L-403	 Polysorb™	28	SC-5679	 Caprosyn™	23	SL-622	 Polysorb™	30
L-404	 Polysorb™	28	SC-5686-G	 Caprosyn™	23	SL-630	 Polysorb™	29
L-405	 Polysorb™	28	SC-5688-G	 Caprosyn™	23	SL-632	 Polysorb™	30
L-41	 Polysorb™	28	SC-5689-G	 Caprosyn™	23	SL-634	 Polysorb™	29
L-42	 Polysorb™	28	SC-5690-G	 Caprosyn™	23	SL-635	 Polysorb™	29
L-73	 Polysorb™	28	SC-5779	 Caprosyn™	23	SL-636	 Polysorb™	29
L-76	 Polysorb™	28	SC-5780-G	 Caprosyn™	23	SL-637	 Polysorb™	29
LL-101	 Polysorb™	29	SC-586	 Caprosyn™	22	SL-642	 Polysorb™	31
LL-112	 Polysorb™	29	SC-587	 Caprosyn™	22	SL-643	 Polysorb™	31
LL-113	 Polysorb™	29	SC-643	 Caprosyn™	22	SL-653	 Polysorb™	31
LL-114	 Polysorb™	29	SC-644	 Caprosyn™	22	SL-690	 Polysorb™	29
LL-115	 Polysorb™	29	SC-690-G	 Caprosyn™	22	SL-691	 Polysorb™	29
LL-116	 Polysorb™	29	SC-691	 Caprosyn™	22	SL-692	 Polysorb™	29
LL-221	 Polysorb™	29	SC-692	 Caprosyn™	22	SL-693	 Polysorb™	29
LL-222	 Polysorb™	29	SC-693-G	 Caprosyn™	22	SL-694	 Polysorb™	29
LL-223	 Polysorb™	29	SCD-2864-G	 Ti Cron™ / Surgidac™	75	SL-696	 Polysorb™	30
LL-224	 Polysorb™	29	SL-1615	 Polysorb™	32	SL-712	 Polysorb™	30

ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.
SL-721	 Polysorb™	30	SN-648	 Monoso™ / Dermalon™	84	SP-5686	 Surgipro™ II / Surgipro™	51
SL-722	 Polysorb™	30	SN-649	 Monoso™ / Dermalon™	84	SP-5687	 Surgipro™ II / Surgipro™	51
SL-822	 Polysorb™	29	SN-653	 Monoso™ / Dermalon™	84	SP-5687-G	 Surgipro™ II / Surgipro™	51
SL-823	 Polysorb™	29	SN-658	 Monoso™ / Dermalon™	84	SP-5692-G	 Surgipro™ II / Surgipro™	51
SM-3625	 Biosyn™	7	SN-659	 Monoso™ / Dermalon™	84	SP-5695	 Surgipro™ II / Surgipro™	51
SM-431	 Biosyn™	8	SN-660	 Monoso™ / Dermalon™	84	SP-5697-G	 Surgipro™ II / Surgipro™	51
SM-432	 Biosyn™	8	SN-661	 Monoso™ / Dermalon™	84	SP-5698	 Surgipro™ II / Surgipro™	51
SM-5624	 Biosyn™	7	SN-661-G	 Monoso™ / Dermalon™	84	SP-5699	 Surgipro™ II / Surgipro™	51
SM-5627	 Biosyn™	7	SN-662	 Monoso™ / Dermalon™	84	SP-622	 Surgipro™ II / Surgipro™	50
SM-5628	 Biosyn™	7	SN-663	 Monoso™ / Dermalon™	84	SP-622-BC	 Surgipro™ II / Surgipro™	51
SM-5637	 Biosyn™	7	SN-663-G	 Monoso™ / Dermalon™	84	SP-623	 Surgipro™ II / Surgipro™	50
SM-5638	 Biosyn™	7	SN-664	 Monoso™ / Dermalon™	85	SP-623-BC	 Surgipro™ II / Surgipro™	51
SM-5678	 Biosyn™	7	SN-664-G	 Monoso™ / Dermalon™	85	SP-629	 Surgipro™ II / Surgipro™	50
SM-5679	 Biosyn™	7	SN-665	 Monoso™ / Dermalon™	84	SP-631	 Surgipro™ II / Surgipro™	50
SM-5679-G	 Biosyn™	7	SN-666	 Monoso™ / Dermalon™	84	SP-649	 Surgipro™ II / Surgipro™	50
SM-5687	 Biosyn™	7	SN-667	 Monoso™ / Dermalon™	84	SP-660	 Surgipro™ II / Surgipro™	50
SM-5688	 Biosyn™	7	SN-671	 Monoso™ / Dermalon™	85	SP-660-G	 Surgipro™ II / Surgipro™	50
SM-5690	 Biosyn™	7	SN-673	 Monoso™ / Dermalon™	85	SP-661	 Surgipro™ II / Surgipro™	50
SM-633	 Biosyn™	6	SN-674	 Monoso™ / Dermalon™	85	SP-661-G	 Surgipro™ II / Surgipro™	50
SM-643	 Biosyn™	7	SN-681	 Monoso™ / Dermalon™	85	SP-665	 Surgipro™ II / Surgipro™	50
SM-690	 Biosyn™	6	SN-688	 Monoso™ / Dermalon™	85	SP-665-G	 Surgipro™ II / Surgipro™	50
SM-691	 Biosyn™	6	SN-689	 Monoso™ / Dermalon™	85	SP-670	 Surgipro™ II / Surgipro™	50
SM-693	 Biosyn™	6	SN-694	 Monoso™ / Dermalon™	85	SP-675	 Surgipro™ II / Surgipro™	50
SM-822	 Biosyn™	6	SN-728	 Monoso™ / Dermalon™	86	SP-683	 Surgipro™ II / Surgipro™	50
SM-823	 Biosyn™	6	SN-747	 Monoso™ / Dermalon™	84	SP-683-G	 Surgipro™ II / Surgipro™	50
SMM-5043	 Maxon™	15	SN-758	 Monoso™ / Dermalon™	84	SP-684	 Surgipro™ II / Surgipro™	50
SMM-5044	 Maxon™	15	SN-762	 Monoso™ / Dermalon™	84	SP-684-G	 Surgipro™ II / Surgipro™	50
SMM-5431	 Maxon™	15	SN-763	 Monoso™ / Dermalon™	84	SP-685	 Surgipro™ II / Surgipro™	50
SMM-5516	 Maxon™	15	SN-764	 Monoso™ / Dermalon™	85	SP-689	 Surgipro™ II / Surgipro™	50
SMM-5526	 Maxon™	15	SN-771	 Monoso™ / Dermalon™	85	SP-690	 Surgipro™ II / Surgipro™	50
SMM-5536	 Maxon™	15	SN-775	 Monoso™ / Dermalon™	85	SP-868	 Surgipro™ II / Surgipro™	50
SN-3697	 Monoso™ / Dermalon™	86	SN-782	 Monoso™ / Dermalon™	85	SPB-1233-G	 Novafil™	67
SN-5663	 Monoso™ / Dermalon™	86	SN-788	 Monoso™ / Dermalon™	85	SPB-5143-G	 Novafil™	67
SN-5666	 Monoso™ / Dermalon™	86	SN-790	 Monoso™ / Dermalon™	85	SPB-5433-G	 Novafil™	68
SN-5667	 Monoso™ / Dermalon™	86	SN-871	 Monoso™ / Dermalon™	84	SPB-5633-G	 Novafil™	67
SN-5668	 Monoso™ / Dermalon™	86	SP-1606	 Surgipro™ II / Surgipro™	51	SPB-5843-G	 Novafil™	67
SN-5669	 Monoso™ / Dermalon™	86	SP-1634	 Surgipro™ II / Surgipro™	52	SS-523	 Sofsil™	97
SN-568	 Monoso™ / Dermalon™	87	SP-1635	 Surgipro™ II / Surgipro™	52	SS-5639	 Sofsil™	97
SN-5691	 Monoso™ / Dermalon™	86	SP-1644	 Surgipro™ II / Surgipro™	52	SS-5640	 Sofsil™	97
SN-5694	 Monoso™ / Dermalon™	86	SP-1693-G	 Surgipro™ II / Surgipro™	51	SS-623	 Sofsil™	97
SN-5696	 Monoso™ / Dermalon™	86	SP-1696	 Surgipro™ II / Surgipro™	51	SS-624	 Sofsil™	97
SN-5697	 Monoso™ / Dermalon™	86	SP-1696-G	 Surgipro™ II / Surgipro™	51	SS-629	 Sofsil™	96
SN-5698	 Monoso™ / Dermalon™	86	SP-1697	 Surgipro™ II / Surgipro™	51	SS-632	 Sofsil™	96
SN-5699	 Monoso™ / Dermalon™	86	SP-559-G	 Surgipro™ II / Surgipro™	50	SS-633	 Sofsil™	96
SN-615	 Monoso™ / Dermalon™	86	SP-5663	 Surgipro™ II / Surgipro™	51	SS-645	 Sofsil™	96
SN-616	 Monoso™ / Dermalon™	86	SP-5680-G	 Surgipro™ II / Surgipro™	51	SS-646	 Sofsil™	96
SN-628	 Monoso™ / Dermalon™	86	SP-5681	 Surgipro™ II / Surgipro™	51	SS-647	 Sofsil™	96
SN-630	 Monoso™ / Dermalon™	85	SP-5681-G	 Surgipro™ II / Surgipro™	51	SS-648	 Sofsil™	96
SN-641	 Monoso™ / Dermalon™	84	SP-5682	 Surgipro™ II / Surgipro™	51	SS-651	 Sofsil™	96
SN-644	 Monoso™ / Dermalon™	84	SP-5682-G	 Surgipro™ II / Surgipro™	51	SS-652	 Sofsil™	96

ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.
SS-654	 Sofsilik™	96	UL-204	 Polysorb™	34	VLOCL0436	 V-Loc™ 180	112
SS-656	 Sofsilik™	96	UL-205	 Polysorb™	34	VLOCL0604	 V-Loc™ 180	112
SS-673	 Sofsilik™	96	UL-214	 Polysorb™	34	VLOCL0614	 V-Loc™ 180	112
SS-675	 Sofsilik™	96	UL-215	 Polysorb™	34	VLOCL0615	 V-Loc™ 180	112
SS-678	 Sofsilik™	96	UL-245	 Polysorb™	38	VLOCL0644	 V-Loc™ 180	112
SS-679	 Sofsilik™	96	UL-246	 Polysorb™	38	VLOCL0804	 V-Loc™ 180	112
SS-680	 Sofsilik™	96	UL-876	 Polysorb™	38	VLOCL0844	 V-Loc™ 180	112
SS-681	 Sofsilik™	96	UL-877	 Polysorb™	38	VLOCL1544	 V-Loc™ 180	112
SS-682	 Sofsilik™	96	UL-878	 Polysorb™	38	VLOCL2744	 V-Loc™ 180	113
SS-683	 Sofsilik™	96	UL-879	 Polysorb™	38	VLOCM0003	 V-Loc™ 90	108
SS-684	 Sofsilik™	96	UM-201	 Biosyn™	8	VLOCM0004	 V-Loc™ 90	108
SS-685	 Sofsilik™	96	UM-202	 Biosyn™	8	VLOCM0013	 V-Loc™ 90	108
SS-689	 Sofsilik™	96	UM-203	 Biosyn™	8	VLOCM0014	 V-Loc™ 90	108
SS-694	 Sofsilik™	96	UM-204	 Biosyn™	8	VLOCM0023	 V-Loc™ 90	108
SS-695	 Sofsilik™	96	UM-213	 Biosyn™	8	VLOCM0024	 V-Loc™ 90	108
SS-723	 Sofsilik™	97	UM-214	 Biosyn™	8	VLOCM0033	 V-Loc™ 90	108
SS-745	 Sofsilik™	96	UM-215	 Biosyn™	8	VLOCM0034	 V-Loc™ 90	108
SS-785	 Sofsilik™	96	UM-243	 Biosyn™	11	VLOCM0114	 V-Loc™ 90	108
SV-2252	 Velosorb™	44	UM-245	 Biosyn™	11	VLOCM0124	 V-Loc™ 90	108
SV-2253	 Velosorb™	44	UM-345	 Biosyn™	11	VLOCM0134	 V-Loc™ 90	108
SV-2286	 Velosorb™	44	UM-403	 Biosyn™	8	VLOCM0135	 V-Loc™ 90	108
SV-2294	 Velosorb™	44	UM-877	 Biosyn™	11	VLOCM0305	 V-Loc™ 90	109
SV-2297	 Velosorb™	44	UM-878	 Biosyn™	11	VLOCM0345	 V-Loc™ 90	109
SV-2298	 Velosorb™	44	UM-879	 Biosyn™	11	VLOCM0604	 V-Loc™ 90	108
SV-425	 Velosorb™	45	UM-886	 Biosyn™	8	VLOCM0614	 V-Loc™ 90	108
SV-487-G	 Velosorb™	46	UM-977	 Biosyn™	11	VLOCM0625	 V-Loc™ 90	108
SV-488-G	 Velosorb™	46	UM-978	 Biosyn™	11	VLOCM0644	 V-Loc™ 90	108
SV-935	 Velosorb™	45	UM-986	 Biosyn™	8	VLOCM0804	 V-Loc™ 90	108
SV-9910-G	 Velosorb™	45	VCD20305FE	 Ti-Cron™ / Surgidac™	78	VLOCM1204	 V-Loc™ 90	108
SV-9913	 Velosorb™	45	VCD20305MFE	 Ti-Cron™ / Surgidac™	78	VLOCM1545	 V-Loc™ 90	109
SV-9915	 Velosorb™	45	VCD20316FE	 Ti-Cron™ / Surgidac™	77	VLOCM1704	 V-Loc™ 90	109
SV-9926	 Velosorb™	45	VCD20316MFE	 Ti-Cron™ / Surgidac™	77	VLOCM1744	 V-Loc™ 90	109
SV-9927	 Velosorb™	45	VCD20316MSE	 Ti-Cron™ / Surgidac™	77	VLOCM2105	 V-Loc™ 90	108
SV-9937-G	 Velosorb™	45	VCD2031MFE	 Ti-Cron™ / Surgidac™	81	VLOCM2145	 V-Loc™ 90	108
SV-9938-G	 Velosorb™	45	VCD2031MSE	 Ti-Cron™ / Surgidac™	81	VLOCN0325	 V-Loc™ PBT	116
SV-9940-G	 Velosorb™	44	VCD20331FE	 Ti-Cron™ / Surgidac™	77	VLOCN0326	 V-Loc™ PBT	116
SV-9941-G	 Velosorb™	44	VCD2036305FE	 Ti-Cron™ / Surgidac™	78	VLOCN0327	 V-Loc™ PBT	116
SV-9961-G	 Velosorb™	44	VLOCL0004	 V-Loc™ 180	112	VLOCN0615	 V-Loc™ PBT	116
UC-202	 Caprosyn™	23	VLOCL0014	 V-Loc™ 180	112	VLOCN0644	 V-Loc™ PBT	116
UC-203	 Caprosyn™	23	VLOCL0024	 V-Loc™ 180	112	VLOCN0814	 V-Loc™ PBT	116
UC-403	 Caprosyn™	23	VLOCL0034	 V-Loc™ 180	112	VLOCN1126	 V-Loc™ PBT	116
UC-404	 Caprosyn™	23	VLOCL0114	 V-Loc™ 180	112	VP-151	 Surgipro™ II / Surgipro™	55
UC-863	 Caprosyn™	24	VLOCL0124	 V-Loc™ 180	112	VP-205-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	54
UC-978	 Caprosyn™	25	VLOCL0134	 V-Loc™ 180	112	VP-331-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	54
UL-046	 Polysorb™	42	VLOCL0315	 V-Loc™ 180	112	VP-421-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	55
UL-101	 Polysorb™	34	VLOCL0316	 V-Loc™ 180	112	VP-510-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	55
UL-102	 Polysorb™	34	VLOCL0325	 V-Loc™ 180	112	VP-511-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	55
UL-201	 Polysorb™	34	VLOCL0326	 V-Loc™ 180	112	VP-520-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	55
UL-202	 Polysorb™	34	VLOCL0336	 V-Loc™ 180	112	VP-521-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	55
UL-203	 Polysorb™	34	VLOCL0426	 V-Loc™ 180	112	VP-522-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	55

ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ

КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.	КОД	МАТЕРИАЛ	СТР.
VP-523	 Surgipro™ II / Surgipro™	55	VP-746-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	52	VPF-557-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	54
VP-532-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	53	VP-747-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	57	VPF-702-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	52
VP-533	 Surgipro™ II / Surgipro™	53	VP-74-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	53	VPF-706-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	53
VP-542-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	55	VP-754-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	54	VPF-709-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	52
VP-543	 Surgipro™ II / Surgipro™	55	VP-755-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	54	VPF-711-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	54
VP-555-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	54	VP-757-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	54	VPF-713-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	52
VP-556-MX	 Surgipro™ II / Surgipro™	54	VP-75-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	53	VPF-735-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	57
VP-556-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	54	VP-760-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	55	VS-809	 Sofsilks™	98
VP-557-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	54	VP-761-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	55	VS-844	 Sofsilks™	99
VP-558-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	54	VP-762-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	55	VS-845	 Sofsilks™	99
VP-566-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	54	VP-76-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	53	VS-846	 Sofsilks™	99
VP-580-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	53	VP-771-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	55	VS-871	 Sofsilks™	99
VP-581-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	53	VP-776-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	53	VS-872	 Sofsilks™	99
VP-582-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	53	VP-813-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	53	VS-881	 Sofsilks™	98
VP-585-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	53	VP-831-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	55	VS-882	 Sofsilks™	98
VP-630-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	58	VP-832-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	55	VS-889	 Sofsilks™	98
VP-631-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	58	VP-833	 Surgipro™ II / Surgipro™	55	VS-890	 Sofsilks™	98
VP-660-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	54	VP-834	 Surgipro™ II / Surgipro™	55	XC-823	 Caprosyn™	25
VP-702-MX	 Surgipro™ II / Surgipro™	52	VP-841-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	53	XC-834	 Caprosyn™	25
VP-702-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	52	VP-842-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	56	XC-844	 Caprosyn™	25
VP-703-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	52	VP-843	 Surgipro™ II / Surgipro™	56	XC-845	 Caprosyn™	25
VP-705-MX	 Surgipro™ II / Surgipro™	53	VP-851-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	53	XM-822	 Biosyn™	8
VP-705-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	53	VP-853	 Surgipro™ II / Surgipro™	56	XM-823	 Biosyn™	8
VP-706-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	53	VP-870-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	54	XM-845	 Biosyn™	8
VP-708-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	58	VP-871-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	54	XNF-1964	 Novafil™	68
VP-709-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	52	VP-872-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	54	XNF-1965	 Novafil™	68
VP-70-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	53	VP-875-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	58	XNF-1966	 Novafil™	68
VP-710-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	54	VP-881-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	53	XNF-1993	 Novafil™	68
VP-711-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	54	VP-889-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	53	XNF-1994	 Novafil™	68
VP-712-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	58	VP-890-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	53	XNF-1995	 Novafil™	68
VP-713-MX	 Surgipro™ II / Surgipro™	52	VP-900-MX	 Surgipro™ II / Surgipro™	57			
VP-713-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	52	VP-900-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	57			
VP-715-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	54	VP-902-MX	 Surgipro™ II / Surgipro™	57			
VP-720-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	53	VP-902-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	57			
VP-725-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	53	VP-904-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	57			
VP-726-MX	 Surgipro™ II / Surgipro™	53	VP-914-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	58			
VP-726-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	53	VP-925-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	58			
VP-727-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	53	VP-926-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	58			
VP-728-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	58	VP-934-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	58			
VP-72-MX	 Surgipro™ II / Surgipro™	52	VP-935-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	58			
VP-72-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	52	VP-936-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	58			
VP-733-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	54	VP-945	 Surgipro™ II / Surgipro™	56			
VP-735-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	57	VP-956	 Surgipro™ II / Surgipro™	58			
VP-737-MX	 Surgipro™ II / Surgipro™	57	VP-973-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	57			
VP-738-MX	 Surgipro™ II / Surgipro™	58	VP-975-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	59			
VP-738-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	58	VP-976-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	59			
VP-73-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	52	VP-977	 Surgipro™ II / Surgipro™	59			
VP-744-MX	 Surgipro™ II / Surgipro™	57	VP-978	 Surgipro™ II / Surgipro™	59			
VP-744-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	57	VPF-522-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	55			
VP-745-X	 Surgipro™ II / Surgipro™	57	VPF-543	 Surgipro™ II / Surgipro™	55			

ЗАМЕТКИ

© 2017 Medtronic. Все права защищены. Medtronic, логотип Medtronic и слоган Further, Together являются торговыми марками компании Медтроник. Все бренды, обозначенные TM, являются собственностью компании Медтроник.

Medtronic

www.medtronic.com
ООО "Медтроник"
123112, Москва,
Пресненская набережная, д. 10
Тел.: +7(495)580-73-77
Факс: +7(495)580-73-78
E-mail: info.russia@medtronic.ru